

DEPILÁTOR  
SAPPHIRE  
s chladicí funkcí

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod pro správnou obsluhu.

## Depilátor SAPPHIRE s funkcí chlazení


Děkujeme, že jste si zakoupili depilační přístroj SAPPHIRE s chladicí funkcí. Tento přístroj, založený na principu "fyzikální terapie", využívá mezinárodně uznávanou technologii IPL, technologii chlazení a snímání tónu pokožky. Díky technologiím soustředěným v malém přenosném přístroji může být bezpečná fyzikální energie přístroje přesně aplikována za účelem snížení obsahu melaninu vlasového folikulu a zpomalení růstu chloupků. Při použití v souladu s růstovým cyklem je možné aplikací IPL světla dosáhnout trvalejšího účinku bez dalšího růstu chloupků.

Přístroj SAPPHIRE současně využívá technologii chlazení založenou na bodu tání čistého jadeitu. Po spuštění chladicího režimu mohou uživatelé po aplikaci cítit chlad, který pomůže rychle ulevit pokožce, snížit její podráždění a přinést méně bolestné zážitky a trvalé odstranění chloupků.

## OBSAH


1 · Bezpečnostní opatření .....	01
2 · Přehled dílů .....	05
3 · Epilátor Sapphire s funkcí chlazení .....	07
1) Funkce .....	07
2) Jak dosáhnout lepšího účinku .....	07
3) Příprava před použitím .....	08
4) Pokyny pro aplikaci .....	09
4 · Postup .....	11
5 · Opatření po použití .....	13
6 · Příloha .....	15

## Bezpečnostní pokyny

- Pečlivě si prohlédněte tabulku pro porovnání tónu pokožky v příloze k tomuto návodu. Nepoužívejte přístroj, je-li tón pleti příliš tmavý, jinak může ošetření způsobit popáleniny.
- Před použitím nepoužívejte žádné přípravky pro péči o pokožku.
- Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se používání, můžete se obrátit na online zákaznický servis.
- Před použitím si nasadte ochranné brýle, přestože světlo nebude mít přímý vliv na oči, může vysokofrekvenční zábleskové světlo může negativně ovlivnit váš zrak.
- Ochranné brýle mohou uživatele chránit při provádění běžné epilace, ale přístroj nepoužívejte na pokožku v okolí očí. 
- Pokud jsou vaše chloupky delší než 1 mm, oholte je nejprve žiletkou. Příliš dlouhé chloupky absorbují teplo na povrchu kůže, což způsobí zčervenání a otok kůže. Pálení chloupků vyvolá zvláštní zápach, který ovlivní váš zážitek z používání výrobku, zároveň sníží účinek odstraňování chloupků a způsobí poškození samotného přístroje.




Ukázka bezpečného používání a body vyžadující vaši pozornost

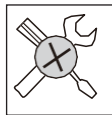

1. Je zakázáno přístroj rozebírat!




2. Ukládejte přístroj na místo, které není snadno přístupné dětem!

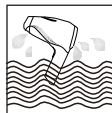


3. Je zakázáno používat přístroj ve vodě, dbejte na odolnost proti vlhkosti!



4. Nepoužívejte v blízkosti ohně.

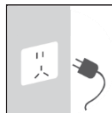

5. Po použití vytáhněte zástrčku z napájecí sítě!

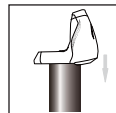

6. Přístroj nesmíte upustit na zem, zejména z velké výšky!



## Věnujte pozornost provozu a ochraně

- Pokud je přístroj poškozený nebo nefunguje správně, nepoužívejte jej;
  - Pokud se v průběhu používání objeví jakékoli potíže, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s odborným lékařem;
  - Nepoužívejte antiperspirant bezprostředně po použití epilátoru v podpaží;
  - Nepoužívejte přístroj v případě zablokování ventilačního otvoru, aby nedošlo ke vzniku kouře a požáru;
  - Výstup světla nesměřujte na černé předměty, aby nedošlo k nesprávnému fungování přístroje
  - Epilační okénko nepřikládejte na oblečení, vlasy nebo jiné předměty, abyste zabránili spálení, změně barvy a poškození
  - Nepoužívejte jej na domácí zvířata, aby nedošlo k jejich poranění;
  - Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti očí, aby nedošlo k jejich poškození
  - Nepoužívejte jej v blízkosti dětí, protože přístroj na odstraňování chloupků vyzařuje silné světlo a snadno poraní dětské oči
  - Nastavte intenzitu energie podle stavu vaší pokožky a ujistěte se, že poprvé použijete stupeň 1;
  - Pokud je pokožka po použití mírně horká a zarudlá, jedná se o normální jev. Můžete zapnout funkci chlazení a zmírnit nepříjemné pocity pokožky;
  - Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů (včetně postřikovačů, čerpacích stanic apod.), mohlo by snadno dojít ke vzniku požáru, zranění elektrickým proudem a dalším rizikům;
  - Okolní teplota pro použití tohoto přístroje musí být 5-40 °C. Před použitím přístroje zkontrolujte teplotu v místnosti;
- 
- Do 24 hodin po epilaci se vyhněte přímému ultrafialovému záření na epilované části;
  - Pokud není pokožka epilované části suchá a čistá, ovlivní to účinek pulzního světla a může to také způsobit, že se přístroj nerozsvítí nebo bude generovat světlo náhodně;
  - Pokud vestavěný ventilátor po zapnutí napájení nefunguje (není slyšet bučení), nepoužívejte jej, aby nedošlo ke zničení přístroje.



## Kdo by neměl používat tento přístroj? Kontraindikace

- Nikdy nepoužívejte přístroj v období hormonální nestability, jako je menstruace, těhotenství a období kojení.
- Nikdy nepoužívejte u osob, které mají kardiostimulátor, srdeční onemocnění nebo jiné závažné zdravotní potíže.
- Tento přístroj je určen pouze pro zdravou pokožku. Při aplikaci se vyhněte oblastí po plastické chirurgii, tetování, černým znaménkům nebo tmavým skvrnám.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, je-li vaše pokožka citlivá na světlo a náchylná k vyrážkám nebo alergiím.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud máte metabolické abnormality kolagenu, včetně anamnézy ohledně znamének a anamnézy špatného hojení ran.
- Přístroj nikdy nepoužívejte na části těla s křečovými žilami nebo cévními ektáziemi, pokud máte cévní onemocnění.
- Používejte přístroj s opatrností, pokud jste v době 30 dnů před plánovanou epilací provedli chemickou depilaci, krátkodobě používali přípravky na bělení pokožky nebo používali kosmetiku obsahující složky vitamínu A.
- Tento přístroj nelze používat současně s produkty s obsahem esenciálních olejů. Ujistěte se, že je pokožka na ošetřovaných místech čistá, suchá a bez krmů, maziv nebo jiných kosmetických přípravků. Pokud není pokožka dostatečně čistá a suchá, může to mít negativní vliv na příjemné pocity při epilaci, a dokonce poškodit přístroj.
- Pokud jste užili léky proti bolesti, které snižují citlivost pokožky na teplo, používejte přístroj opatrně, než účinek léků pomine.
- Nepoužívejte na následující části těla nebo za následujících situací:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Vnitřek dutiny ústní, perineum, sliznice           | 5. Akné, skvrny, mateřská znaménka atd. |
| 2. Oblasti po plastické chirurgii a operované oblasti | 6. Bradavky, areola a pupík             |
| 3. Adamovo jablko, oční bulvy, okolí očí              | 7. Velké žíly                           |
| 4. Obočí, vlasy, uši, hlava                           | 8. Tetování, malování na tělo           |

(Poznámka: Tento seznam není úplný. Pokud si nejste jisti, zda tento přístroj můžete použít, doporučujeme vám poradit se s online zákaznickým servisem)

## Popis dílů

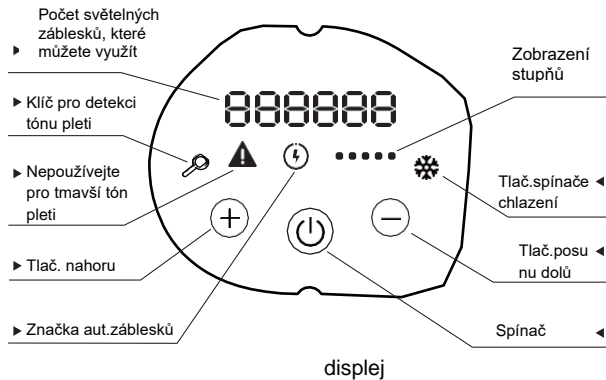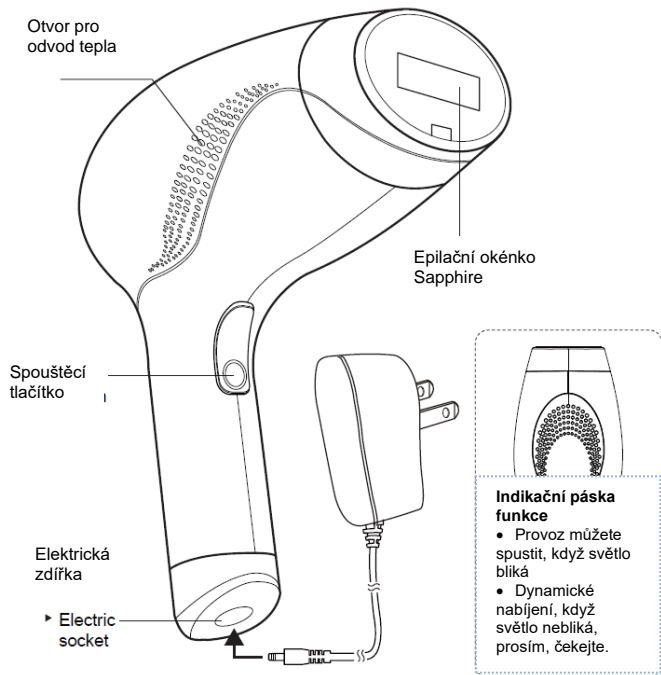

## Specifikace

Název	Epilátor Sapphire s chladicí funkcí	Model	ZHF-IPL- II
Velikost přístroje	152*92*193mm	Hmotnost	398g
Jmenovitý výkon	60W	Výstupní napětí adaptéru	DC 24V 2500mA
Plocha epilačního okénka/ výstupu světla	3.6cm <sup>2</sup>	Implementační norma	GB 4706.15-2008 & GB 4706.1-2005

# Depilátor SAPPHIRE s funkcí chlazení

## Popis funkce

Spektrum vyzařovaného intenzivního pulzního světla IPL (dále jen IPL – intense pulse light) může být ve velmi krátké době přesně absorbováno melaninem ve vlasových folikulech, což způsobuje tepelné poškození vlasových folikulů a zpomaluje jejich regeneraci. Po několikanásobném ošetření se postupně smrští a dosáhne se efektu odstranění chloupků. Čím jsou vlasy silnější a tmavší, tím více energie absorbují a tím lepší je efekt odstranění chloupků.

## Jak dosáhnout dobrých výsledků

Obecně platí, že po 4-5násobné aplikaci se třetím stupněm intenzity záblesků se růst chloupků výrazně zredukuje. Pokud zaznamenáte opětovný růst chloupků, doporučuje se provádět následné ošetření každých 4-8 týdnů. Interval ošetření lze upravit podle osobní rychlosti regenerace chloupků a různých částí těla.

	Doporučovaný stupeň intenzity světla (2-3 aplikace týdně)		
Počet aplikací	První ošetření	Ošetření 2-3x	Ošetření 4-5x
Účinek	Chloupky až jejich vypadávání	Růst chloupků se významně zpomalí	Méně chloupků až udržování hladké pokožky

## Příprava před použitím

### Test na malé ploše pokožky

Pokud používáte tento přístroj poprvé nebo jste se nedávno opalovali, měli byste provést kožní test na každé epilované oblasti, abyste zjistili, zda pokožka reaguje na intenzitu světla.

1. Pečlivě zkontrolujte tabulku odstínu pokožky, nasadte si ochranné brýle a zapněte přístroj
2. Vyberte si malou plochu v oblasti, kde si zamýšlíte odstranit chloupky (nepokoušejte se používat tento přístroj na obtížných nebo citlivých místech, jako jsou kotníky nebo kosti).
3. Začněte od prvního stupně intenzity záblesků, postupně zvyšujte intenzitu (obecně platí, že čím vyšší stupeň, tím větší intenzita záblesků a lepší účinek epilace), vydejte záblesk, a poté přístroj posuňte na další místo.
4. Po provedení kožního testu vyčkejte 2 hodiny, aby se potvrdil stav pokožky. Pokud vybrané plošky podrobené aplikaci jsou po testu normální (bez zarudnutí, puchýřů), můžete tento přístroj bez obav používat.

### Základní pokyny k epilaci

#### ● Epilace v podpaží

1. Před epilací si umyjte podpaží, abyste smyli antiperspirant, parfém, krém a jinou kosmetiku, kterou jste v podpaží použili.
2. Nejprve prsty natáhněte záhyby pokožky, a poté epilujte. Je normální, že kůže přímo pod světelným výstupem mírně páli.

#### ● Epilace v oblasti bikin

1. Na částech těla s nahromaděným pigmentem a na tmavých oblastech pokožky použijte nízký stupeň intenzity světelných záblesků, než se Vaše pokožka adaptuje.

#### ● Epilace rukou a nohou

1. Ošetření pokožky v oblasti kostí nebo na nerovných částech je více bolestivé než na jiných částech pokožky.

- **Nepoužívejte přístroj na následujících částech**

1. Popáleniny, tmavé partie, okolí očí, omrzliny, černé névy, tetování, obočí, vlasy, popáleniny od slunce a další partie.
2. Po epilaci se po dobu 24 hodin vyhýbejte přímému slunečnímu záření na epilovanou pokožku, abyste se vyhnuli ultrafialovému záření, a pokud půjdete ven, použijte opalovací krém.

## Návod k použití

### Zapnutí a vypnutí: (☺)

- Po připojení ke zdroji napájení začnou blikat světelný indikátor, tlačítko spínače, dále blikají tlačítka plus/mínus a epilátor přejde do pohotovostního režimu.
- Dlouhým stisknutím spínače po dobu 3 sekund se epilátor zapne a zobrazí se zbývající počet světelných záblesků a stupně intenzity záblesků; opětovným stisknutím spínače se přístroj vypne.
- Pokud přístroj nebudete po dobu delší než 5 minut používat, přístroj se automaticky vypne.


### Volba stupně a tlačítek: (⊕ / ⊖ / ●●●●●)

- Přístroj má celkem 5 stupňů intenzity. Krátkým stisknutím tlačítka ⊕ zvýšíte stupeň intenzity (tlačítko je nefunkční po zvolení 5. stupně); krátkým stisknutím tlačítka ⊖ snížíte stupeň intenzity (tlačítko bude nefunkční po navolení 1. stupně).
- Tlačítko pro chlazení (❄)

Po zapnutí přístroje se automaticky zapne funkce chlazení a rozsvítí se kontrolka funkce chlazení; pokud funkci chlazení nepotřebujete, stiskněte jednou spínač chlazení, abyste

- Tlačítko detekce tónu pleti (🔑)

Po zapnutí přiložte epilační okénko (okénko, přes které je vyzařováno světlo) kolmo na pokožku oblasti, kde chcete odstranit chloupky. Stisknutím tlačítka detekce odstínu pokožky (jak je znázorněno na obrázku) se zapne snímání odstínu pokožky (indikátor detekce odstínu svítí). Detekci odstínu pokožky vypnete opětovným stisknutím tlačítka detekce odstínu (indikátor detekce odstínu pokožky je vypnutý). Cykly se střídají.

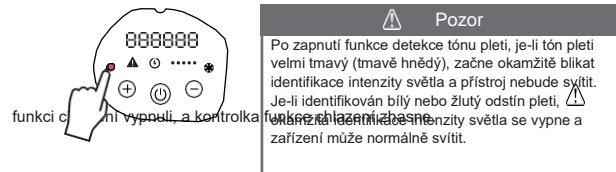



## Volba režimu:

### Manuální režim aplikace

Po zvolení funkce a stupně intenzity světelných záblesků přiložte epilační okénko kolmo na pokožku oblasti, ze které chcete odstranit chloupky, indikátor funkce bliká. Stisknutím světelného tlačítka spustíte silný světelný záblesk (IPL) pro epilaci oblasti.

### Automatický režim aplikace ( )


Po zvolení funkce a stupně intenzity světla se po stisknutí světelného tlačítka na 3 sekundy zapne automatický režim epilace, kontrolka automatické aplikace se rozsvítí a opět zhasne, jakmile bude epilační okénko přiloženo kolmo k pokožce; automatický světelný režim vypnete opětovným stisknutím tlačítka na 1 sekundu.

- 
- 

#### Notice

- V režimu manuální aplikace bliká indikátor funkce, který signalizuje, že je k dispozici dostatek energie pro spuštění záblesku. Je-li vypnutý, indikuje, že se přístroj nabíjí a akumuluje energii (hlavice přístroje zůstává na pokožce).
- Pokud se přístroj vzdálí od pokožky, světlo se vypne. Jakmile se výstup světla opět dotkne pokožky, světlo se automaticky rozsvítí.
- Rychlost automatického výstupu světla souvisí se zvoleným stupněm intenzity světelných záblesků, čím vyšší stupeň je zvolen, tím delší bude interval automatického výstupu světla.

## Postup

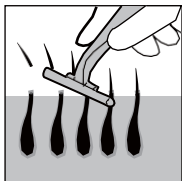

1. K odstranění viditelných chloupků z pokožky v délce 1-2 mm použijte odpovídající holicí strojek;




2. Při přípravě epilace noste ochranné brýle;



3. Připojte přístroj ke zdroji napájení, stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje. Ujistěte se, že se výstup světla (epilační okénko) nachází kolmo na pokožce, a poté můžete začít s aplikací;



4. Pro úpravu intenzity světla stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, přičemž můžete volit mezi stupni 1 až 5. Při první aplikaci doporučujeme začít stupněm 1 a po přizpůsobení zvolit vhodný stupeň podle aktuální situace.

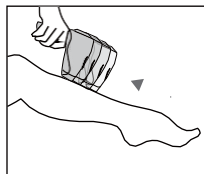

5. Zvolte automatický/manuální režim aplikace, epilační okénko epilátoru přiložte kolmo na epilovanou oblast, a poté hlavicí posouvejte dále.

### ⚠ Poznámka

Manuální režim se doporučuje pro malé oblasti, jako jsou rty a podpaží, a automatický režim pro velké oblasti, jako jsou paže a nohy.

Po každém záblesku trvá asi 2 sekundy, než je možný další záblesk.

### ⚠ Pozor – pokyny pro použití

- Před použitím si nasadte ochranné brýle.
- Při používání dbejte na to, aby epilační okénko zcela přiléhalo k pokožce. Pokud přístroj nepřiléhá k pokožce, přístroj nebude blikat (viz Obr. 1 a 2 níže).
- Zařízení při blikání vydává mírný praskavý zvuk. V důsledku záblesku budete mírně cítit teplo.  
Aby bylo zajištěno, že se dostanete ke všem částem, měl by být záblesk vyzařován v oblastech, které jsou blízko sebe.
- Při použití na malé ploše můžete vygenerovat určitý počet překrývajících se záblesků, ale ujistěte se, že počet záblesků na stejné ploše je menší než tři, více záblesků na stejné ploše nezlepší účinek aplikace, ale zvýší riziko kožní reakce. Abyste se vyhnuli vedlejším účinkům na kůži, nepoužívejte k označení epilované oblasti žádné pero.

1



2



## Záležitosti vyžadující pozornost po použití

### Ošetření po použití

1. Doporučuje se vyvarovat se dotyku s vodou po dobu 2 hodin od epilace. Poté lze k hydrataci použít zvlhčující vodu.
2. Po epilaci nepoužívejte parfémy, masky ani kosmetiku obsahující peelingové kuličky.
3. Během 48 hodin po epilaci se vyhněte vystavení ultrafialovému záření a v případě potřeby použijte opalovací krém.
4. Opalování pravděpodobně způsobí ztmavnutí kůže nebo její spálení a budete-li epilaci provádět v této době, dojde k zarudnutí, otoku, zánětu a dalším stavům. Z tohoto důvodu věnujte při používání tohoto přístroje tomu, abyste se nevystavovali slunci, doba zahojení spálenin po opalování činí nejméně 1 týden.
5. Abychom zabránili umělému opálení kůže během epilace, měli bychom vždy dávat pozor na výskyt nepříznivých kožních stavů.
6. Pokud po epilaci potřebujete plastickou operaci (týká se pouze epilovaných oblastí), poraďte se se svým lékařem.

### Údržba přístroje

1. Po použití přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení;
2. Očistěte depilační okénko SAPPHIRE
3. Uložte brýle a přístroj do krabice.



#### Pokyny pro údržbu

Aby byl zajištěn co nejlepší účinek a co nejdelší životnost přístroje, přístroj před a po každé epilaci očistěte, aby se na něm nehromadily chloupky a prach.

- Přístroj nevkládejte za účelem čištění do vody ani pod vodovodní kohoutek. K čištění přístroje nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky (zubní pastu apod.)
- ani žádné chemické čisticí prostředky.

Pokud není čisticí účinek vody dobrý, lze k čištění výše uvedených součástí použít několik kapek alkoholu o vysoké koncentraci (max. 96 %).

## Často kladené otázky

### Q1 : Proč nelze přístroj zapnout?

A1 : Možná není správně připojen ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj připojen nebo ne.

### Q2 : Proč nesvítl kontrolka funkce ?

A2 : Může být problém, že se přístroj nerozsvítí. Zkontrolujte, zda napájení funguje správně. Pokud napájecí zdroj nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis, aby výrobek opravil nebo jej neprodlouženě vrátil.

### Q3 : Proč přístroj nemůže emitovat světlo?

A3 : Zkontrolujte, zda není teplota hlavičky a těla přístroje příliš vysoká a zda se výstup světla nenachází příliš blízko kůže. Pokud je teplota příliš vysoká, počkejte před použitím přístroje, dokud se přirozeně neochladí; pokud není světelný výstup/epilační okénko blízko kůže, přiložte světelný výstup blízko k pokožce a počkejte, až začne blikat indikátor funkce.

### Q4 : Bude epilace přístrojem bolet? Je bezpečný?

A4 : Epilace není bolestivá.

### Q5 : Budou póry po použití rozšířené a vzniknou černé skvrny?

A5 : Ne. Vlasové folikuly se vylučují z těla spolu s produkty metabolismu a póry se působením přístroje do určité míry stáhnou, takže černé skvrny a póry se nezvětší.

### Q6 : Ovlivní to pocení po epilaci?

A6 : Ne. Chloupky rostou z vlasových folikulů, zatímco ve struktuře kůže jsou vlasové folikuly a potní žlázy nezávislé tkáně, takže epilace neovlivní pocení.

## PŘÍLOHA

- ⚠ Porovnejte prosím barvu své pleti s tabulkou odstínů pleti v tomto návodu nebo na obalu (viz příloha) a zjistěte, zda je váš odstín pleti vhodný pro použití epilátoru.  
(Vezměte prosím na vědomí, že tento přístroj nelze použít pro odstíny označené "x".)

