

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-1 k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami 1 MHz



- Děkujeme, že jste si koupili tento strojek na ošetřování kůže ultrazvukovými vlnami.
- Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál obsahující provozní instrukce a příručku uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.
- Výrobek je určen k uskutečnění péče o normální kůži a k jejímu zkrášení. Žádný jiný způsob používání ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.

Obsah

Princip přístroje k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami	3
Bezpečnostní instrukce	4
Popis jednotlivých dílů	5
Způsoby provozování	6
Jak ošetřit vaši tvář (zvolte nízkou úroveň)	6
Základní způsob ošetření vašeho obličeje	6
Speciální metoda k ošetření obličeje.....	8

Specifikace

Název: Přístroj k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami
Příkon adaptéru: AC 100 – 240 V
Výstupní výkon adaptéru: DC 5V 1000 mA
Rozměry (cm): 17 x 3,8 x 4,3
Váha (g): 190
Frekvence: 1 MHz \pm 5%

Princip přístroje k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami

Ultrazvukové vlny jsou vyšší než 20000 Hz a nemohou být zaslechnuty lidským uchem. Jsou ve velké míře využívány v lékařském ošetřování. Po několik let využíváme technologii ultrazvukových vln v ošetřování kůže. Strojek na ošetření kůže ultrazvukovými vlnami se ve většině salonů krásy stává jedním z hlavních produktů péče o kůži.

Funkce ultrazvukových vln na lidskou kůži:

1. Funkce mechanického dotyku
2. Funkce zahřívání a fyzikálně-chemická funkce

Ultrazvukové vlny mohou vyvolat změny v objemu a pohybu lidských buněk. To je známo jako jemná masáž buněk. Masáž stimuluje a upravuje buněčnou membránu. Zvyšuje výkon pokožky a teplota vnitřní kůže roste o 0,5 – 1 °C. Proto se tím zlepšuje vstřebávání výživy kůží, urychluje se metabolismus a obnova kožní tkáně.

Ultrazvukové vlny rovněž dokáží rozkládat tuk v pasu, spotřebovávají energii, obnovovat poškozené lymfatické a kapilární cévy, a tím může u vás vyvolat ztrátu váhy a dosažení hezkého tvaru.

Bezpečnostní instrukce

- Zařízení je určeno pouze pro ošetření a zkrášlení kůže. Nepoužívejte pro žádný jiný účel.
- Postupujte podle Manuálu provozních instrukcí a regulujte frekvenci použití. Dobu provozu zkratěte při prvním použití nebo pokud je vaše kůže velmi citlivá.
- Zastavte použití, pokud zjistíte jakoukoli neobvyklou reakci. Okamžitě konzultujte svého lékaře.
- Pokud jste těhotná, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, před použitím tohoto přístroje konzultujte lékaře.

Zařízení nepoužívejte



- pokud jste těhotná,
- na čelo, spánky, ucho, krk, oční bulvy a okolí očí, přímo na některá kloubní spojení, jako jsou loket a koleno, atd.
- Na kůži, která je spálená od slunce nebo zanícená.
- Pokud máte dermatitidu nebo jinou kožní alergii, způsobenou kosmetickým make upem.
- Na jiné oblasti, kde je na kůži vyrážka, akné nebo zanícená kůže.
- Na skvrně, kde kůže svědí nebo je horká.
- Na skvrně způsobené fyzickým podrážděním.
- Na části těla, kde došlo k chirurgickému plastickému zákroku.
- Na místech, kde jste si oholila chloupky krémem na odstraňování chloupků nebo holicím krémem.
- Na jiné části těla nebo kůže, jež nebyla zmíněna v tomto provozním návodu.



Preventivní opatření při provozu a údržbě


- Zařízení nepoužívejte, jestliže jsou jeho kabely, zásuvka a zástrčka přehřáté, poškozené nebo ztracené.
 - Nepokládat na vlhký povrch nebo v blízkosti vody.
 - Máte-li mokré ruce, nepracujte s přístrojem a nedotýkejte se ho.
 - Před uložením vypněte napájení a odpojte od zdroje.
 - Přechovávejte mimo dosah dětí.
 - Děti nesmí s přístrojem pracovat.
- *Před prvním použitím si proveďte test na alergii.**

Jednoduchý test na alergickou reakci:

1. Očistěte zápěstí.
2. Na očistěnou plochu aplikujte trochu speciální esence a nechte přirozeně zaschnout (během testu nesmí přijít do styku s vodou a nesmí se smýt). Pokud zjistíte alergickou reakci neb o nenormální reakci kůže, okamžitě zastavte test a ihned kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
3. Pokud se do 48 hodin neobjeví alergie ani jiná forma kožní reakce, můžete tuto speciální unikátní esenci a toto zařízení pravidelně používat.




Popis jednotlivých dílů

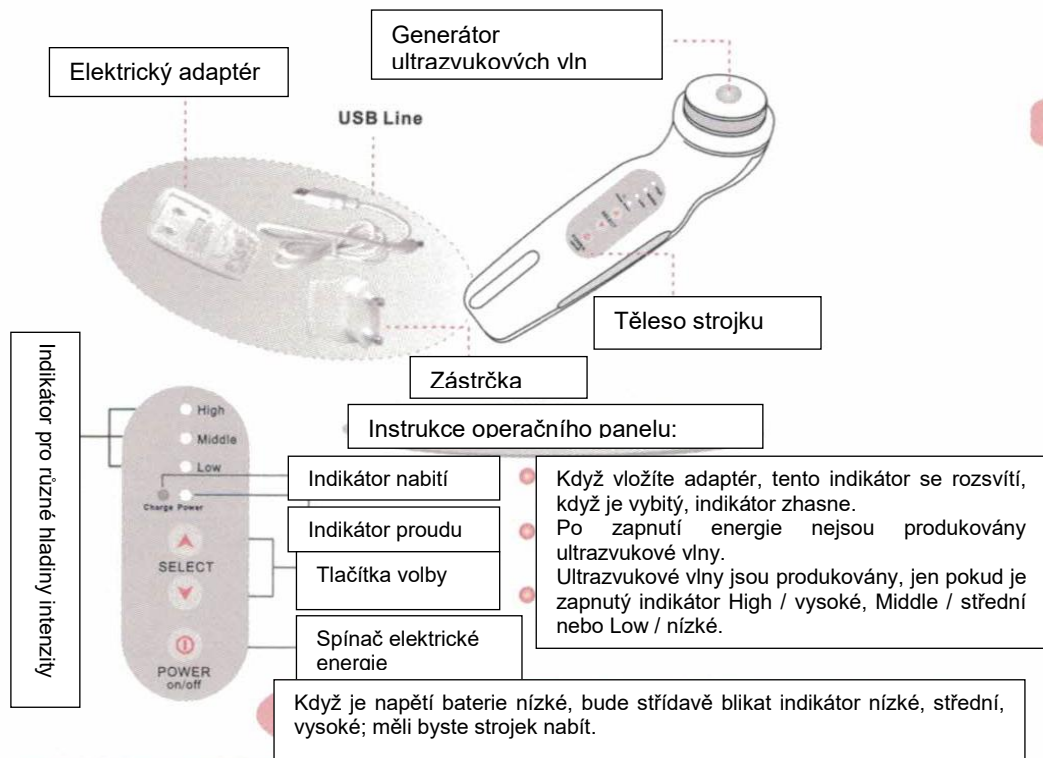

Provozní proces a testování

Provozní proces a testování

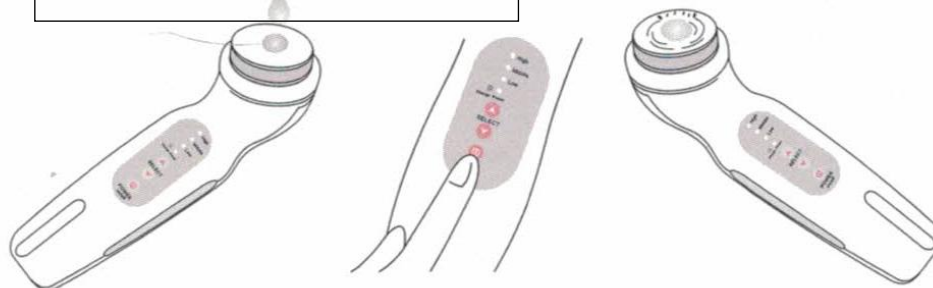

Zařízení položte na rovnou plochu a do generátoru ultrazvukových vln vložte pár kapek vody.

Zapněte proud a zvolte jednu z úrovní: nízkou, střední nebo vysokou.

Jestliže voda v generátoru ultrazvukových vln vibruje, jsou produkovány ultrazvukové vlny.

Způsoby provozování

Jak ošetřit vaši tvář (zvolte nízkou úroveň)

1. Nejprve pečlivě odstraňte make-up a nečistoty. Ošetření kůže ultrazvukovými vlnami se musí provádět na vyčištěné kůži.
2. Zapněte proud a světlo indikátoru se rozsvítí.



3. Aplikujte přiměřené množství esence na obličej a vyhněte se oblasti očí. Ujistěte se, že plocha ošetřování je dobře pokryta esencí. (Poznámka: Vysoce doporučujeme použít naši designovou esenci MAYA pro její nejlepší výkon a vedení ultrazvukových vln).
4. Aplikujte přiměřené množství esence na generátor ultrazvukových vln.



5. Stiskněte tlačítko intenzity a zvolte nízkou úroveň.

Jakmile přístroj začne vydávat ultrazvukové vlny, nastartuje se časové zařízení. Po deseti minutách se přístroj automaticky vypíná.

Návrh: Měli byste raději použít designovou esenci k převodu ultrazvukových vln.




Základní způsob ošetření vašeho obličeje


Krok 1, vyžaduje 8 minut.

Pomocí generátoru ultrazvukových vln masírovat stejnoměrně kůži.


- Krok 1 vyžaduje 8 minut. Pomocí generátoru ultrazvukových vln rovnoměrně masírujte kůži. K tomu jsou zapotřebí 4 minuty. Nejprve během čtyř minut ošetřete generátorem ultrazvukových vln pravou stranu obličeje (použijte k tomu časové zařízení nebo hodinky). Potom pracujte další 4 minuty na levé straně obličeje. Přístrojem pracujte v pořadí uvedeném na obrázku a pracujte pohybem nahoru (asi třikrát).

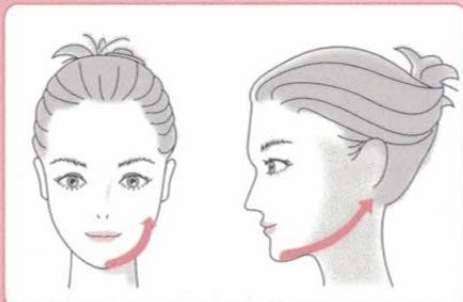


1. Naznačenou cestou od čelisti ke kořeni ucha

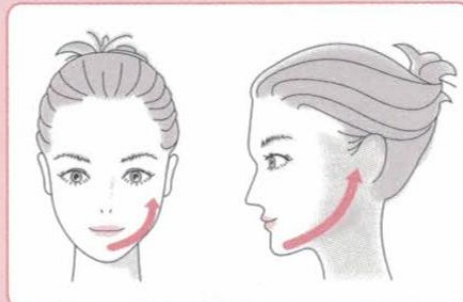


2. Naznačenou cestou od čelisti k přední části uší

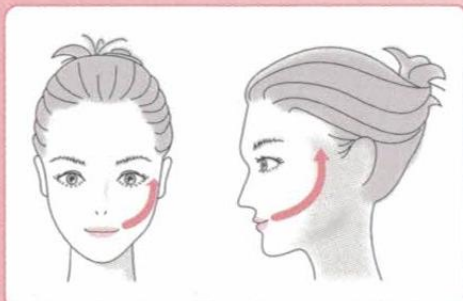


3. Naznačenou cestou od koutku úst k horní části ucha

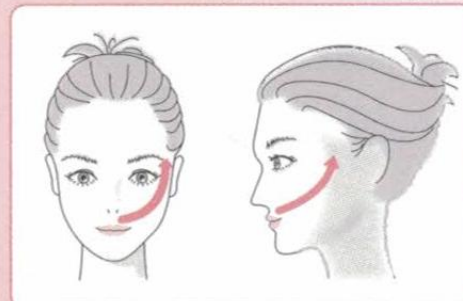

4. Naznačenou cestou od spodní části nosu směrem k místu blízko vašeho obočí

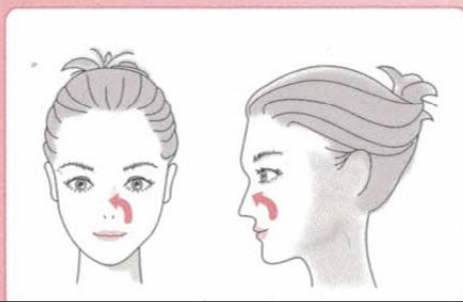

5. Naznačenou cestou ošetřete obě strany nosu

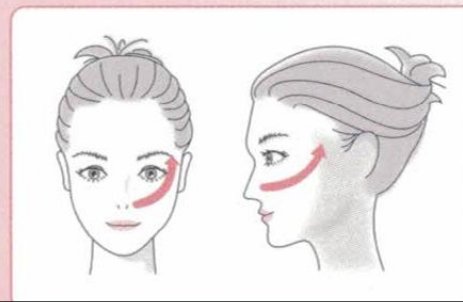


6. Naznačenou cestou od nosu směrem k oblasti blízko spánku

Speciální metoda k ošetření obličeje

(Doba ošetření: 2 minuty)

Zemská gravitace, rostoucí věk, tloušťnutí, všechny tyto faktory způsobují povolení kůže, její vytahování i dvojitou bradu. U následujících ošetření trvá 30 vteřin – 1 minutu na každou oblast ošetření. Na generátor ultrazvukových vln použijte mírný tlak, aby zvedal kůži a svaly ve směru šipky na obrázku. Po této základní metodě ošetření kůže nyní můžete použít speciální metody ošetření.

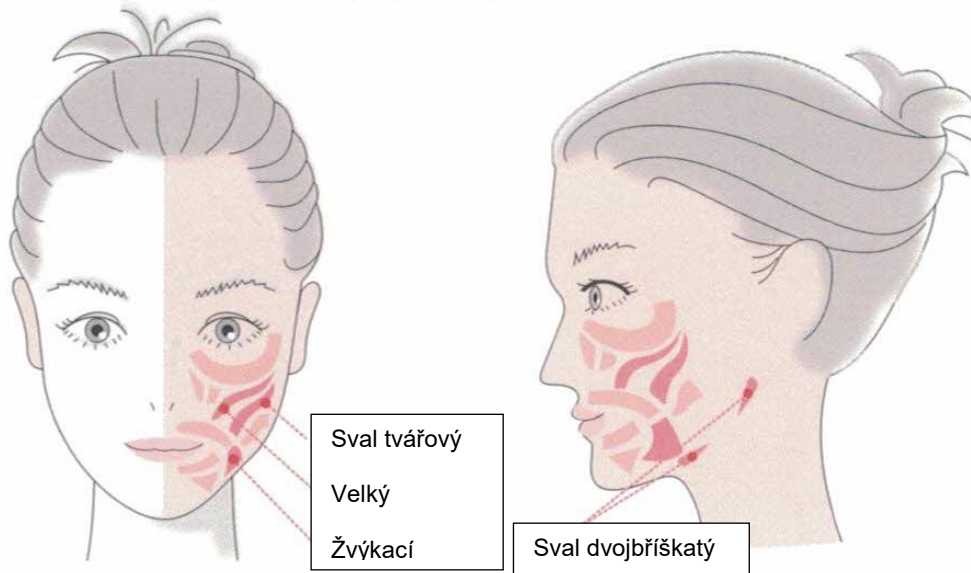

Obličejové svaly jsou zobrazeny na výše uvedeném výkresu.

- Lepších výsledků můžete dosáhnout, pokud budete generátorem ultrazvukových vln klouzat rovnoběžně se strukturou svalů.

Ošetření ke zpevnění obličeje

Ošetření ke zvednutí koutků úst




• Ošetření od koutku úst směrem k oblasti blízke očím.



• Ošetření od koutku úst pohybem směrem nahoru

Ošetření ke zpevnění dvojité brady

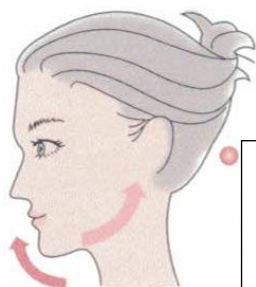

• Klouzejte od brady k spodní části ucha, od brady do koutku úst. A vždy klouzejte od spodních partií k partiím horním.

O ošetření T-polohy




• Nahoru a dolů po nosu po dobu jedné či dvou minut.

Ošetření ekzému a akné

• Neošetřujte přímo partie, na kterých je ekzém, skvrny, akné, spálení od slunce atd. Ovšem můžete ošetřit kůži kolem, abyste napomohli přírodnímu zahojení problémů na kůži.



Doporučení k péči o kůži

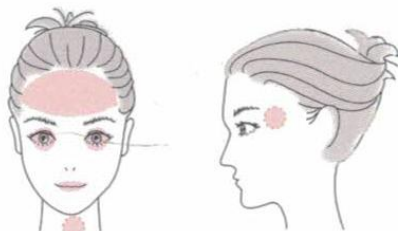

• Nepoužívejte na čelo, oči ani krk, protože byste mohli poškodit kůži.

Použití pokaždé
4 – 5 g kapaliny

• Přidejte trochu esence, pokud generátor neklouže.



• **Kontaktujte bokem generátoru**
Bok generátoru musí pevně poklepávat na kůži.



Pohyb boku generátoru

1. Pomalu posouvajte 5s od brady k zadní části ucha.
2. Posouvajte geometricky zdola nahoru, zleva doprava.

Způsoby ošetření určitých tělesných partií

Maximální ošetření téže tělesné partie činí pokaždé 10 minut, ale ne častěji než dvakrát denně, ne častěji než třikrát týdně.

- (1) Tělo pečlivě omyjte mýdlem a vodou, abyste odstranili veškeré nečistoty.
- (2) Na tělesnou partii aplikujte před ošetřením přiměřené množství esence MAYA.
- (3) Přiměřené množství esence MAYA aplikujte na generátor ultrazvukových vln.
- (4) Stiskněte tlačítko ON a rozsvítí se červená kontrolka proudu.
- (5) Zvolte hladinu intenzity (k ošetření na pažích a lýtkách zvolte střední úroveň, pro ošetření v oblasti pasu, žaludku, hýždí a stehen zvolte úroveň vysokou).
- (6) Generátor ultrazvukových vln položte jemně na tělesnou partii s mírným tlakem. Ujistěte se, že mezi generátorem a tělem není mezera.
- (7) Každých 10 minut zazní alarm, pípání se utíší a přístroj se automaticky vypne. Potom můžete začít s jinou tělesnou partií, když stisknete tlačítko ON. Pokud chcete strojek zastavit předtím, stiskněte tlačítko do polohy OFF.
- (8) Po ošetření si navlhčeným ručníkem otřete zbytky esence s povrchu těla. Můžete ji případně smýt teplou vodou. K otření zbytků esence z generátoru ultrazvukových vln použijte jemnou utěrku (nepoužívejte vodu, benzín ani alkohol).



Varování

Toto zařízení nepoužívejte přímo na střed krku, kolem očí, očních víček, na některá kloubní spojení, jako jsou lokty a kolena, atd.

Ošetření těla

*Upozorňujeme, že toto je pouze všeobecný způsob ošetření. V případě sofistikovaných a profesionálních způsobů ošetření konzultujte laskavě svého kožního poradce.

Ošetření obou paží


zpevní povolené svalstvo vašich paží, a také je zbaví tuku.

Intenzita: zvolte MIDDLE / střední

Čas: ošetření zabere 35 minut.

Postup:

1. Generátorem ultrazvukových vln kreslete nepřetržité kruhy ze spodní partie směrem k partii horní.
2. Případně postupujte cestou uvedenou na obrázku.
3. Vyhněte se přímému kontaktu s loktem.

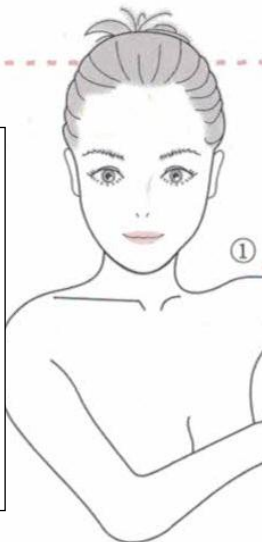

Ošetření pasu a žaludku

Pokud jste těhotná, nepoužívejte tuto aplikaci

Funkce: Snížení váhy a obnovení hezké postavy

Intenzita: Zvolte HIGH / vysoká


Čas: toto ošetření trvá 8 - 10 minut

Pas:

- 1) Generátorem ultrazvukových vln klouzejte nahoru a dolů po struktuře svalstva v pasu.
- 2) Generátorem ultrazvukových vln klouzejte zvenku dovnitř do středu pasu.

Žaludek:


- 1) Generátorem ultrazvukových vln provádějte kruhy kolem pupíku podle obrázku (3).
- 2) Podle (4) klouzejte generátorem ultrazvukových vln kolem žaludku, jako kdybyste malovali velká kola.

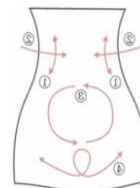

Lýtka

Funkce: Snížení váhy a obnovení hezké postavy
Intenzita: Zvolte MIDDLE / střední
Čas: toto ošetření trvá 3 – 5 minut.
Intenzita: Zvolte HIGH / vysoká
Čas: Toto ošetření trvá 8 – 10 minut


Krok 1: Generátorem ultrazvukových vln klouzejte rovně ze spodní partie lýtka k horní partii (jako cesta 2).
Poznámka: Neošetřujte přímo koleno (vyhněte se kloubovým spojům).

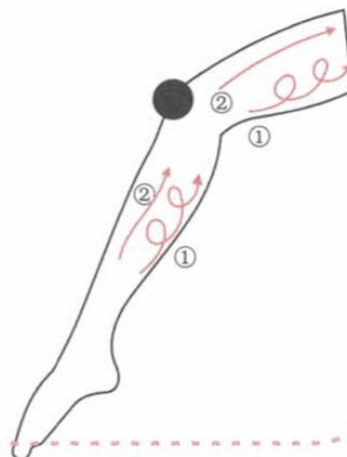

Zpevnění a vytažení hýždí

Funkce: Jak víte, naše hýžďové svalstvo může povolit a ztratit tvar. Toto ošetření hýždí dokáže zpevnit svalstvo a zlepšit tvar hýždí.

Intenzita: Zvolte HIGH vysoká
Doba ošetření: 10 minut
Způsob: Generátorem ultrazvukových vln klouzejte podle obrázku od spodní partie k horní, zvenku směrem ke středu hýždě.

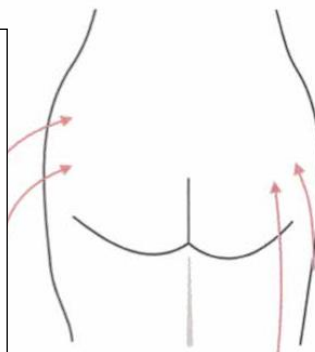

Další speciální ošetření


Intenzita: zvolte MIDDLE / střední
Doba provozu: každá noha trvá maximálně 1 minutu.
Při ošetření chodidel postupujte podle obrázku.

Toto ošetření může zlepšovat tok lymfy, a tím napomáhat léčení otoku.



Ošetření rukou a paží

Intenzita: zvolte LOW / nízká
Doba provozu: na každé ruce a paži 5 minut
Krok 1: Pracujte podle obrázku (1)
Krok 2: Pracujte podle obrázku (2)
Krok 3: Pracujte podle obrázku (3)
pomocí generátoru ultrazvukových vln klouzejte od konečků prstů k paži.

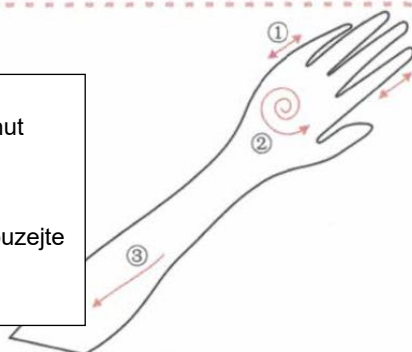


Bezpečnostní opatření

- Pokud cítíte, že je generátor ultrazvukových vln přehřátý, okamžitě vypněte přístroj.
- Zajistěte, aby generátor stále klouzal. Nezastavujte klouzání na jedné ploše.
- Toto zařízení nepoužívejte na kůži, pokud jste ji pečlivě nezvlhčili speciální designovou esencí k ošetření kůže. (Musíte použít speciální designovou esenci k ošetření kůže, kterou lze zakoupit v obchodě.)

Po použití

Zastavte produkci ultrazvukových vln, stiskněte POWER k vypnutí.

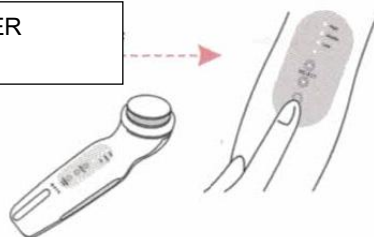

Očistěte esenci z generátoru



- Nečistit vodou
- Nečistit benzínem, banánovou vodou, alkoholem.

Omyjte s kůže vodou zbytky esence.



O nabíjení

Kapacita baterie při uložení a přepravě je pouze 30%, proto ji před použitím nabijte. Normální doba nabíjení je 3 hodiny.

Dobít se může z počítače přes USB, připojením zařízení k USB kabelu.

Dobijte přes adaptér, zapojte adaptér do nástěnné zásuvky.

Dobijte nabíječkou s PC nebo adaptérem.

Q&A

Časté dotazy a odpovědi

Kdy je nejlepší čas k ošetření vaší kůže?

Nejlepší je čas, než jdete do postele, protože po ošetření by měla mít vaše kůže dostatek odpočinku k důkladnému absorbování výživy.

Jak často mohu použít zařízení k ošetření kůže ultrazvukovými vlnami?

Strojek můžete provozovat na téže partii těla maximálně 10 minut denně a ne častěji než třikrát týdně. Jinak bude vaše kůže nadměrně stimulovaná a nebude moci dosáhnout žádoucích výsledků.

Proč bychom měli používat speciální designovou esenci?

Speciální designová esence je nejlepší pro vedení ultrazvukových vln do kůže (je-li vzduch mezi generátorem vln a kůží, tento vzduch ovlivní nepříznivě vedení ultrazvukových vln do kůže). Naše esence je speciálně konstruovaná a vyrobená pro strojek na ošetření kůže ultrazvukovými vlnami. Můžeme zaručit kvalitu, výkon a bezpečnost esence, a že dosáhla standardů výrobců pro lékařství.

Záruka

Model

Datum nákupu

Místo nákupu

Prodejní odd.

Jednoletá záruka na opravu

1. Je velmi nepravděpodobné, že by u vašeho výrobku došlo k závadě během prvních dvou let od zakoupení.
2. Výrobek vraťte s pokladním dokladem a originálním záručním listem a my jej zdarma opravíme za předpokladu, že jste s ním pracovali v souladu s manuálem provozních instrukcí.
 - (1) Rozbití nebo poškození jako následek nerespektování provozních instrukcí.
 - (2) nesprávná nebo neoprávněná oprava
 - (3) náhodné poškození během vaší vlastní přepravy, nebo spadnutí na podlahu, nebo úmyslné poškození či zanedbání výrobku po zakoupení.
 - (4) požár, zemětřesení, počasí jako záplava, blesk, silný vítr.
3. Tato záruka je omezena na výrobky zakoupené a použité v Číně.

Bude vydáno.