

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-8 pro ošetření očí a oživení očního okolí

- Děkujeme, že jste si koupili toto multifunkční revitalizační zařízení na ošetření očí.
- Řiďte se směrnicemi v této příručce a zachovávejte uvedené bezpečnostní instrukce. Příručku uschovejte pro budoucí použití.
- Zařízení je určeno k provádění běžné péče o oči a kůži. Žádné jiné způsoby použití a prodej v souvislosti s léčebným účelem nejsou podporovány.

3 funkce v 1 přístroji Multifunkční revitalizační péče o oči

Jde o malé zkrášlovací zařízení ve tvaru pera, které poskytuje celou řadu ošetření ke zlepšení očí. Má na jednom konci kuličku a na druhém konci ultrazvukovou ocelovou hlavu. V pouhých dvou krocích ji můžete kdykoliv snadno použít na kterémkoliv místě:

1. Doplnění výživy do kůže k hlubokému zvlhčení a hydrataci
2. Zpevnění a posílení kůže
3. Úprava drobných a jemných vrásek
4. Zesvětlení tmavých kruhů, odstranění pytlíků pod očima a odulosti
5. Čištění a detoxikace lymfatického systému

Obsah

Detaily výrobku	3
Bezpečnostní instrukce	4
Jednotlivé díly	5
Funkce	6
Před použitím	7
Rychlý průvodce uživatele	8
Po použití	10

Detaily výrobku

Název: 3v1 Multifunkční revitalizační zařízení k péči o oči
Příkon: AC 100V – 240 V
Výstupní výkon: DC 5V 1.000 mA
Rozměry (cm): 16 x 4,8 x 3,5
Váha (g): 118
Průměr ultrazvukové hlavy (mm): 25
Časové nastavení: Automatické zastavení po 5 minutách
Ultrazvukový kmitočet: 3 MHz ± 5%

01

Bezpečnostní instrukce

- Zařízení je dimenzováno k zajištění běžného ošetření očí a kůže. Použití pro žádný jiný účel není podporováno.
- Před použitím si laskavě pozorně přečtěte tuto kapitolu. Při používání respektujte instrukce a četnost použití regulujte v souladu s instrukcemi v tomto manuálu. Při prvním použití a je-li vaše kůže velmi citlivá, zkráťte dobu ošetření.
- Přestaňte s ošetřením, pokud se začnete cítit nepříjemně. Okamžitě konzultujte svého lékaře.

Zařízení nepoužívejte

- s lékařskými zařízeními, jakými jsou kardiostimulátor, generátor kyslíku, elektrokardiograf, atd.
- při výskytu některé z okolností dále uvedených:
 - během těhotenství nebo měsíčku
 - při alergické dermatitidě nebo krvácení
 - při podráždění kůže nebo zarudnutí v důsledku nadměrného opalování
 - v případě kožních vředů nebo zánětů
 - po kosmetických operacích příslušných částí těla
 - při rozšíření kapilár nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým používáním steroidů a hormonů

02




POZNÁMKA

- Přístroj sami nerozebírejte
- Přechovávejte mimo dosah dětí
- Přechovávejte mimo dosah ohně
- Přechovávejte mimo dosah vlhkosti a vody
- Nedovolte, aby přístroj spadl nebo narazil
- Po použití odpojte elektrický kabel

Jednotlivé díly

Tlačítko iontové
revitalizace

Tlačítko ultrazvukové
masáže

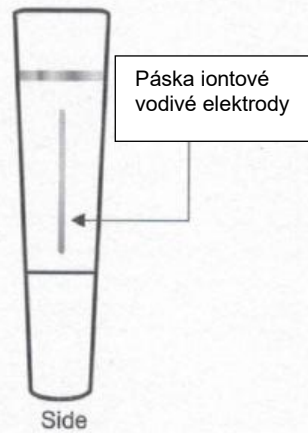


Ultrazvuková masážní
hlava



Funkce

Technologie, které volíme, obsahují 3 MHz ultrazvuk, iontovou vodivou a tepelnou masáž, jež jsou klinicky prověřené jako bezpečné a účinné a vhodné pro všechny pokožky. Stačí pár minut, probudíte zevnitř mládí a krásu svých očí.

- 3 MHz ultrazvuk: vyčištění a detoxikace lymfatického systému; odebere přebytečnou vodu a tuk z okolí očí. Zpevní a zvedne vaši kůži s viditelnými výsledky po použití.
- Ošetření iontovou vodivostí: váš produkt k péči o oči předá hluboko do kůže, aby se tak zvýšil jeho účinek; zvlhčí a hydratuje kůži; prosvětlí tmavé kruhy a vyrovná pytlíky pod očima.
- Zahřívací masáž: vestavěný systém zahřátí $40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ může ulevit napětí v očích, urychlit cirkulaci krve v kapilárách kolem očí, a tím zmenšit jemné a drobné vrásky a rozzářit vaše oči.
- Stimulace akupresních bodů: při pohybu kolem očí dokáže stimulovat okolní akupresní body, osvěžit vaši pokožku a podpořit zmenšení otoků a pytlíků pod očima.

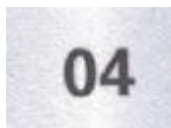

Provozní instrukce:

- **ON/OFF:** dlouhé stisknutí tlačítka „Reviving“ / revitalizace nebo „Sonic“ k zapnutí / vypnutí napájení.
- **Zvolit funkci:** Iontové vedení s tepelnou masáží: „Revitalizační ultrazvukové ošetření: „Sonic“



Potvrzení ultrazvuku:

Položte ultrazvukovou hlavu rovně hlavou nahoru, do hlavy aplikujte několik kapek vody a stiskněte „Sonic“. Kapka vody bude vibrovat při zapnutí ultrazvuku.



Potvrzení iontového vedení s tepelnou masáží:

Tepelná masáž:

Stiskněte „Reviving“ a kulička během tří minut pomalu zvýší svou teplotu na cca 40 °C (pro referenci 28 °C teplota v místnosti). Dotkněte se kuličkou pokožky a teplo lze cítit.

Iontové vedení:

Můžete pociťovat jemné brnění nebo znecitlivění, když je zapnutá iontová vodivost. Různé produkty k ošetření kůže a různé typy kůže mohou vést k různým vjemům.

- Zastavení: jak "Reviving, tak „Sonic“ se automaticky zastavují po pěti minutách. Zařízení se zastaví po zapípání.
- Nabíjení: před prvním použitím a pokaždé, když se baterie vybita, je třeba nabít ji.

Nabíjejte před prvním použitím nejméně tři hodiny, aby se aktivovala lithiová baterie uvnitř.

Při nabíjení: synchronní blikání dvou kontrolkek

Dokončené nabíjení: nepřetržitě svítí obě kontrolky

Vybitá baterie: cirkulující blikání dvou kontrolkek, automatické zastavení po deseti blikajících kolech.

Doba nabíjení	Celková doba provozu
asi 3 hodiny	asi 2 hodiny

(výše uvedená provozní doba závisí na bezprostředním použití po úplném nabití)



Před použitím

Frekvence používání:

Režim	Frekvence používání
Reviving	2 – 3x týdně, pokaždé 3 – 5 minut
Sonic	2 – 3x týdně, pokaždé 5 – 10 minut

Rychlý průvodce uživatele

Viditelné výsledky brzo po použití k ošetření všech nepříjemností kolem očí (tmavé kruhy, pytlíky, otoky, jemné vrásky atd.), lze použít také na obličej, což pomáhá ve znovuzískání pružnosti vaší kůže.

Krok 1:

Odstraňte make up a vyčistěte kůži

Krok 2:

Svůj produkt k ošetření očí aplikujte stejnoměrně kolem očí a výživu zavádějte hluboko do kůže pomocí funkce REVIVING / revitalizace (viz podrobnosti na dalších stranách), aby se zmenšily tmavé kruhy a pytlíky pod očima.

Krok 3:

Gel aplikujte stejnoměrně na obličej a pomocí funkce SONIC (viz podrobnosti na dalších stranách) provádějte masáž tak, abyste odstranili přebytečnou vodu a tuk a odstranili jemné vrásky, ale také abyste vyčistili a detoxikovali lymfatický systém.

Tipy:

1. Položte ultrazvukovou hlavu jemně na kůži a zajistěte její těsný kontakt s vaší kůží během používání.
2. Pokud kulička nebo ultrazvuková hlava nejsou dostatečně lubrikovány, aby klouzaly hladce po kůži, aplikujte na pokožku větší množství esence nebo gelu.
3. Vyhněte se očím a neprodlévejte delší dobu na spáncích.

Průvodce uživatele ve funkci REVIVING (revitalizace)

1. Vyčistěte kůži.



2. Aplikujte ošetřující produkt kolem očí, sledujte směr od vnitřních koutků očí ke spánkům.



3. Sejměte kryt na konci kuličky a stiskněte tlačítko „Reviving“ (Revitalizace).



4. Zařízení držte v jedné ruce a dotýkejte se z obou stran pásků elektrody.
(zvlhčete si ruku navlhčeným ubrouskem, dříve než oschne)




5. Pomalu pohybujte strojkem tam a zpět od středu dolních víček k vnitřnímu a vnějšímu koutku očí, čímž doplníte výživu hluboko do kůže.



Průvodce uživatele pro funkci SONIC:


1. Sejměte víčko na druhém konci s ultrazvukovou hlavou.

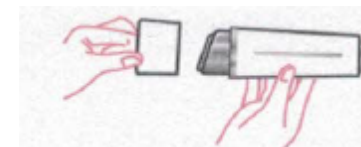

2. Aplikujte ošetřující produkt / gel rovnoměrně na kůži a přiložte ultrazvukovou hlavu.



3. Spusťte funkci „Sonic“, ultrazvukovou hlavu jemně přitiskněte na kůži a masírujte dále uvedeným způsobem:

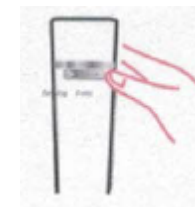

Pomalu posunujte strojek nahoru po křivce od brady až dozadu za uši.



Pomalu posunujte strojek dolů od krku po ramena, čímž se vyčistí a detoxikuje lymfatický systém a podpoří se cirkulace krve.



Pomalu posunujte strojek nahoru ve směru šipek na obrázku.
(každý krok opakujte 5 – 10krát)



Po použití

- Sejměte ochranný kryt kolem kuličky otáčením proti směru hodinových ručiček, kryt a kuličku omyjte pod tekoucí vodou, osušte je a kryt našroubujte nazpět.
(Ostatní části přístroje přechovávejte během čištění mimo dosah vody.)



- Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem setřete z ultrazvukové hlavy zbylý ošetřující produkt / gel.



- Po použití přechovávejte strojek čistý a suchý.