



KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-2 ke zkrášení kůže fotonovou terapií a ultrazvukem 3 MHz

- Děkujeme, že jste si koupili tento Komplex ke zkrášení kůže fotonovým a ultrazvukovým působením.
- Postupujte podle vodítek v tomto manuálu a respektujte bezpečnostní informace uvedené v něm. Manuál uschovejte pro příští použití.
- Zařízení je určeno k provádění rutinní péče o kůži. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.
- Tento manuál platí jak pro nenabíjecí model, tak pro model nabíjecí; postupujte podle obsahu vztahujícího se k modelu, který jste zakoupili.


Komplex ke zkrášlení kůže fotonovým a ultrazvukovým působením

Přístroj je založen na principech fyzioterapie a nabízí fotonové ošetření, včetně červeného, modrého a zeleného fotonu, dále ultrazvukovou masáž o třech různých intenzitách, nízké, střední a vysoké; nebo kombinovanou péči fotonem a ultrazvukem, což dohromady ve značné míře napomáhá zlepšit různé kožní problémy a podpoří vaši kůži ve znovuzískání mládí a zdraví.

Pomocí Komplexu ke zkrášlení kůže fotonovým a ultrazvukovým působením můžete snadno doma dosáhnout:

- *hlubokého vyčištění*
- *zvlhčení a hydratace*
- *zesílení a liftingu kůže*
- *uklidnění kůže*
- *odstranění akné a prevence zánětu*
- *řešení vrásek a jemných rýh*
- *detoxikace lymfy*

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	4
 Provoz a údržba	4
POPIS PŘÍSTROJE	5
PROVOZNÍ INSTRUKCE	6
PRINCIP FUNGOVÁNÍ.....	8
ZAČÍNÁME POUŽÍVAT	10
ULTRAZVUKOVÁ MASÁŽ	12
FOTONOVÁ TERAPIE	14
KOMBINOVANÝ REŽIM ULTRAZVUK & FOTON.....	15
PO POUŽITÍ.....	15

Specifikace:

Specifikace pro nenabíjecí model:

Název: Komplex ke zkrášlení kůže fotonovým a ultrazvukovým působením

Rozměry (mm): 175 x 47 x 44

Váha (g): 153,3

Příkon: AC 100 – 240 V

Výkon: DC 15 V 400 mA

Ultrazvuková frekvence: 3 MHz \pm 5%

Specifikace pro nabíjecí model:

Název: Komplex ke zkrášlení kůže fotonovým a ultrazvukovým působením

Rozměry (mm): 175 x 47 x 44

Váha (g): 157,4

Příkon: AC 100 – 240 V

Výkon: DC 5 V 1000 mA

Ultrazvuková frekvence: 3 MHz \pm 5%

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Toto zařízení nepoužívejte

- S lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf atd.
- Na oči
- Za kterékoliv z těchto okolností:
během těhotenství nebo menstruace
pokud máte alergickou dermatitidu nebo krvácení
na podrážděnou kůži nebo na kůži spálenou sluncem
na kožní vředy nebo záněty
na partie po kosmetické operaci
při rozšířených cévách nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů

Provoz a údržba




Nedemontujte
zařízení ani sondu.



Přechovávejte
mimo dosah dětí.




Přechovávejte
stranou ohně.

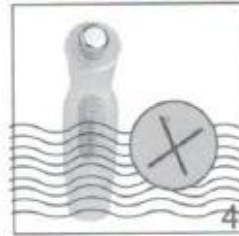

Přechovávejte
stranou vlhkosti a
vody




Nenechte
upadnout ani
narazit.

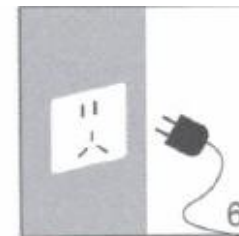

Po použití odpojte
kabel.

POPIS PŘÍSTROJE

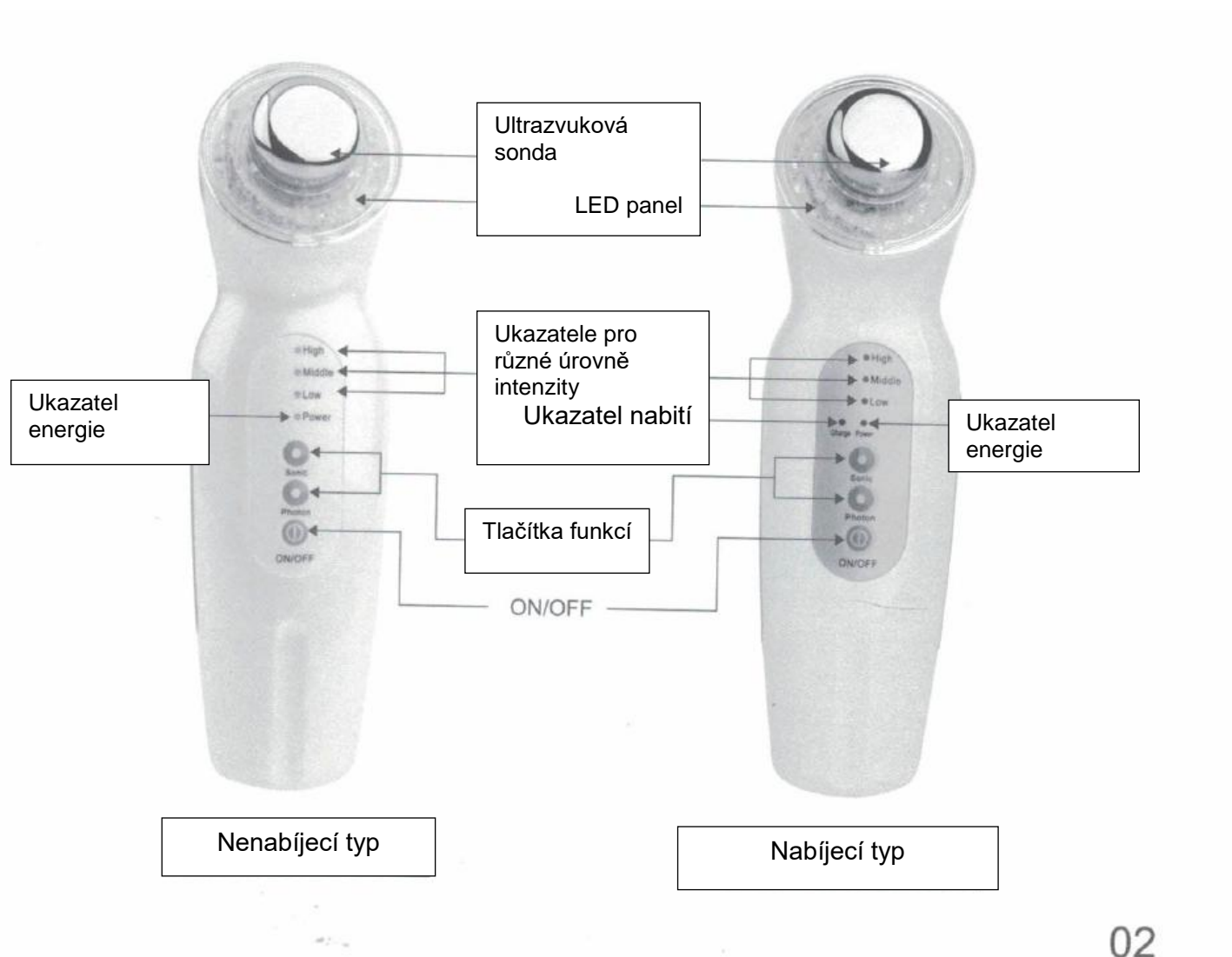

PROVOZNÍ INSTRUKCE

- Zařízení zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.
- Ultrazvukovou funkci zvolíte tlačítkem SONIC a intenzita je standardně nastavená na úroveň L (nízká); svítí zelený ukazatel. Ke zvýšení intenzity na úroveň M (střední) stiskněte dvakrát a rozsvítí se žlutý ukazatel. Ke zvýšení intenzity na úroveň H (vysoká) stiskněte třikrát a rozsvítí se červený ukazatel.
- Fotonová funkce se zvolí tlačítkem PHOTON. Spustí se fotonová funkce a je standardně nastavená na modrý foton. Stisknete-li dvakrát, zelený foton; stisknete třikrát, červený foton.
- Kombinovaná funkce ultrazvuk a foton se volí nejprve tlačítkem SONIC, zvolte požadovanou úroveň, a pak stiskněte PHOTON a zvolte potřebnou barvu.
- Po použití stiskněte ON/OFF a zařízení se vypne.

Nabíjecí instrukce pro dobíjecí model

1. Před prvním použitím zařízení nabijte, a potom dobíjejte vždy, když je napětí baterie nízké.
2. Je-li napětí baterie nízké, ukazatelé tří úrovní a ukazatel energie postupně pětkrát zablikají, a pak se zařízení automaticky vypne. V tom případě přístroj co nejdříve dobijte; dlouhodobý stav nízkého napětí může vyvolat poškození baterie.
3. Během nabíjení svítí ukazatel nabíjení. Jakmile je nabíjení dokončeno, ukazatel se vypne.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Kožní problémy, na něž je zaměřen komplex ke zkrášlení kůže fotonovým a ultrazvukovým působením

- uvolněná a svěšená kůže, vrásky a suché rýhy
- zarudnutí kůže, svědění, bodnutí a jiná podráždění
- akné a zanícení kůže
- stárnoucí kůže s pomalým metabolismem a pomalým vstřebáváním.

Ultrazvuk

Komplex ke zkrášlení kůže fotonovým a ultrazvukovým působením zavádí 3 MHz ultrazvuk, který je nejúčinnější a nejbezpečnější ultrazvukovou frekvencí, uznávanou ve zkrášlovacím průmyslu. Dokáže jemně proniknout do kůže a masírovat buňky a zlepšovat krevní oběh. Vysokofrekvenční mikrovibrace, jež ultrazvuk přináší, příslušně stimuluje kožní buňky, urychluje jejich metabolismus a aktivuje sílu kůže zevnitř.

Fototerapie

Červené světlo

Červené světlo o vlnové délce 622 ± 5 nm dokáže dosáhnout do hlubší vrstvy kůže, aktivovat pojivové buňky a podporovat obnovu kolagenu a krevního oběhu. Může postupně vyhladit vrásky a jemné rýhy a účinně zmenšovat váčky pod očima, a přitom podpořit zářivý odstín a pružnost kůže.

Zelené světlo

Zelené světlo s vlnovou délkou 525 ± 3 nm má na kůži uklidňující vliv. Dokáže ulehčit při kožních potížích; ulevuje při podráždění kůže, jako je zarudnutí, svědění, bodnutí aj.

Modré světlo

Modré světlo s vlnovou délkou 467 ± 5 nm má antiseptický vliv, takže dokáže redukovat bakterie a záněty, vyvažovat hydrataci a tuk v kůži, a snižuje možnost vypuknutí akné a ekzému. Zachovává vaši kůži pěknou a zdravou.

ZAČÍNÁME POUŽÍVAT

Před prvním použitím si proveďte test kožní alergie. Pokud se objeví jakékoliv známky alergie, ihned přestaňte používat a bude-li třeba, obraťte se na lékaře.

Test kožní alergie

- Omyjte tělesnou partii;
- Na omyté místo naneste svou oblíbený prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko), zapněte zařízení, zvolte spuštění ultrazvukové funkce. Partii masírujte 2 – 3 minuty a nechte ji na vzduchu oschnout. Poté 48 hodin pozorujte. Pokud zjistíte zhoršení kůže, okamžitě zastavte použití.
- Jestliže se neobjeví podráždění ani zarudnutí kůže, je připravena k použití.



POUŽÍVÁNÍ ULTRAZVUKU

Potvrzení ultrazvuku

Ultrazvukovou sondu položte na rovnou plochu hlavou nahoru, kápněte trochu vody na sondu a stiskněte tlačítko SONIC. Jestliže bude vodní kapka vibrovat, ultrazvuk pracuje.

Jak ošetřovat

Povrch sondy by měl celou plochou těsně přiléhat ke kůži.





Na kůži i na sondu naneste gel; pokud nebude povrch sondy dostatečně namazaný, přidejte gel. (Doporučené dávkování je 4 – 5 g na jedno použití.)

Doba použití

Zařízení je konstruováno tak, že se automaticky vypne po 10 minutách. Pokud potřebujete pokračovat v masáži, znovu je zapněte.

ULTRAZVUKOVÁ MASÁŽ

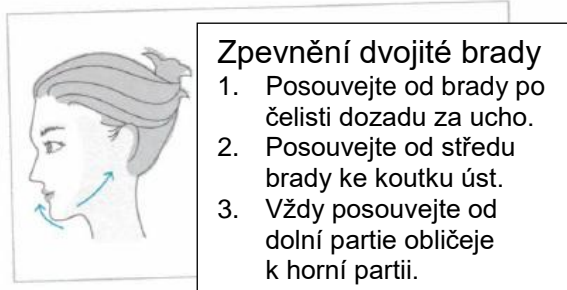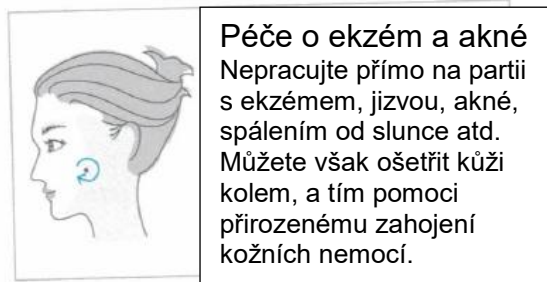



Ošetření T-zóny

Jak je vidět na obrázku, posouvejte strojek kolem koutků nosních dírek a na kořen nosu. Používejte pouze 1 – 2 minuty.



Odstranění váčků a tmavých kruhů pod očima

Posouvejte z vnitřního rohu oka nahoru ke spánkům. Nepoužívejte na oko.



Detoxikace lymfy

1. Na obličej a sondu naneste trochu gelu.
2. Zapněte přístroj, stiskněte tlačítko SONIC.
3. Stiskněte SONIC, zvolte vhodnou intenzitu a provádějte detoxikaci lymfy podle obrázku.

FOTONOVÁ TERAPIE

Při použití fotonovému režimu zapojte přístroj k elektrickému proudu, zvolte barvu kontrolky pro požadované ošetření a pomalu pohybujte zařízením po ošetřovaných partiích. Než spustíte fotonové ošetření, nasadte si ochranné brýle, abyste ochránili oči před potenciálním poškozením.

- Modrý foton: K ošetření akné osviťte modrým fotonem postižené partie, a to pokaždé po dobu 15 – 20 minut.
- Zelený foton: Pro úlevu při podráždění kůže použijte zelený foton. Osviťte postiženou partii pokaždé asi 10 minut.
- Červený foton: Na podporu metabolismu kožních buněk a jako prevenci stárnutí použijte červený foton k osvětlení míst s vráskami a jemnými rýhami. Každých 5 vteřin změňte polohu detektoru a celý proces vám zabere 10 – 20 minut.

KOMBINOVANÝ REŽIM ULTRAZVUK & FOTON

K dosažení lepších účinků můžete použít kombinovaný režim ultrazvuk a foton takto:

1. Zapněte zařízení.
2. Stiskněte tlačítko SONIC a zvolíte režim ultrazvuku; stlačujte dále a zvolte úroveň, kterou si přejete.
3. Stiskněte tlačítko PHOTON a zvolíte fotonový režim. Stiskněte znovu a zvolte barvu světla, které si přejete. Od teď můžete využívat pro ošetření své kůže kombinovaný režim těchto dvou funkcí.

PO POUŽITÍ

- Po použití zařízení vypněte.
- Navlhčeným ubrouskem jemně otřete ocelovou hlavu.
- Nemyjte ve vodě ani / nebo žádným chemickým čisticím prostředkem.
- Přístroj přechovávejte čistý a suchý.