



- Děkujeme, že jste si zakoupili tento kavitační přístroj pro intenzivní regeneraci těla.
- Používejte v souladu s instrukcemi v tomto manuálu a respektujte uvedené bezpečnostní informace. Příručku uschovejte pro budoucí použití.
- Výrobek je určen k provádění rutinní péče o kůži a tělo. Žádný jiný způsob používání ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.

OBSAH

Specifikace.....	2
Bezpečnostní opatření.....	3
Jednotlivé části.....	5
Funkce	6
Provozní instrukce.....	6
Před použitím	7
Rychlý průvodce uživatele.....	8
Průvodce ultrazvukovou terapií	9
Průvodce fotonovou terapií.....	9
Průvodce ultrazvukovou a červenou fotonovou terapií.....	9
Po použití	9

Specifikace

Příkon: AC 100V – 240V

Výkon: DC 5V 1,000 mA

Baterie: 3,7V lithiová baterie

Rozměry (cm): 99 x 99 x 94

Váha (g): 295

Průměr ultrazvukové hlavy (mm): 57

Kmitočet ultrazvuku: 1 MHz ± 5%

Nastavení času: automatické zastavení po 5 minutách

Bezpečnostní opatření


- Kavitační přístroj CM-20 je určen k uskutečňování rutinní péči o kůži a tělo. Používání za jiným účelem není podporováno.
- Před použitím si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Během používání postupujte podle návodu a kontrolujte četnost použití v souladu s instrukcemi v tomto manuálu. Při prvním použití zkratě dobu provozu, je-li vaše kůže velmi citlivá.
- Zastavte používání, pokud zaznamenáte nepříjemný pocit. Ihned se obraťte na svého lékaře.

Zařízení nepoužívejte

- s jinými lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf, atd.
- v případě dále uvedených okolností:
během těhotenství nebo menstruace
máte-li alergickou dermatitidu nebo krvácení
při podráždění kůže nebo spálení při opalování
při kožních vředech nebo zánětech
na tělesných partiích po kosmetické operaci
při rozšíření kapilár nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým požíváním steroidů a hormonů



Údržba

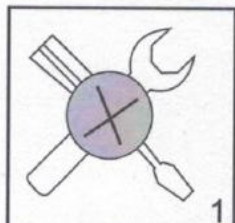

1

1. Sami nerozebírejte




2

2. Přechevávávejte mimo dosah dětí




3

3. Přechevávávejte mimo dosah ohně

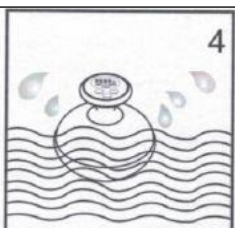


4

4. Přechevávávejte mimo dosah vlhkosti a vody

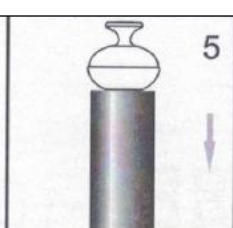

5

5. Nenechte spadnout ani narazit

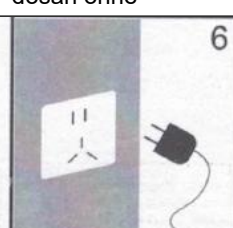


6

6. Po nabití odpojte kabel

Jednotlivé části

Zařízení kavitační přístroj CM-20 obsahuje:

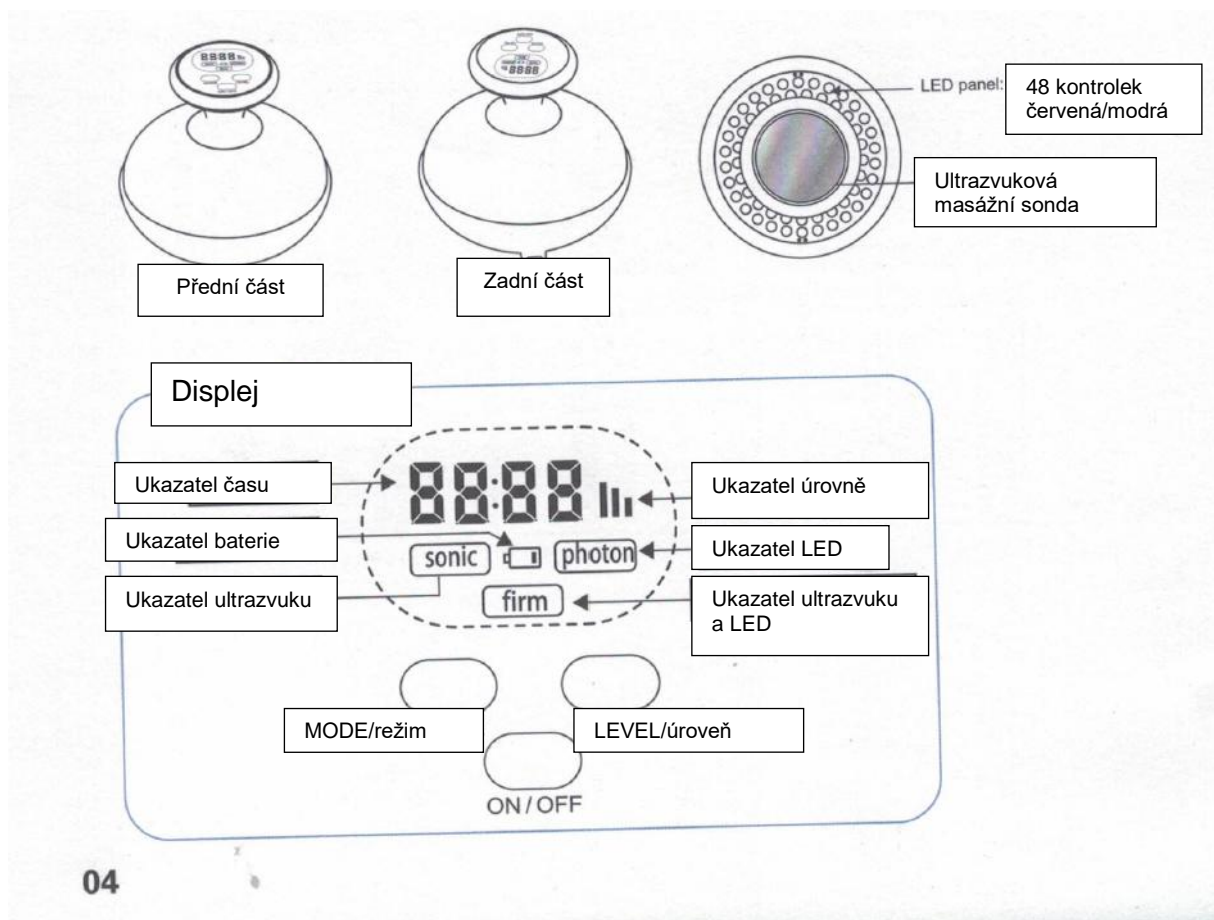

Funkce

- S přísně kontrolovaným kmitočtem vytváří ultrazvuková terapie zvukové vlny, které vibrují milionkrát za vteřinu a dokáží masírovat tukové buňky svými mechanickými, chemickými a tepelnými funkcemi a účinně spalovat úporný tuk. Přitom se stimuluje krevní oběh a detoxikuje lymfatický systém tak, aby se vitalita kůže posilovala zevnitř.
- Červený foton: vlnová délka 625 ± 3 nm, stimulující vytváření kolagenu mládí a buněčnou aktivitu, tak aby se zmenšila celulitida a vrásky a kůže znovu získala svou pružnost.
- Modrý foton: vlnová délka 465 ± 3 nm, ničí bakterie a působí protizánětlivě, přičemž uklidňuje podráždění kůže.

Provozní instrukce

Tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout):

První stisknutí: zařízení se zapíná

Druhé stisknutí: zařízení se vypíná

Tlačítko volby funkce:

S každým stisknutím se funkce přepíná dokola podle tohoto pořadí:

ultrazvuk → červený foton → modrý foton → ultrazvuk + červený foton → funkce vypnuta

Tlačítko volby úrovně:

Volba úrovně je k dispozici pouze pro funkci ultrazvuku. Standardně nastavená úroveň je 1.

S každým stisknutím se funkce přepíná dokola podle tohoto pořadí:

úroveň 2 → úroveň 3 → zpět na úroveň 1

Nabíjení:

- Před prvním použitím nabíjejte nejméně 3 hodiny, aby se aktivovala lithiová baterie uvnitř.
- Při nabíjení: Když začne nabíjení, bliká ukazatel baterie a světlo na pozadí za 30 vteřin ztmavne.
- Nabíjení dokončené: Když se dokončí nabíjení, zmizí ukazatel baterie.
- Vybití: Když se baterie vybíjí, na obrazovce se 10krát pravidelně objeví zablesknutí a zazní 10 pípnutí, potom se zařízení zastaví.



Doba nabíjení	Celková doba provozu
asi 3 hodiny	asi 2 hodiny

Před použitím

Frekvence používání:

Režim	Frekvence používání
Ultrazvuková terapie	2 – 3x týdně, ne více než 10 minut na každou tělesnou partii
Fotonová terapie	1x za den, pokaždé 10 – 20 minut
Ultrazvuková + fotonová terapie	2 – 3x týdně, ne více než 10 minut na každou tělesnou partii

Potvrzení ultrazvuku:

Položte ultrazvukovou hlavu na rovnou plochu hlavou nahoru, do hlavy kápněte trochu vody a stiskněte tlačítko „SONIC“. Vodní kapka bude vibrovat, když bude zapnutý ultrazvuk.

Test alergie:

1. Omyjte plošku na paži.
2. Na omyté místo naneste svou oblíbený prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko), zapněte zařízení, zvolte spuštění ultrazvukové funkce. Partii masírujte 2 – 3 minuty a nechte ji na vzduchu oschnout.
3. Vyčkejte 24 hodin, zda se neobjeví podráždění nebo zarudnutí.



Rychlý průvodce uživatele

Krok 1

Omyjte kůži

Krok 2

Na obličej a na ocelovou hlavu stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko). Obličej masírujte za pomoci ultrazvukové funkce, aby se zpevnila a pozvedla kůže.

Krok 3

Vystavte obličej LED fotonu na podporu tvorby kolagenu (červený foton) a snížení tvorby akné (modrý foton).

Krok 4

Aplikujte prostředek k péči o tělo (gel / tělové mléko / krém) stejnoměrně na potřebné tělesné partie a přiložte ocelovou hlavu. Partie masírujte kombinovanou ultrazvukovou a fotonovou (červenou) terapií k posílení kůže, spálení odolného tuku, zjemnění známek napětí a celulitidy.

Průvodce ultrazvukovou terapií


1. Odstraňte make up a očistěte kůži



2. Na kůži a ultrazvukovou hlavu stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži



3. Stiskněte ON/OFF, zařízení se zapne a rozsvítí se LCD

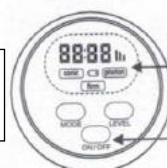

LCD svítí

Stisknout ON/OFF

4. Stiskněte tlačítko MODE / režim a spustí se ultrazvuková terapie

Stisk
MODE




5. Zvolte požadovanou úroveň (úroveň je standardně nastavená na 1)


Stisknout
LEVEL



6. Masírovat podle dále uvedených instrukcí:

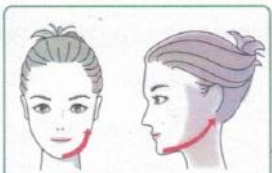


1. Posouvejte ocelovou hlavu pomalu nahoru od brady za uši

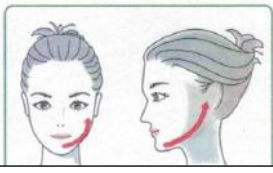


2. Posouvejte ocelovou hlavu pomalu nahoru od brady k přední části uší




3. Posouvejte ocelovou hlavu pomalu nahoru od koutků úst ke spánkům

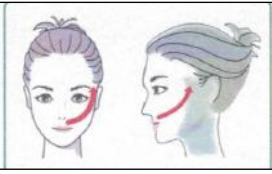

4. Posouvejte ocelovou hlavu pomalu nahoru od dolní části nosní dírky ke kraji obočí

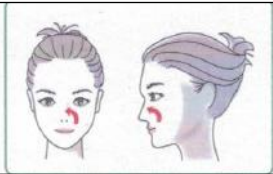

5. Masírujte strany nosu směrem jako na obrázku

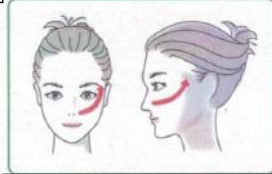

6. Posouvejte ocelovou hlavu pomalu nahoru od stran nosu ke spánkům

7. Detoxikujte lymfatický systém podle dále uvedeného obrázku:




Průvodce fotonovou terapií

1. Odstraňte make up a očistěte kůži




2. Stiskněte ON/OFF, zařízení se zapne a rozsvítí se LCD

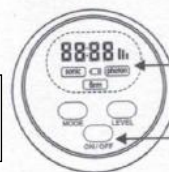

LCD svítí

Stiskněte
ON/OFF

3. Stiskněte dvakrát tlačítko MODE, spustí se červená fotonová terapie, nebo třikrát, spustí se modrá fototerapie

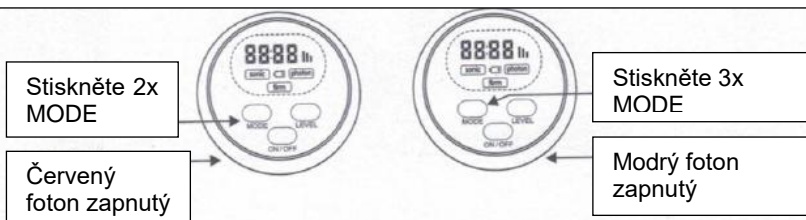

4. Pomalu pohybujte sondou po tváři a ošetřujte kůži červeným / modrým fotonem



Poznámka:


LED světlo nesmí směřovat přímo do očí. Při ošetření partií kolem očí nezapomeňte použít ochranné brýle.

Průvodce ultrazvukovou a červenou fotonovou terapií

1. Odstraňte make up a omyjte kůži


2. Na kůži a na ultrazvukovou hlavu stejnoměrně naneste prostředek k péči o kůži

3. Stiskněte ON/OFF, zařízení se spustí a rozsvítí se LCD

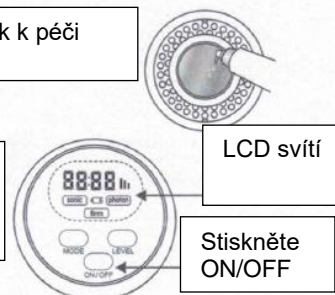

4. Stiskněte 4krát tlačítko MODE a spustí se ultrazvuková a červená fototerapie

Stiskněte 4x
MODE

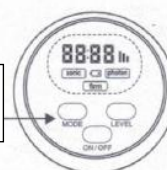

5. Zvolte potřebnou úroveň (úroveň je standardně nastavená na 1)


Stiskněte
LEVEL



6. Masírujte podle dole uvedeného obrázku:



1) Paže
Obě paže ošetřujte od loktů dolů směrem k podpažním jamkám. Masírujte malými kroužky.

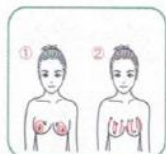


2) Ňadra: Na Ňadra stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (viz obr. 1). Masírujte podle obr. 2 a vyhněte se bradavkám.



3) Pás a žaludek: Pás masírujte nahoru a dolů. Pás masírujte zvenku ke středu. Masírujte v kruzích kolem pupku. Masírujte ve velkých kruzích nahoru zpod pupku.



4) Nohy
Masírujte od kotníků nahoru. Masírujte bříško nohy malými kroužky směrem nahoru.

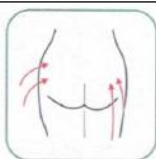

5) Bok
Masírujte nahoru podél boku, tím zvednete a zpevníte kůži



6) Chodidla
Masírujte chodidla v kroužcích a zmírníte otoky

Po použití

- Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem otřete zbývající tělové mléko / gel z ocelové hlavy. (Nemyjte vodou ani/nebo chemickými čisticími prostředky.)



- Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem otřete zařízení.



- Po použití přechovávejte zařízení čisté a suché.