

- Děkujeme, že jste si koupili komplexní kavitační přístroj CM-20B včetně EMS (elektroterapie) k intenzivní regeneraci těla.
- Postupujte podle návodu v této příručce a respektujte uvedené bezpečnostní informace. Příručku uschovejte pro příští použití.
- Zařízení je určeno k zajištění rutinní péče o kůži a tělo. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s lékařskými účely není podporován.

OBSAH

SPECIFIKACE.....	2
BEZPEČNOSTNÍ PREVENTIVNÍ INFORMACE	3
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI.....	5
FUNKCE	6
PROVOZNÍ INSTRUKCE	7
PŘED POUŽITÍM	8
PRŮVODCE RADIOFREKVENCÍ.....	9
PRŮVODCE KOMBINACÍ FUNKCÍ	9
PRŮVODCE KAVITACÍ.....	9
PRŮVODCE EMS	9
PRŮVODCE FOTOTERAPIÍ	9
MASÁŽNÍ INSTRUKCE.....	9
PO POUŽITÍ.....	9
VÝSTRAHA.....	9

SPECIFIKACE

Příkon: 110 – 240V

Výkon: 5V 1A

Nabíjení: 900 mAh lithiová baterie

Rozměry (mm): 99 x 99 x 94

Kavitační frekvence: 800 kHz

Fototerapie: červená / modrá

Časové zařízení: zastaví po 10 minutách práce





BEZPEČNOSTNÍ PREVENTIVNÍ INFORMACE

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující informace. Při používání zařízení byste měli respektovat základní bezpečnostní opatření uvedená dále:

1. Při prvním použití zkraťte dobu provozu, je-li vaše kůže velmi citlivá.
2. Vyhýbejte se místům, kde by zařízení mohlo spadnout do odpadu nebo do vany. Pokud zařízení spadne do vody, nesahejte na ně, dokud neodpojíte přívodní kabel.
3. Používejte pouze originální nabíjecí adaptér.
4. Nepoužívejte zařízení, je-li poškozené, pokud spadlo, nebo když nepracuje správně.
5. Nepoužívejte v těhotenství ani při menstruaci, pokud máte kardiostimulátor, trpíte epilepsií nebo srdeční chorobou či jiným zdravotním problémem nebo vážnými kožními problémy. Nepoužívejte na partiích po kosmetické operaci.
6. Nepoužívejte na rty, oči ani na krk.
7. Zařízení je určeno na zdravou kůži. Nepoužívejte na rány nebo otevřené boláky.
8. Začnete-li cítit nepohodu, zastavte používání. Ihned se obraťte na lékaře.



Preventivní opatření údržba

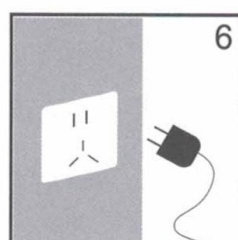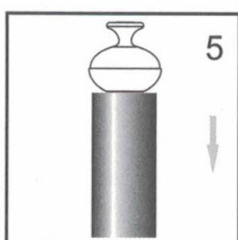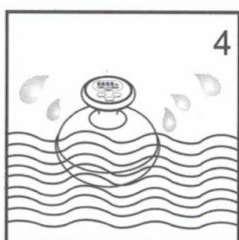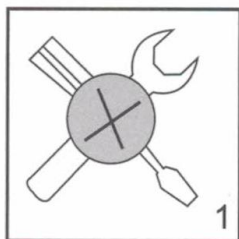

1. Nikdy nezkoušejte zařízení demontovat.
2. Přechevávávejte mimo dosah dětí.
3. Přechevávávejte stranou ohně.
4. Přechevávávejte stranou vlhkosti. Neponořujte do vody.
5. Nenechte spadnout ani narazit.
6. Po nabití odpojte adaptér.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI


Těleso zařízení:



(přední část)



(zadní část)

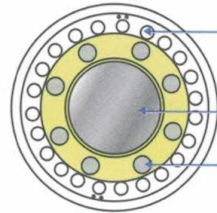


LED panel: 24 lamp RED /červené / BLUE /modré

Kavitační hlava

RF/EMS hlavy

Displej a operační panel:

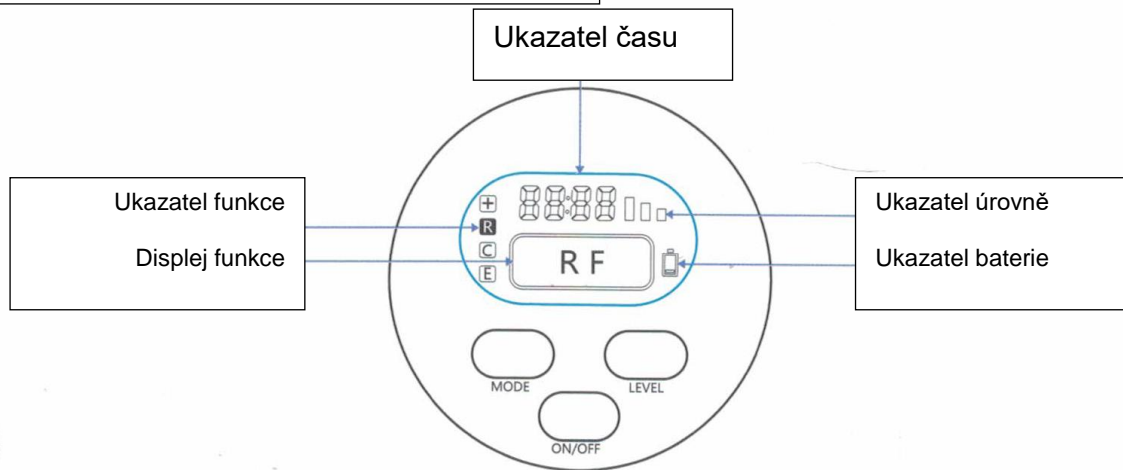

FUNKCE

Kavitační přístroj CM-20B je určen k:

- spalování tuku
- zpevnění a zvednutí kůže
- úpravě vrásek, rýh a celulitidy
- působí proti tvorbě akné a zánětů

Rádiofrekvence (RF):

Radiofrekvence je prověřená technologie, která se dlouhá léta používá v léčebném a zkrášlovacím průmyslu. Za přísně kontrolované teploty magnetické pulzy působí přímo na hydron v buňkách a vytvářejí tepelnou energii. Pomocí RF technologie je možné spálit odolný tuk a napnout kůži tak, aby se vyhladily vrásky a rýhy.

Kavitace (CAVI):

Za přísně kontrolované teploty může jít kavitace pod kůži a vibruje 800 tisíc krát za vteřinu. Dokáže masírovat buňky pomocí svých mechanických, chemických a tepelných funkcí, účinně zmenšovat tukové buňky a zvyšovat propustnost buněčné membrány, čímž se zvýší absorpce výrobků péče o kůži. Může také zlepšovat krevní oběh a detoxikovat lymfatický systém, a tím se zlepší odstín pleti.

Elektroterapie (EMS):

Stimulací svalstva může EMS přinutit svaly, aby vyčerpaly 50x víc energie, než při normálním cvičení. A urychlením růstu proteinového a elastického vlákna působí na obnovení pružnosti kůže, a také na úpravu vrásek a poškozené kůže.

Červený foton:

Vlnová délka 622 ± 5 nm, stimuluje tvorbu kolagenu a buněčnou aktivitu ke snížení množství vrásek a rýh a zrychlení krevního oběhu, aby se tak posilnila vitalita kůže zevnitř.

Modrý foton:

Vlnová délka 467 ± 5 nm, ničí bakterie, působí protizánětlivě a tiší podráždění kůže. Vícenásobné použití může napomáhat k redukci celulitidy a přispět k vyváženosti zvlhčení kůže.

PROVOZNÍ INSTRUKCE

ON/OFF:

Stiskněte dlouze tlačítko ON/OFF a zařízení se zapne; po použití dlouze stiskněte a zařízení se vypne.

Volba funkce

1. S každým stisknutím tlačítka MODE se funkce přepíná dokola v tomto pořadí:
COMBINATION (RF+CAVI+EMS) → CAVITATION → EMS → OFF / vypnutí
2. Krátké stisknutí ON/OFF spustí fotonové funkce. Fotony se přepínají v tomto pořadí:
Červený foton → modrý foton → OFF / vypnutí


Volba úrovně:

Úroveň lze zvolit u RF, CAVI nebo EMS. Standardně nastavená je úroveň 1. S každým stisknutím tlačítka LEVEL se úrovně přepínají dokola v tomto pořadí:

úroveň 2 → úroveň 3 → zpět na úroveň 1

Nabíjení:

- Před prvním použitím nabíjejte nejméně 3 hodiny, aby se aktivovala vnitřní lithiová baterie.
- Vybití: Když se baterie vybila, zařízení 10x zapípá, a pak se zastaví.
- Nabíjení: Když se zařízení vloží do nabíjecího stojánku, na displeji se objeví ukazatel nabíjení a ikona baterie se postupně dokola přepíná z prázdné na plnou. Po 30 vteřinách nabíjení ztmavne světlo na pozadí.
- Nabíjení dokončené: Když je nabíjení skončené, zmizí ukazatel nabíjení a ikona baterie je plná.

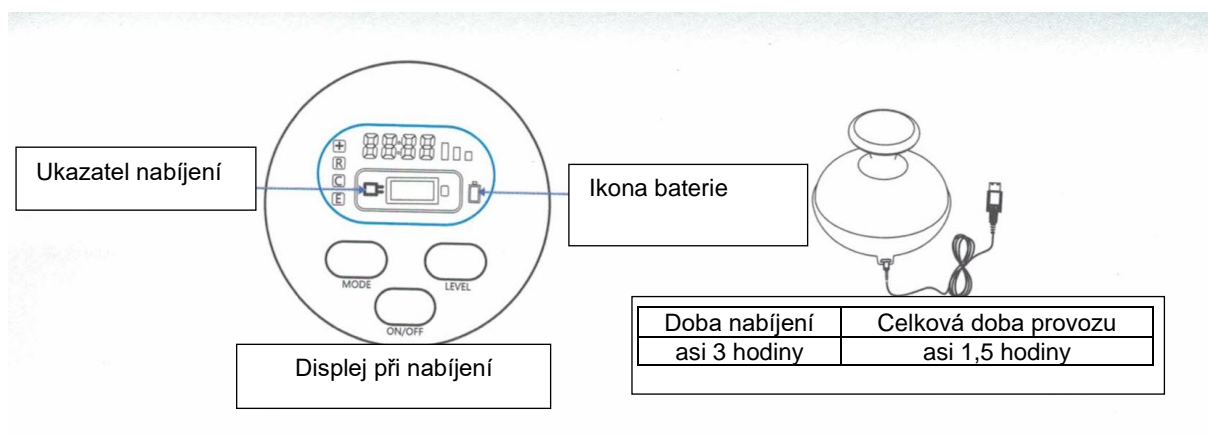

PŘED POUŽITÍM

Potvrzení kavitace:

Položte kavitální hlavu rovně hlavou nahoru, zvolte spuštění funkce CAVI a kápněte na hlavu trochu vody. Vodní kapka bude vibrovat a bude kavitací rozprášena.

Test na alergii:

1. Omyjte plošku na paži.
2. Na omyté místo naneste prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko), zapněte zařízení a zvolte spuštění požadované funkce. Toto místo masírujte 2 – 3 minuty podle pokynů v tomto manuálu, a pak je nechte oschnout.
3. Vyčkejte 24 hodin, zda se neobjeví podráždění nebo zarudnutí.




PRŮVODCE KOMBINACÍ FUNKCÍ

1. Omyjte kůži.


2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek péče o kůži (gel / tělové mléko)

3. Zapněte přístroj.

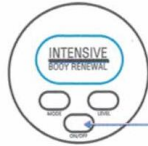

stisknout ON/OFF

4. Stiskněte jednou MODE a spustí se funkce COMBI. Zvolte požadovanou intenzitu. RF, kavitace a EMS budou každá fungovat 10 vteřin a přepínat se dokola.
stisknout MODE

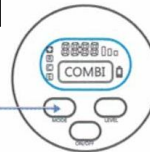

stisknout LEVEL


5. K dosažení nejlepších účinků vždy masírujte v malých kruzích. Bude-li třeba, přidejte během ošetření gel / tělové mléko.

PRŮVODCE RADIOFREKVENCÍ

1. Omyjte kůži.

2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko)


3. Zapněte přístroj.

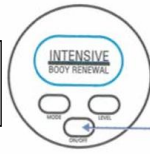


stisknout
ON/OFF

4. Stiskněte dvakrát MODE a spustí se funkce RF. Zvolte požadovanou intenzitu.

stisknout
MODE

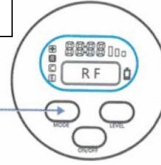

stisknout
LEVEL

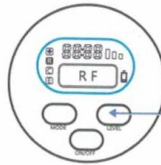


5. K dosažení optimálních účinků vždy masírujte v malých kruzích. Bude-li třeba, přidejte během ošetření gel / tělové mléko.

PRŮVODCE KAVITACÍ

1. Omyjte kůži.

2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko)


3. Zapněte přístroj.

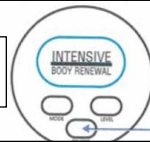


stisknout
ON/OFF

4. Stiskněte třikrát MODE a spustí se funkce CAVI. Zvolte požadovanou intenzitu.

stisknout
MODE

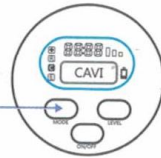

stisknout
LEVEL

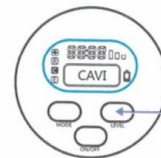


5. K dosažení optimálních účinků vždy masírujte v malých kruzích. Bude-li třeba, přidejte během ošetření gel / tělové mléko.

PRŮVODCE EMS

1. Omyjte kůži.

2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko)


3. Zapněte přístroj.

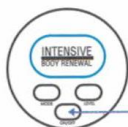


stisknout
ON/OFF

4. Stiskněte čtyřikrát MODE a spustí se funkce EMS. Zvolte požadovanou intenzitu.

stisknout
MODE

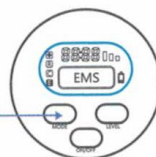

stisknout
LEVEL

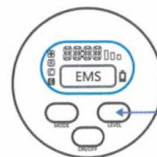


5. K dosažení optimálních účinků vždy masírujte v malých kruzích. Bude-li třeba, přidejte během ošetření gel / tělové mléko.

PRŮVODCE FOTOTERAPIÍ

1. Omyjte kůži.


2. Na kůži stejnoměrně aplikujte prostředek k péči o kůži (gel / tělové mléko)

3. Zapněte přístroj.

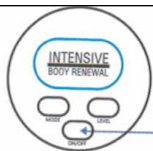

stisknout
ON/OFF

4. Stiskněte jednou ON/OFF a spustí se ČERVENÁ fotonová funkce, a když stisknete dvakrát, spustí se MODRÝ foton. Funkce COMBI, RF, CAVI a EMS se mohou používat společně s fototerapií.

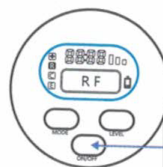

stisknout
ON/OFF

5. Nasadte si ochranné brýle.



6. Ozáříte požadovanou partii těla fotonem. Zastavte před akné nebo zarudnutím s krátkým modrým fotonem, potom se posuňte k další ošetřované partii. Zastavte nakrátko na vráskách a rýhách s červeným fotonem, a potom se posuňte k další ošetřované partii.


MASÁŽNÍ INSTRUKCE

K dosažení optimálních výsledků masírujte podle dále uvedených pokynů:



Paže

Ošetřete paže od loktů směrem k podpažním jamkám. Masírujte v malých kruzích.

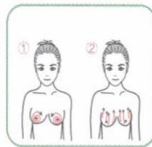

Ňadra

Na ňadra naneste stejnoměrně prostředek péče o kůži (obr. 1). Masírujte postupem podle obr. 2 a vyhněte se bradavkám.




Pas

Masírujte pas nahoru a dolů. Masírujte pas zvenku k vnitřní straně. Masírujte v kruzích kolem pupku. Masírujte ve velkých kruzích nahoru od partie pod pupkem.



Nohy

Masírujte od kotníků nahoru. Masírujte lýtko v malých kruzích směrem nahoru.

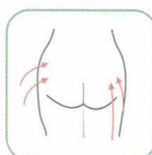

Boky

Masírujte nahoru po boku tak, aby se zvedla a zpevnila kůže.



Chodidla

Masírujte chodidla v kruzích tak, aby došlo k úlevě od otoků.

VÝSTRAHA


- Ošetření by nemělo překročit 10 minut na jedné tělesné partii, nebo 3x týdně. Kromě toho by se mezi každé ošetření měl vložit jeden volný den.
- Při používání COMBI, RF, CAVI nebo EMS vždy udržujte dostatečné množství ošetřujícího prostředku mezi masážními hlavami a vaší kůží, zvláště pokud používáte funkce s RF.
- Masážní hlavy během ošetřování vždy pomalu posouvejte. Delší prodlení na jedné partii může vyvolat podráždění kůže.

PO POUŽITÍ


Vypněte zařízení.

Sejměte ochranné brýle, pokud jste si je nasadili.

Vlhkým ubrouskem nebo hadříkem setřete zbyvající ošetřující prostředek z masážních hlav.
(Nemyjte vodou ani / nebo chemickými čisticími prostředky.)

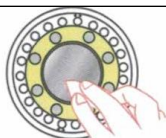

Otřete a vyčistěte zařízení suchým ubrouskem nebo hadříkem.

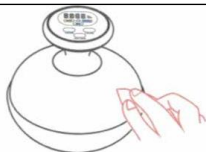

Přechovávejte na čistém a suchém místě.