



Technologie krásy

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-2A k projasnění pleti

- Děkujeme, že jste si koupili tento kavitační přístroj pro krásu.
- Postupujte podle vodítek v tomto manuálu a respektujte bezpečnostní informace uvedené v něm. Příručku uschovejte pro příští použití.
- Zařízení je určeno k zajišťování rutinní péče o pleť. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.

Přístroj je založen na principech fyzioterapie a je to vynikající přenosné zařízení, který zahrnuje tři nejúčinnější techniky, jež jsou uznávány v průmyslu krásy: fototerapii, ultrazvuk a galvanický ionizátor. S tímto zařízením budete moci využít neškodnou fyzikální energii k podpoře vitality kožních buněk, urychlení oběhu a posílení schopnosti zásobování kyslíku a metabolismu, takže pleti dokáže znovu získat svou kondici.

Pomocí IPS korektoru k projasnění pleti lze dosáhnout snadno a doma:

- hlubokého vyčištění
- hydratace a vyhlazení vrásek
- zesílení a liftingu
- zmenšení otoků a dvojité brady
- zesvětlení skvrn a projasnění odstínu pleti
- odstranění váčků pod očima a tmavých kruhů.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
POPIS PŘÍSTROJE	4
Fotonové a ultrazvukové zařízení proti stárnutí	5
Problémy, na něž je určený IPS korektor.....	6
Zásady práce s IPS korektorem	6
Úvod do ultrazvukové funkce.....	6
Úvod do fototerapie	7
Úvod do iontové terapie.....	7
Začněte s ošetřením.....	8
Test pleti na alergii	8
Denní péče	8
Zvláštní ošetření problematické pleti	10
Citlivá pleti.....	10
Po použití	10

Specifikace výrobku:

Název: IPS korektor k projasnění pleti

Příkon: AC 100 – 240 V

Výkon: DC 5 V 1000 mA

Rozměry (mm): 170 x 46 x 50 mm

Váha (g): 139

Průměr ultrazvukové hlavy (mm): 28

Ultrazvuková frekvence: 3 MHz ± 5%


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Zařízení je určeno k poskytování rutinní péče o pleť. Použití pro žádný jiný účel není podporováno.
- Před použitím si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Během používání postupujte podle pokynů a četnost použití řiďte podle instrukcí v tomto manuálu. Při prvním použití a je-li vaše pleť velmi citlivá, zkraťte dobu aplikace.
- Pokud se nebudete cítit dobře, ihned zastavte ošetření. obraťte se na svého lékaře.

Zařízení nepoužívejte

- S lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf atd.
- Za kterékoliv z těchto okolností:
během těhotenství nebo menstruace
při alergické dermatidě nebo krvácení
na podrážděnou pleť nebo na pleť spálenou sluncem
na kožní vředy nebo záněty
na partie po kosmetické operaci
při rozšířených cévách nebo nesprávné funkci jater,
způsobené dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů


Provoz a údržba

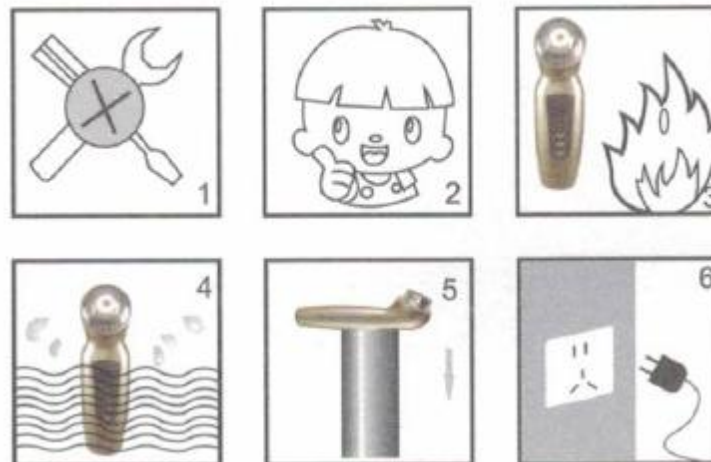

- Sami přístroj nedemontujte
- Přechovávejte mimo dosah dětí
- Přechovávejte stranou ohně
- Přechovávejte stranou vlhkosti a vody
- Nenechte spadnout ani narazit
- Po nabití odpojte elektrický kabel

POPIS PŘÍSTROJE



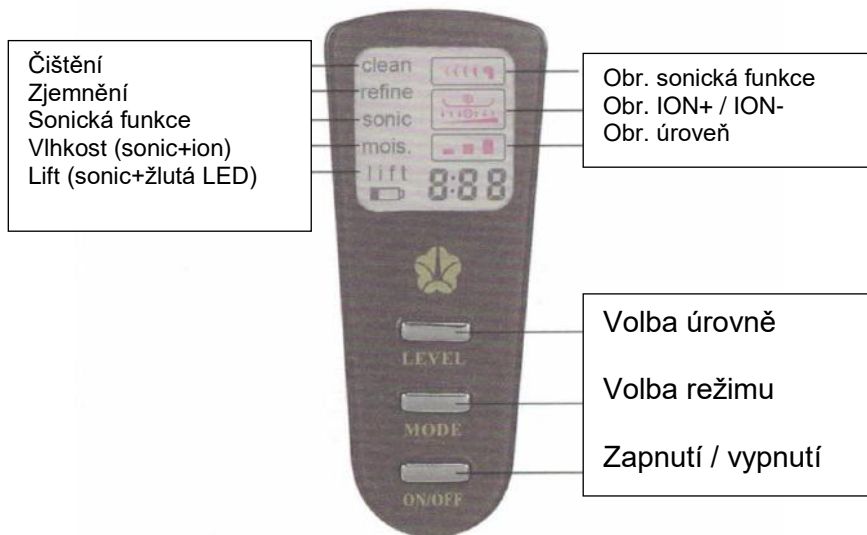

Po zvolení režimu uvidíte na displeji tyto údaje:

- (1) Režim je podtržený.
- (2) Na pravé straně se zobrazí příslušný obrázek.
- (3) Úroveň intenzity je standardně nízká.
- (4) Čas používání se objeví na dolním konci obrazovky.

IPS korektor k projasnění pleti obsahuje tyto části:

1. Přístroj (1)
2. Uživatelský manuál (1)
3. Nabíjecí souprava (1)
4. Ochranné rukavice (1 pár)

Fotonové a ultrazvukové zařízení proti stárnutí

Zvolení režimů

Spusťte přístroj, stiskněte MODE:

Stiskněte poprvé: Čištění (3 min. odpočítávání)

Stiskněte podruhé: Zjemnění (5 min. odpočítávání)

Stiskněte potřetí: SONIC (6 min. odpočítávání)

Stiskněte počtvrté: Vlhkost (6 min. odpočítávání)

Stiskněte popáté: Lift (9 min. odpočítávání)

Když přístroj zapnete a nezačne provoz, automaticky se po 30 s vypne. Po uplynutí odpočítaného času v každém režimu se displej vrátí na počáteční rozhraní. Znovu stiskněte MODE a můžete zvolit jakýkoliv režim.

Nabíjecí instrukce

1. Před prvním použitím přístroj asi 3 hodiny nabíjejte.
2. Nabíjení přístroje je podobné jako u mobilního telefonu. Během nabíjení můžete kontrolovat úroveň baterie z ikony na obrazovce. Až bude zcela nabitá, ikona baterie zmizí.
3. Před vybitím začne obrazovka blikat, stejně jako ikona baterie na obrazovce, a přístroj bude pípat. Automaticky se vypne asi po desátém bliknutí.
4. Po vybití baterii co nejdříve nabijte; dlouhodobý stav nízkého napětí může baterii poškodit.



Problémy, na něž je určený IPS korektor

Zařízení je určeno pro tyto kožní problémy

- Vytahaná, povolená pleť, vrásky a rýhy
- Skvrny a vady
- Matný odstín pleti
- Stárnoucí pleť, pomalý metabolismus, nízká schopnost vstřebávání výživy
- Tmavé kruhy a vřáčky pod očima

Zásady práce s IPS korektorem

Úvod do ultrazvukové funkce

IPS korektor ke zjasnění pleti obsahuje 3 MHz ultrazvuk, který je nejúčinnějším a nejbezpečnějším ultrazvukovým zařízením, uznávaným v průmyslu krásy. Dokáže jemně proniknout do pleti, kde masíruje buňky a zlepšuje krevní oběh. Vysoce rychlá mikro vibrace ultrazvuku stimuluje vhodným způsobem kožní buňky a napomáhá posílit buněčný metabolismus a zevnitř aktivovat vitalitu pleti.

Úvod do fototerapie

Žluté světlo

Žlutý foton o určité vlnové délce je zvláště vhodný pro ošetření citlivé pleti. Žluté světlo umí zlepšit lymfatický systém, posílit funkci svalů a imunitního systému, a také dokáže zvýšit pružnost kapilár, uklidnit podráždění pleti a rozjasnit matný odstín pleti. Zesvětluje skvrny a vady.

Úvod do iontové terapie

Galvanická iontová vodivost je technologie, která je akceptována v salonech krásy a nemocnicích. Rozdíl v hodnotě pH mezi zrohovatělými buňkami a bazálními buňkami produkuje slabé elektrické pole mezi povrchem pleti a zárodečnou vrstvou, jež blokuje celou řadu funkcí, včetně pronikání výživy hluboko do pleti. Galvanická iontová funkce také dokáže sloučit elektrické pole, a když se setkají obě pole, blok se dočasně oslabí a ionizovaná výživa je schopna proniknout hluboko do zárodečné vrstvy. Pracuje stejně jako magnet s kladnou a zápornou elektrodou. Galvanické a iontové ošetření odstraňuje nečistotu a tuk z kožních pórů a dovolí, aby výživa pronikala hluboko do pleti s rychlostí vstřebávání mnohem vyšší, než by tomu bylo rukama nebo ústy.

Navíc, kyselá reakce způsobená kladnou elektrodou dokáže snížit zásobování pleti krví, čímž zmírňuje rudnutí a podráždění pleti. Rovněž umí smrštit póry tím, že posiluje strukturu pleti. To ji činí velice vhodnou pro pleť se sklony k alergiím a akné.

Na druhé straně, alkalická reakce způsobená zápornou elektrodou stimuluje krevní oběh a zjemňuje strukturu pleti, a tím velkou měrou

podporuje vitalitu a pružnost pleti. Značně proto pomáhá v případech stárnoucí a suché pleti.

Začněte s ošetřením

Před prvním použitím si proveďte test pleti na případnou alergii. Pokud se objeví známky alergie, okamžitě přestaňte používat a bude-li třeba, obraťte se na lékaře.

Test pleti na alergii

- Omyjte plošku na kůži.
- Na omytou partii naneste svůj oblíbený prostředek (gel / pleťové mléko) k péči o pleť a zapněte ultrazvukovou funkci. Masírujte 2 – 3 minuty, nechte oschnout a 48 hodin pozorujte. Jestliže se na kůži objeví podráždění, ihned přestaňte s použitím.
- Když se neobjeví podráždění ani zarudnutí, přístroj je připraven k používání.



Před použitím

Ultrazvukovou hlavu položte na rovnou plochu hlavou nahoru, do hlavy spusťte pár kapek vody a stiskněte SONIC. Vodní kapka bude vibrovat při zapnutém ultrazvuku.

Tipy k ošetřování

- Povrch sondy by měl těsně přilnout ke kůži.



- Na pleť a sondu naneste gel; nebude-li povrch dobře namazaný, zvyšte množství gelu. Doporučené dávkování je 4 – 5 g na jedno ošetření.
- Zařízení je konstruováno tak, že se po deseti minutách používání automaticky vypne. Budete-li chtít pokračovat v masírování, přístroj znovu zapněte.

Denní péče

K dennímu ošetření obličeje by nemělo docházet častěji než třikrát za týden, a doba použití by neměla překročit 30 minut.


Krok 1 Hluboké vyčištění

1. Odstraňte líčení a vyčistěte obličej.
2. Na nerezovou sondu připněte bavlněnou podložku.
3. Zapněte přístroj, stiskněte MODE a zvolte CLEAN (čištění)
4. Stiskněte LEVEL (úroveň) a zvolte vhodnou úroveň intenzity.
5. Masírujte podle obrázku (masáž od brady ke kořenu uší trvá asi pět vteřin, a totéž platí pro další partie).
6. Omyjte obličej a přístroj dočista otřete.




Krok 2 Detox lymfy

- Na obličej i na sondu naneste gel.
- Zapněte přístroj, stiskněte MODE a zvolte SONIC.
- Stiskněte LEVEL (úroveň), zvolte vhodnou úroveň intenzity a detoxikujte lymfu podle dole uvedeného obrázku.

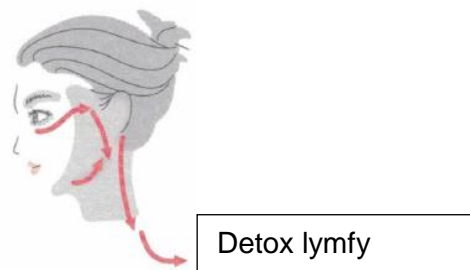


Krok 3 Zavádění výživy a lifting


- Na obličej i na sondu naneste prostředek k ošetření pleti.
- Zapněte přístroj, stiskněte MODE a zvolte funkci MOISTURE (vlhkost) nebo LIFT.
- Stiskněte LEVEL (úroveň), zvolte vhodnou úroveň intenzity.
- Masírujte podle obrázků (masáž od brady ke kořenu uší trvá asi pět vteřin, a totéž platí pro další partie).

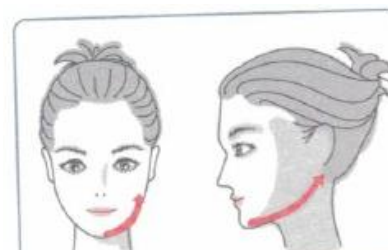


1. Masírujte od brady ke kořenům uší

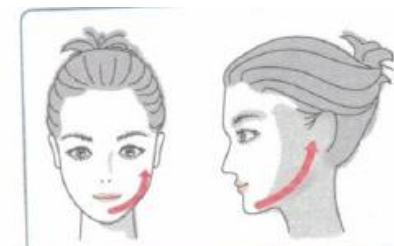


2. Masírujte od brady k přední části ucha

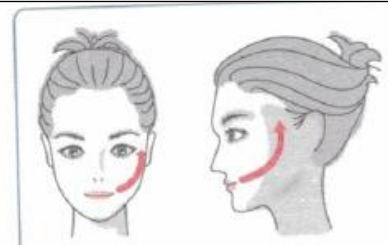


3. Masírujte od koutků úst k horním stranám uší

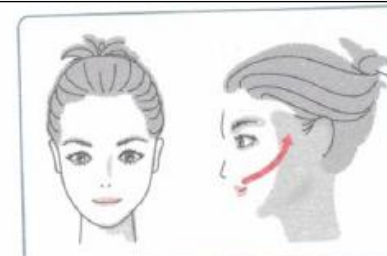

4. Masírujte od nosu k vnějším koncům obočí

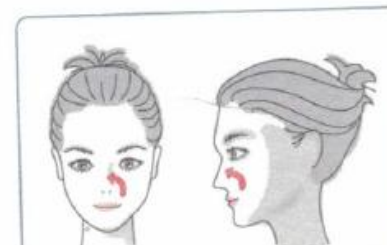

5. Masírujte nosní dírky

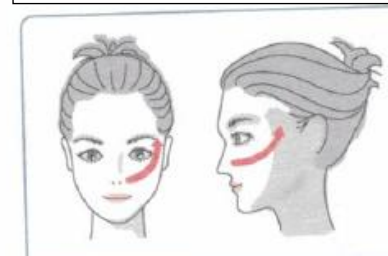

6. Masírujte od nosu ke spánkům

Zvláštní ošetření problematické pleti

Krok 1 Zesvětlení skvrn, úprava odstínu pleti

Krok 2 Zavedení výživy

- Prostředek k péči o pleť, obsahující VC a / nebo další příměsi s účinkem zesvětlování skvrn, naneste rovnoměrně na skvrny a sondu, nebo přímo na sondu připevněte bavlněnou podložku.
- Zapněte zařízení, stiskněte MODE a zvolte REFINE (zjemnit).
- Přiložte sondu ke skvrnám a masírujte; držte se 20 až 30 vteřin.

Krok 3 Fotonové ošetření

Použijte žluté světlo (zvolte režim LIFT a nedotýkejte se sondou pleti) k osvětlení po dobu 9 minut. Budete-li chtít víc, znovu zvolte LIFT.

Citlivá pleť

(použijte jednou za tři dny nebo týdně)

- Zvolte jen funkci SONIC a postupujte stejně jako u denní péče. Nedoporučuje se používat současně iont.
- Po ošetření vždy dobře hydratujte pleť.

Po použití

- Po použití přístroj vypněte.
- Ocelovou hlavu jemně otřete navlhčeným ubrouskem.
- Nemyjte vodou ani /nebo žádným chemickým prostředkem.
- Zařízení přechovávejte čisté a suché.