



SKINCARE MACHINE

## KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-3 iontoterie a ultrazvuk 3 MHz

- ◆ Thank for purchasing this Ionic-Ultrasonic Skin Care Machine.
- + Please read this Operating Instructions carefully before use, and keep this book in a safe place for future reference.
- + This product is designed to take care of normal skin and to beautify it. Any other usage and sales in connection with medical purpose are not supported.

### Obsah

Bezpečnostní instrukce  
Provozní preventivní opatření a údržba  
Test citlivosti kůže  
Popis dílů  
Provozní upozornění  
Příprava před prvním použitím  
Způsob provozu

- Iontová čistící péče (Induct out)
- Iontová výživná péče (Induct in)
- Ultrazvuková masáž obličeje

Doporučený způsob provádění  
Speciální postup ošetření kolem očí

### Specifikace

Typ výrobku: ZHF-CM-3  
Zdroj-pouze Ionic: DC 6V/  
Proud: max. 20 mA  
Zdroj-sepnutí vstup: AC 100-240 V  
Zdroj-sepnutí výstup: DC 15V / 0.8 A  
Spotřeba energie: max. 300 mA  
Rozměry: 95mm x 55mm x 45mm  
Ultrazvukový kmitočet: 3 MHz  
Váha: 49g

- ◆ Zařízení je určeno pouze k ošetření a zkrášlení kůže. Nepoužívat pro žádný jiný účel. Je nutno respektovat příručku Provozní instrukce a kontrolovat kmitočet používání.
- ◆ Zkraťte dobu provozu při prvním použití, je-li vaše kůže velmi citlivá.
- ◆ Přestaňte používat, pokud zjistíte jakoukoliv abnormalitu.



### Zákaz použití výrobku pro určitá speciální místa na těle

- ◆ Čelo, spánky, ucho, krk, oční bulva, některé klouby, jako loket a koleno, atd.
- ◆ Na kůži, která je spálená od slunce nebo zanícená.
- ◆ Pokud máte dermatitidu nebo jinou kožní alergii, způsobenou kosmetickým make upem.
- ◆ Na jiné oblasti, kde je na kůži vyrážka, akné nebo zanícená kůže.
- ◆ Na skvrně, kde kůže svědí nebo je horká.
- ◆ Na skvrně způsobené fyzickou stimulací.
- ◆ Na rozšířené kapilární cévě, způsobené steroidy nebo hormonálním lékem kvůli onemocnění jater.
- ◆ Na části těla, kde došlo k chirurgickému plastickému zákroku.
- ◆ Na zraněné nebo zjizvené tkáni.
- ◆ Na vloženém kovovém předmětu, jako je kardiostimulátor.
- ◆ Při těhotenství
- ◆ Na jiné části těla nebo kůže, jež nebyla zmíněna v tomto provozním návodu.




## Provozní preventivní opatření a údržba

- ◆ Nepokládejte strojek na mokrou plochu nebo v blízkosti vody.
- ◆ Máte-li mokré ruce, neuvádějte zařízení do provozu ani se jej nedotýkejte.
- ◆ Před uložením strojek vypněte.
- ◆ Přechnovávejte mimo dosah dětí.
- ◆ Děti nesmí toto zařízení používat.

## Před prvním použitím proveďte test na alergii (viz dále)

- ◆ Očistěte zápěstí.
- ◆ Na očistěnou plochu aplikujte trochu speciální esence a nechte přirozeně zaschnout (během testu nesmí přijít do styku s vodou a nesmí se smýt). Pokud zjistíte alergickou reakci nebo nenormální reakci kůže, okamžitě zastavte test a ihned kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
- ◆ Pokud se do 48 hodin neobjeví alergie ani jiná forma kožní reakce, můžete tuto speciální unikátní esenci a toto zařízení pravidelně používat.

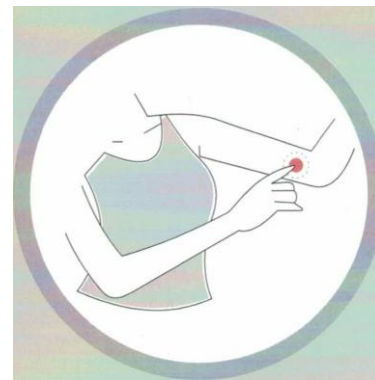



Sonda

Kladný pól baterie

Připojení energie

Záporný pól baterie

Kryt přihrádky baterii



Údaj o energii



4 x 1.5V knoflíková baterie



Provozní panel

Ruční elektroda


Sonda

Tlačítko Induct Out

Tlačítko Induct In

Tlačítko ultrazvuk

Ukazatel čištění  
Ukazatel výživa  
Ukazatel sonického ošetření  
Ukazatel sonického a iontového ošetření

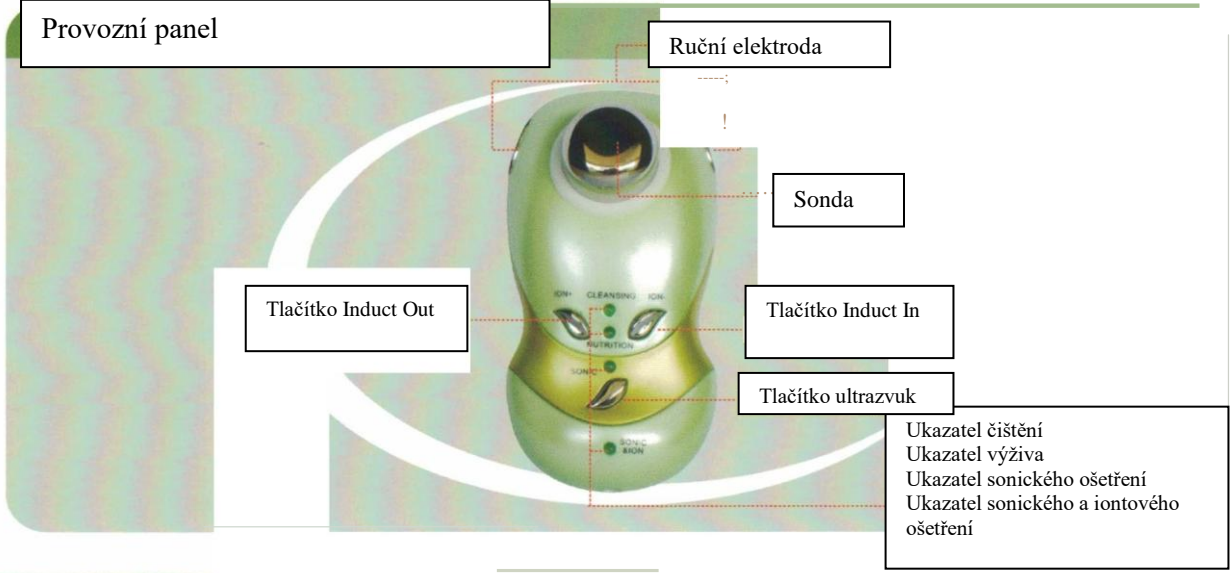

1. Pro vaše pohodlí má strojek dva druhy zdroje energií: baterie a AC.
  - (1) Strojek se pro cestování může napájet baterií, která může fungovat pouze jako „Ionic In“ a „Ionic Out“. Bude-li napětí baterie nízké, budou pravidelně blikat čtyři indikátory (po jedné minutě se napájení automaticky vypne). Baterie je třeba vyměnit za novou.
  - (2) Je-li strojek zapojen ke zdroji energie, bude ji automaticky používat bez ohledu na baterie, a všechny funkce, jako Ionic In, Ionic Out, Sonic, Sonic Ionic, budou moci fungovat.
2. Všechny funkce mají dvě úrovně: nízkou a vysokou. Jeden zvuk „Bi“ zazní u nízké úrovně a jeden „BiBi“ zvuk pro vysokou úroveň.
3. Zazní jeden zvuk každých pět vteřin, „Bi“ u nízké a „BiBi“ u vysoké úrovně.
4. Po deseti minutách se automaticky vypíná.
5. Tři tlačítka pro tři funkce (provoz Ionic in, Ionic out, Sonic), a ta mohou kontrolovat funkci nezávisle na zapnutí a vypnutí své úrovně.

# Způsob provozu


## Před zahájením provozu

### 1. Potvrzení proudu

- (1) Sejměte kryt bateriové přihrádky, vložte čtyři knoflíkové baterie po 1.5V. Při vkládání baterií dbejte na správné póly (plus a minus).
- (2) Provoz pro testování ultrazvukové funkce
  - ◆ Připojit zdroj napájení, zařízení položit na rovný povrch a do generátoru ultrazvukových vln vpustit několik kapek vody.
  - ◆ Zapnout napájení a zvolit úroveň „nízká“ nebo „vysoká“.
  - ◆ Jestliže voda v generátoru ultrazvukových vln vibruje, jsou produkovány ultrazvukové vlny.



2. Sejměte šperky, jako náušnice, prsteny, náhrdelník, hodinky atd.
3. Očistěte obličej a jemně setřete make-up, a pečlivě omyjte čistícím roztokem nebo čisticí vodou na obličej.

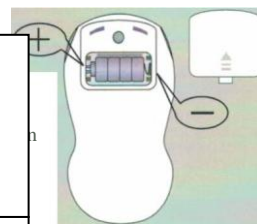

▲ Připojte k napájení, zařízení položte na rovnou plochu a vložte pár kapek vody do generátoru ultrazvukových vln.

▲ Jestliže voda v generátoru ultrazvukových vln vibruje, jsou produkovány ultrazvukové vlny.

**I. Iontové čisticí ošetření (Induct Out)**

1. Aplikujte přiměřenou část esence na obličej a vyhněte se očím. Ujistěte se, že ošetřovaná plocha je dobře pokryta esencí (zajistěte, aby obličej a kosmetický ubrousek byly pečlivě navlhčené).
2. Zapněte elektrinu (přímo zapněte na baterie, nebo strojek připojte k síti).
3. Pořadí ošetření:
  - (1) Jednou stisknout tlačítko Ion+ - stroj pracuje na nízké úrovni Ionic Out, zatímco ukazatel čištění je zapnutý.
  - (2) Ještě jednou stisknout Ion+ a strojek pracuje na vysoké úrovni Ionic Out.
  - (3) Potřetí stisknout Ion+ a strojek se vypne.
  - (4) Na každé úrovni Ionic out se můžete vrátit do funkce Ionic In stisknutím tlačítka Ion-.
  - (5) V každé funkci (Ionic out nebo Ionic in) i na každé úrovni se můžete přepnout také na sonickou funkci, potom se ukazatel Sonic Ion a funkce Ionic změní automaticky na nízkou úroveň.
4. Když používáte funkci Ionic out nebo Ionic in, musíte během provozu držet ruční elektrodu (Hand Electrode). Pracujte pomalu klouzavým pohybem směrem uvedeným na obrázku.
5. Po pěti minutách ošetření se automaticky vypne napájení.





### II. Výživná péče (Induct in)

Mělo by se provést po ošetření Ionic out.

1. Aplikujte přiměřenou část esence na obličej a vyhněte se očím. Zajistěte, aby ošetřovaná plocha byla dobře pokryta esencí (ujistěte se, že obličej a kosmetický ubrousek jsou pečlivě navlhčené).
2. Zapněte elektřinu (přímo zapněte na baterie, nebo strojek připojte k síti).
3. Pořadí ošetření:
  - (1) Jednou stisknout tlačítko Ion- - strojek pracuje na nízké úrovni Ionic in, zatímco ukazatel výživy je zapnutý.
  - (2) Ještě jednou stisknout Ion- a strojek pracuje na vysoké úrovni Ionic in.
  - (3) Potřetí stisknout Ion- a strojek se vypne.
  - (4) Na každé úrovni Ionic out se můžete vrátit do funkce Ionic Out stisknutím tlačítka Ion+.
  - (5) V každé funkci (Ionic out nebo Ionic in) i jiné úrovni se můžete přepnout také na sonickou funkci, potom se ukazatel funkce Sonic Ion a Ionic změní automaticky na nízkou úroveň.
4. Když používáte funkci Ionic out nebo Ionic in, musíte během provozu držet ruční elektrodu. Pracujte pomalu klouzavým pohybem směrem uvedeným na obrázku.



pracovat pohybem nahoru  
Symetricky ošetřit pravou i levou stranu.  
Pomalou klouzat (*mělo by to trvat pět vteřin od brady ke spodní části ucha*) Obrázek 1

**III. Provoz ultrazvukového ošetření****Základní metoda**

1. Aplikujte přiměřenou část esence na obličej a vyhněte se očím. Zajistěte, aby ošetřovaná plocha byla dobře pokryta esencí a aplikujte přiměřenou část esence na sondu.
2. Připojte strojek ke zdroji napájení. Zapněte napájení a ukazatel Sonicare (ošetření ultrazvukem) je zapnutý (zdůrazňujeme: pouze připojení ke zdroji může pohánět ultrazvukovou funkci).
3. Pořadí ošetření
  - (1) Jednou stisknout tlačítko Sonic (zvuk) - strojek pracuje na nízké úrovni ultrazvuku, zatímco ukazatel ultrazvuku je zapnutý.
  - (2) Ještě jednou stisknout Sonic (zvuk) - strojek pracuje na vysoké úrovni ultrazvuku.
  - (3) Potřetí stisknout tlačítko Sonic (zvuk) a strojek se vypne.
  - (4) Na každé úrovni Sonic (zvuk) můžete zapnout funkci Ionic In nebo Ionic Out stisknutím příslušného tlačítka a ukazatel Sonic& Ion. Pracujte pomalu klouzavým pohybem směrem uvedeným na obrázku. Během iontového ošetření držte ruční elektrodu (Hand Electrode).
4. Po použití omyjte zbývající ošetřující gel z obličeje.

## Provozní doporučení

**I. Základní provoz:** dvakrát týdně na začátku a jednou týdně po dvou měsících.

1. Funkce Ionic Out a ultrazvuk pro hluboké vyčištění (3 – 5 minut)
2. Potom funkce Ionic In a ultrazvuk pro výživu (3 – 5 minut)
3. Nakonec ultrazvukové ošetření Zvýšená absorpce výživy (3 – 5 minut)

**II. Ošetření skvrn bělením, udržování vlhkosti, esence k prevenci vrásek**

1. Funkce Ionic Out pro hluboké vyčištění (3 – 5 minut)
2. Potom funkce Ionic In a ultrazvuk pro zavedení výživy (Induct In) 3 – 5 minut

Dvakrát / třikrát týdně na počátku, potom postupně snižovat dobu ošetření a objeví se výrazný účinek.

Každá žena zažívá rána, kdy zrcadlo prostě nezakrývá pravdu. Nedostatek spánku, nemoc, podráždění, stres nebo příliš mnoho kofeinu jsou daň vaší pleti. Za mnohé se projeví v oteklých očích nebo drobných vráskách.

Kůže kolem očí je mnohem tenčí než jinde a vyžaduje více povrchové a pečlivé péče. Plocha sondy provádí 3 miliony vibrací za vteřinu a 3 miliony vibrací za vteřinu nemohou dosáhnout pod kůži. Okolí očí se potýká se třemi typy problémů: černými kruhy pod očima, oteklýma očima a drobnými vráskami.



## **I. Ošetření drobných vrásek**

Spánky se nemohou ošetřovat příliš dlouhou dobu.

Uvolněná kůže způsobená snížením kolagenu pro normální proces stárnutí.

Musí se proto pečlivě ošetřovat.

Ošetřující proces:

1. Funkce Ion out pro hluboké vyčištění (1 – 3 minuty)
2. Funkce Ion in a ultrazvuk pro výživu (2 – 4 min)  
(zkrášlující gel by měl obsahovat Hyasol nebo Phytokine ke zvlhčení kůže či proti stárnutí)
3. Nakonec jemně aplikovat oční masku k zachování účinku.

**II. Oteklé oči** – nesmí se masírovat kůže na oční bulvě.  
Oteklé oči, známé také jako „pytlíky“, mohou být způsobeny špatnou cirkulací krve. Ke zrychlení cirkulace a vyvážení metabolismu by měl zkrášlovací gel obsahovat Dipeptid-2, Hyasol atd.

**Ošetřující postup:**

1. Funkce Ion Out pro hluboké vyčištění (1 – 3 minuty)
2. Ultrazvukové ošetření:
  - označenou cestou od čelisti ke kořeni uší
  - označenou cestou od kořene ucha ke klíční kosti
  - označenou cestou od klíční kosti k podpažní jamce
  - označenou cestou od stínu pod okem ke spánku
  - označenou cestou od spánku za ucho





## STROJEK K OŠETŘENÍ KŮŽE

Určen pro snadnou, rychlou, účinnou domácí zkrášlovací péči.