

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-5 pro oživení pleti fotonovou terapií, iontoterapií a ultrazvukem


- Děkujeme, že jste si koupili IPS komplex k zázračné opravě času.
- Postupujte podle vodítek v tomto manuálu a respektujte bezpečnostní informace uvedené v něm. Manuál uschovejte pro příští použití.
- Zařízení je určeno k poskytování rutinní péče o pleť. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.

Komplex k zázračné opravě času

Přístroj zahrnuje tři účinné technologie k péči o pleť, tj. foton, ion / galvanický proud a ultrazvuk, uznávané mezinárodně a využívané v zkrášlovacím průmyslu. Používejte jej pravidelně a budete moci přeměnit neškodnou fyzikální energii k aktivaci kožních buněk, k urychlení krevního oběhu a k podpoře schopnosti zásobování kyslíkem. Tím umožníte své pleti, aby znovu získala mladistvý vzhled. S IPS komplexem k zázračné opravě času snadno dosáhnete následujících zkrášlovacích účinků:

- Hlubokého vyčištění
- Hlubokého zvlhčení
- Odolnosti proti vráskám
- Posílení a liftingu
- Odstranění akné
- Uklidnění pleti

OBSAH

| | |
|---|----|
| BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE | 4 |
|  Provoz a údržba | 4 |
| POPIS PŘÍSTROJE | 5 |
| FUNKCE | 6 |
| PROVOZNÍ INSTRUKCE | 7 |
| RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE | 9 |
| PO POUŽITÍ | 12 |

Specifikace:

Nenabíjecí model:

Název: IPS komplex k zázračné opravě času

Model č.: CM-5-1

Rozměry: 170 x 46 x 50 mm

Průměr sondy: 25 mm

Váha: 128 g

Ultrazvuková frekvence: 3 MHz \pm 5%

Příkon: AC 100 – 240 V

Výkon: DC 15 V 400 mA

Nabíjecí model:

Název: IPS komplex k zázračné opravě času

Model č.: CM-5-2

Rozměry: 170 x 46 x 50 mm

Průměr sondy: 25 mm

Váha: 145 g

Ultrazvuková frekvence: 3 MHz \pm 5%

Příkon: AC 100 – 240 V

Výkon: DC 5 V 1000 mA

Kapacita lithiové baterie: 1 100 mAh

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Toto zařízení nepoužívejte

- S lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf atd.
- Na oči
- Za kterékoliv z těchto okolností:
 - Během těhotenství nebo menstruace
 - Při alergické dermatitidě nebo krvácení
 - Na spáleniny nebo zrudnutí způsobené opalováním
 - Na kožní vředy
 - Na partie po kosmetické operaci
 - Při rozšířených cévách nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů

Provoz a údržba



POPIS PŘÍSTROJE

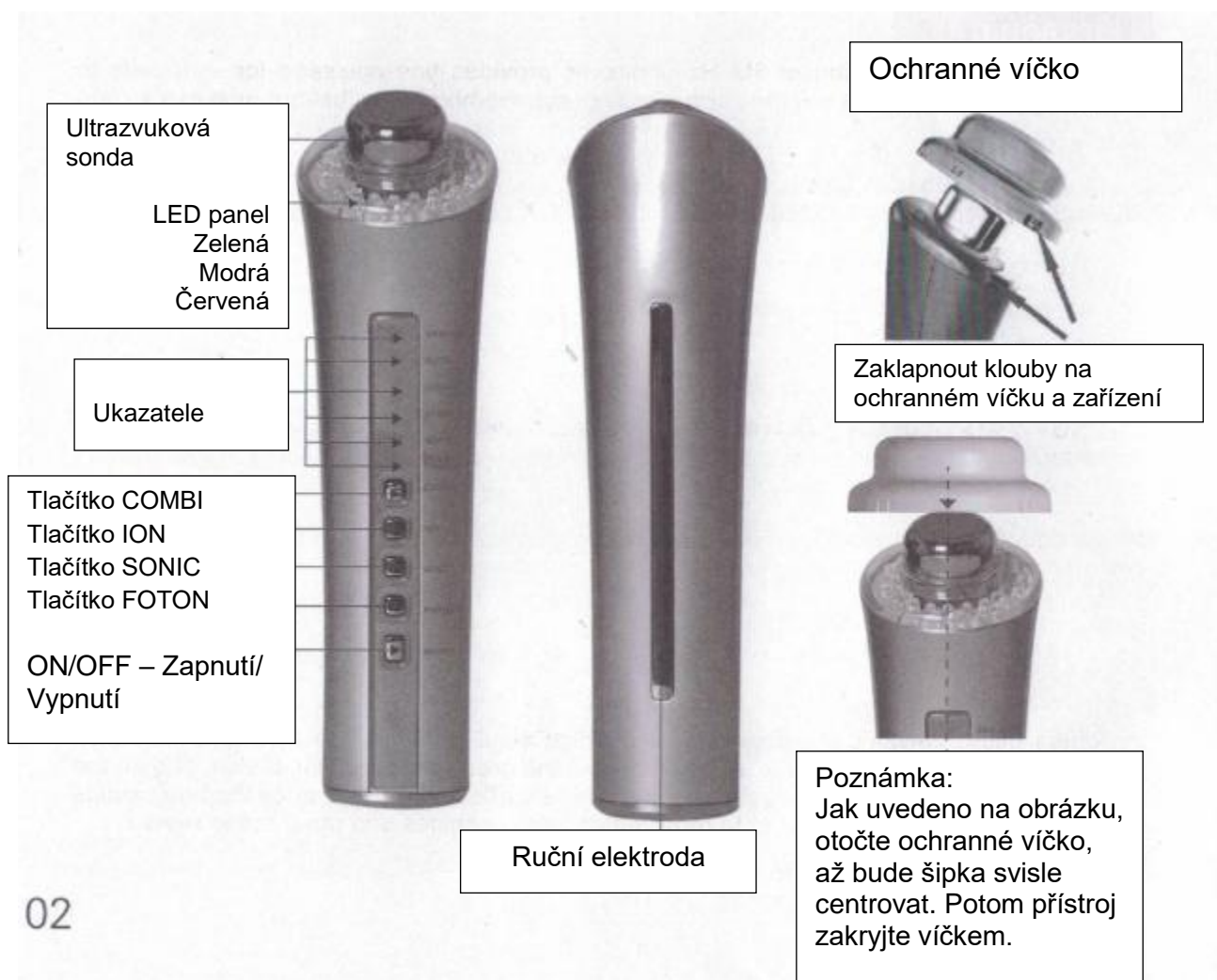

FUNKCE

Ultrazvuk

Stejněměrná a mírná vibrace 3 MHz ultrazvuku jemně masíruje kožní buňky k posílení jejich aktivity, zvyšuje propustnost cytomembrány, takže výživa může snadněji putovat do pleti; detoxikuje lymfatický systém a podporuje pružnost pleti. Tím se zevnitř oživuje mládí a zářivost vaší pleti.

Foton

Zelený foton

Zelený foton ulevuje při kožních problémech. Dokáže zmírnit podráždění pleti, jako je zarudnutí, svědění, bodnutí a další příznaky.

Modrý foton

Modrý foton uklidňuje pleť, udržuje vyváženost vlhkosti a tuku v pleti, zmenšuje zanícení, předchází citlivosti a odstraňuje akné a vřídky. Je vhodný pro mastnou pleť, pleť se sklony k akné a pro citlivou pleť.

Červený foton

Červený foton stimuluje metabolismus kožních buněk, podporuje regeneraci kolagenu. Pravidelné používání červeného fotonu dokáže postupně vyhladit vrásky a jemné rýhy a účinně zmenšit váčky pod očima.

Ion

Ion stimuluje pokožku mikro galvanicky, čímž zrychluje látkovou výměnu a zvyšuje aktivitu buněk. Na jedné strany ion+ dokáže vytáhnout tuk a nečistotu z kůže, na straně druhé ion- vtlačí esenci proti stárnutí do kůže, a tím zlepší účinky vašich produktů péče o pleť a pomůže jim v odstranění jemných rýh, vrásek a dalších známek stárnutí.

PROVOZNÍ INSTRUKCE

ON/OFF

Stiskněte tlačítko ON/OFF k zapnutí přístroje a rozsvítí se ukazatel ENERGIE/NABÍJENÍ; stiskněte tlačítko ON/OFF k vypnutí přístroje a ukazatel ENERGIE/NABÍJENÍ se vypne.

Jednoduchá funkce

Foton

Stiskněte tlačítko FOTON jednou pro ZELENÝ, dvakrát pro MODRÝ a třikrát pro ČERVENÝ.

Ultrazvuk

Stisknutím tlačítka SONIC spustíte ultrazvukovou funkci a rozsvítí se ukazatel REVIVE / oživení.

Ion

Jednou stiskněte tlačítko ION pro ion+, rozsvítí se ukazatel CLEANSE / čištění.

Dvakrát stiskněte tlačítko ION pro ion-, rozsvítí se ukazatel HYDRATE / hydratace.

Kombinovaná funkce

Ultrazvuk + červený foton

Stiskněte tlačítko COMBI jednou pro spuštění ultrazvuk + červený foton, rozsvítí se ukazatel ANTI-AGE / proti stárnutí.

Ultrazvuk + ion-

Stiskněte tlačítko COMBI dvakrát, spustí se ultrazvuk + ion-, rozsvítí se ukazatel NUTRI / výživa.

Pokyny k nabíjení pro nabíjecí model

1. Před prvním použitím zařízení nabijte, a pak pokaždé, když bude napětí baterie nízké.
2. Když bude napětí baterie nízké, všech šest ukazatelů pětikrát po sobě zabliká, a pak se přístroj automaticky vypne. V takovém případě nabijte zařízení co nejdříve, protože dlouhodobý stav nízkého napětí může vyvolat poškození baterie.
3. Během nabíjení bliká ukazatel POWER/CHARGE (energie/nabíjení). Po dokončeném nabíjení se ukazatel vypne.

RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE

Hluboké čištění

1. Navlhčete obličej.
2. Na obličej stejnoměrně naneste obličejový čisticí prostředek.
3. Zapněte zařízení, jednou stiskněte tlačítko ION a spusťte funkci CLEANSE / čistit.
4. Držte pásku na zadní straně přístroje tak, aby se vaše ruka dotýkala ruční elektrody. Položte sondu na tvář a jemně jí pohybujte po kůži podle obrázku rychlostí asi 3 cm/s po dobu asi tří minut.



Zavedení výživy / hydratace

1. Očistěte obličej.
2. Na očištěný obličej naneste stejnoměrně esenci k péči o pleť.
3. Zapněte přístroj, stiskněte dvakrát tlačítko COMBI a spusťte NUTRI / výživa, nebo stiskněte dvakrát tlačítko ION a spusťte HYDRATE / hydrataci.
5. Držte pásku na zadní straně přístroje tak, aby se vaše ruka dotýkala ruční elektrody. Položte sondu na obličej a jemně jí pohybujte po kůži podle obrázku rychlostí asi 3 cm/s po dobu asi pěti minut.



Detoxikace lymfy

1. Očistěte obličej.
2. Zapněte přístroj, stiskněte tlačítko SONIC a spusťte sonickou masáž.
3. Položte sondu na obličej a pomalu jí pohybujte od brady k uchu, potom dolů po krku k ramenu, čímž se vyčistí a detoxikuje lymfatický systém a podpoří se mikro oběh. Opakujte 5 – 10krát na každé straně.



Uklidnění kůže

1. Očistěte obličej.
2. Nasaďte si ochranné brýle.
3. Zapněte přístroj a stiskněte jednou tlačítko PHOTON / foton, zvolte GREEN / zelený.
4. Sviťte zeleným světlem na postiženou partii, nebo jí pomalu pohybujte nad obličejem. Celý proces trvá 5 – 10 minut.

Odstranění akné

1. Očistěte obličej.
2. Nasaďte si ochranné brýle.
3. Zapněte přístroj a stiskněte dvakrát tlačítko PHOTON / foton, zvolte BLUE / modrý foton.
4. Sviťte modrým světlem na obličej, na každé postižené partii chvíli zastavte, potom pomalu pokračujte k další partii. Celý proces trvá 5 – 10 minut.

Ošetření proti stárnutí

1. Očistěte obličej.
2. Na očištěný obličej naneste stejnoměrně esenci proti stárnutí.
3. Nasadte si ochranné brýle.
4. Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko COMBI, spustí se ANTI-AGE (proti stárnutí).
5. Přitiskněte sondu na tvář a pomalu pohybujte zařízením rychlostí asi 3 cm/s po dobu 5 – 10 minut.

PO POUŽITÍ

- Když je ošetření dokončeno, stiskněte tlačítko ON/OFF a nejprve vypněte přístroj.
- Vlhkým ubrouskem nebo hadříkem otřete ze sondy zbývající prostředek k péči o pleť.
- Po použití přechovávejte přístroj čistý a suchý.
- Pokud byste měli nepříjemný pocit, přestaňte s masáží. Ihned se obraťte na lékaře.