



KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-7 pro prevenci a odstranění akné

- Děkujeme, že jste si koupili kavitační přístroj CM-7 k odstranění akné.
- Postupujte podle vodítek v tomto manuálu a respektujte bezpečnostní informace uvedené v něm. Manuál uschovejte pro příští použití.
- Zařízení je určeno k provádění rutinní péče o kůži obličeje. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.

Komplex ke zničení akné

Kavitační přístroj CM-7 k odstranění akné zahrnuje tři vynikající technologie, uznávané obecně jako bezpečné a účinné v zkrášlovacím průmyslu, tj. iontovou, fotonovou a ultrazvukovou. Konstrukce se dvěma hlavami vám napomáhá realizovat různé funkce. S její pomocí budete moci snadno dosáhnout těchto zkrášlovacích účinků:

- hlubokého vyčištění
- hlubokého zvlhčení
- vyvážení tuku a hydratace
- detoxikace lymfy
- odstranění akné a prevence zánětu
- renovaci kůže a jejího omlazení

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	4
 Provoz a údržba	4
POPIS PŘÍSTROJE	5
FUNKCE	5
PROVOZNÍ INSTRUKCE	6
RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE	8
PO POUŽITÍ	9

Specifikace:

Nabíjecí model:

Název: Kavitační přístroj CM-7

Rozměry (mm): 170 x 90 x 50 mm

Váha (g): 175

Příkon: AC 100 – 240 V

Výkon: DC 5 V 1000 mA

Kapacita lithiové baterie: 1.100 mAh

Ultrazvuková frekvence: 3 MHz \pm 5%

Červený foton: vlnová délka 622 \pm 5 nm

Modrý foton: vlnová délka 467 \pm 5 nm

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Toto zařízení nepoužívejte

- S lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf atd.
- Na oči
- Za kterékoliv z těchto okolností:

během těhotenství nebo menstruace

pokud máte alergickou dermatitidu nebo krvácení

na kůži spálenou sluncem nebo vlivem slunce zarudlou

na kožní vředy

na partie po kosmetické operaci

při rozšířených cévách nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů

Provoz a údržba




Sami nedemontujte
zařízení ani sondu.



Přechovávejte
mimo dosah dětí.




Přechovávejte
stranou ohně.

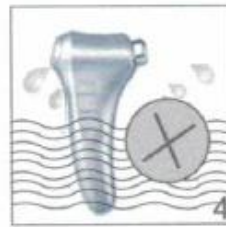

Přechovávejte
stranou vlhkosti a
vody.




Nenechte
upadnout ani
narazit.

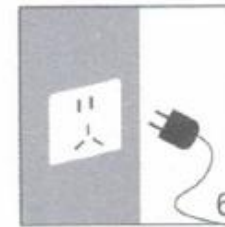

Po použití odpojte
kabel.

POPIS PŘÍSTROJE

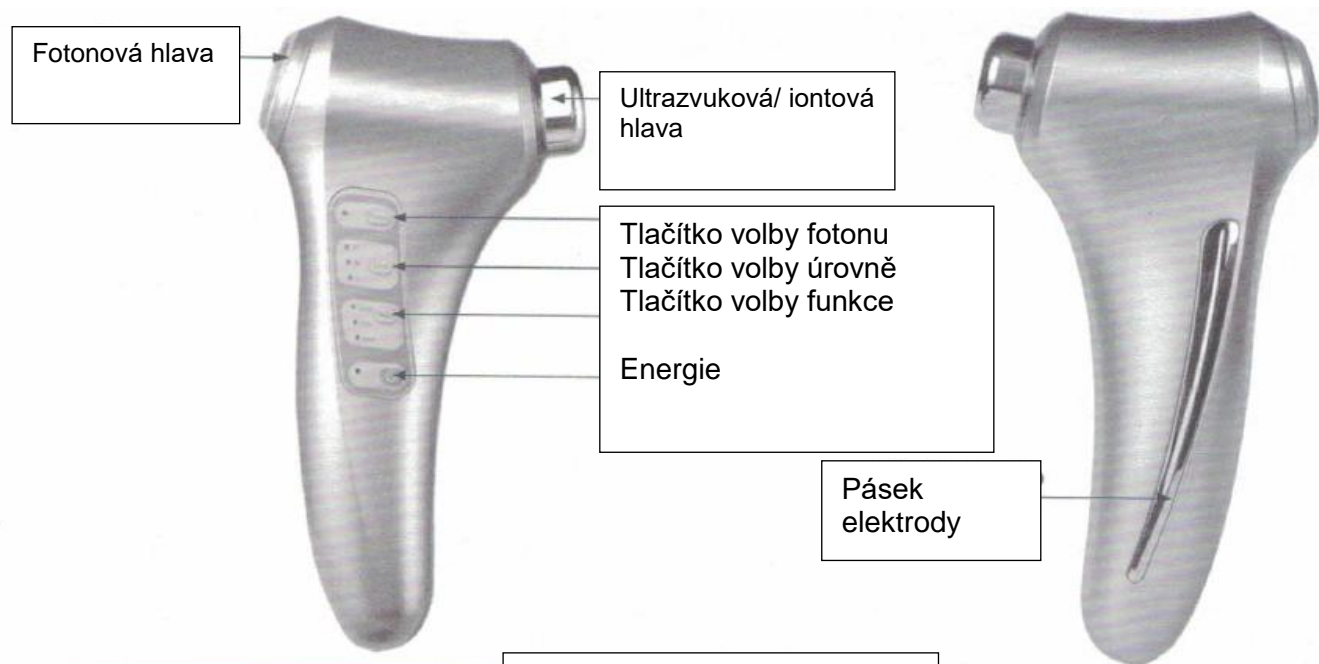

FUNKCE

Technologie používané v komplexu IPS ke zničení akné zahrnují 3 MHz ultrazvuk, iontovou vodivost a červenou / modrou fototerapii, které jsou všechny klinicky prověřené jako bezpečné a účinné, a vhodné pro všechny druhy kůže. Jejich výhodou je:

- hluboké vyčištění
- hluboké zvlhčení
- detoxikace lymfy
- odstranění akné a úprava skvrn

Provozní principy kavitačního přístroje CM-7 k odstranění akné

Ultrazvuková masáž

Zařízení zavádí 3 MHz ultrazvuk, zajišťující rovnoměrné a jemné vibrace pro masírování kůže, které dokáží zlepšit krevní oběh, detoxikovat lymfatický systém a zvýšit propustnost buněčné paměti, čímž rychleji odstraňují odpadní látky z kůže a zlepšují pohlcování výživných látek.

Iontová vodivost

Ionty nabízejí kůži mikro galvanickou stimulaci, jež zrychluje látkovou výměnu a zvyšuje aktivitu buněk. Na jedné straně ION+ dokáže z kůže extrahovat tuk a nečistoty, na straně druhé ION- odstraňuje z kůže zbytky těžkých kovů, které zůstaly v lícidlech, a tím zajišťuje hloubkové a pečlivé vyčištění kůže. Kromě toho může ION- účinně vtlačovat hydratační esenci do kůže, a tím podpoří optimální výsledky vašich produktů k péči o kůži. Iontová vodivost napomáhá v prevenci akné vyčištěním, a také tím, že umožní v kůži vyvážit tuk a vlhkost.

Fotonová terapie

Červený foton dokáže podpořit tvorbu kolagenu a buněčných aktivit k odstranění jizev, skvrn, známek po akné a dalších nedostatků. Jeho jemná vlnová délka se také může aplikovat na citlivé partie, jako je kůže kolem očí a T oblast v obličeji.

Modrý foton uklidňuje zánětlivou kůži a ničí bakterie; představuje prevenci proti vypuknutí akné. Vyčištěním a vyvážením mazového systému napomáhá zvednout a posílit kůži, a také vyčistit akné a skvrny.

PROVOZNÍ INSTRUKCE

ON/OFF

Stiskněte tlačítko a zařízení se zapne / vypne.

Volba funkce

S každým stisknutím tlačítka ZVOLIT se funkce přepíná dokola takto:
→ ION+ → ION- → ULTRAZVUK → OFF →

Volba úrovně

1. V režimu ZVOLIT s každým stisknutím tlačítka Úroveň se přepíná úroveň dokola takto:
→ L (nízká) → M (střední) → H (vysoká) → OFF →
2. V režimu FOTON funkce volby úrovně není k dispozici.

Volba fotonu

S každým stisknutím tlačítka Foton se přepíná funkce dokola takto:
→ Červený → Modrý → Červený a modrý → OFF →

Nastavení času

Zařízení je nastaveno na automatické vypnutí po 10 minutách u každé funkce. Čas bude vynulován u změněné funkce, ale ne u změněné úrovně.

Nabíjení

1. Před prvním použitím přístroj nabijte, a pak pokaždé, když se baterie vybijí.
2. Při nízkém napětí budou střídavě blikat všechny ukazatele. V takovém případě co nejdříve přístroj nabijte, protože dlouhodobý stav nízkého napětí může způsobit poškození baterie.
3. Při nabíjení bliká ukazatel Energie. Po dokončení nabíjení se ukazatel zastaví.

RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE

Hluboké vyčištění

1. Navlhčete obličej.
2. Na obličej stejnoměrně naneste obličejový čisticí prostředek.
3. Zapněte přístroj, stiskněte tlačítko ZVOLT ke zvolení ION+, potom stiskněte ÚROVEŇ a zvolte potřebnou úroveň.
4. Držte proužek na zadní straně přístroje tak, aby se vaše ruka dotýkala ruční elektrody. Položte sondu na tvář, jemně ji posunujte po kůži podle obrázku (rychlostí asi 3 cm/s).



Detoxikace lymfy

1. Vyčistěte obličej.
2. Zapněte zařízení, třikrát stiskněte ZVOLIT a zvolíte ultrazvuk; potom stiskněte ÚROVEŇ a zvolte potřebnou úroveň.
3. Položte sondu na tvář a masírujte podle obrázku.

Hluboké zvlhčení

1. Po vyčištění na obličej stejnoměrně naneste vhodný přípravek k péči o kůži.



2. Zapněte zařízení, stiskněte dvakrát ZVOLIT a zadejte režim ION-; potom stiskněte ÚROVEŇ a zvolte potřebnou úroveň.
3. Držte proužek na zadní straně přístroje tak, aby se vaše ruka dotýkala ruční elektrody. Položte sondu na tvář, jemně ji posunujte po kůži podle obrázku (rychlostí asi 3 cm/s).



Odstranění akné a úprava skvrn

1. Vyčistěte obličej.
2. Nasadte si ochranné rukavice.
3. K odstranění akné zapněte přístroj, dvakrát stiskněte FOTON; postižené partie osvětľujte modrým světlem a na každé chvíli zastavte.
4. K úpravě skvrn zapněte přístroj, stiskněte jednou FOTON; partie se známkami akné a skvrny osvětľujte červeným světlem a na každé se chvílku zastavte.
5. Pro denní péči o kůži zapněte přístroj, stiskněte třikrát FOTON; střídavě červeným a modrým světlem osvětľujte tvář, a tím posílíte imunitu a předejdete vypuknutí akné.



PO POUŽITÍ

- Po dokončeném ošetření nejprve stiskněte tlačítko Energie a vypněte přístroj.
- Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem otřete zbývající prostředek k ošetření pleti z ultrazvukové a iontové sondy.
- Po použití přechovávejte přístroj čistý a suchý.
- Pokud budete mít nepříjemné pocity, přestaňte přístroj používat. obraťte se ihned na svého lékaře.