

## KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-8 pro komplexní tělovou péči

- Děkujeme, že jste si zakoupili kavitační přístroj CM-8, komplex 6 funkcí v 1 přístroji pro komplexní tělovou péči, zeštíhlení a vytvarování postavy.
- Postupujte podle vodítek v této příručce a respektujte uvedené bezpečnostní informace. Příručku uschovejte pro budoucí referenci.
- Zařízení je určeno k zajištění rutinní péče o kůži a tělo. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.

## **OBSAH**

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE .....	3
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE .....	4
FUNKCE .....	5
CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE .....	5
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVOZOVÁNÍ.....	7
PROVOZNÍ INSTRUKCE .....	7
RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE .....	8
Průvodce EMS.....	8
Ošetření obličejů.....	10
Tvarování těla .....	11
TIPY K POUŽÍVÁNÍ A PO POUŽITÍ .....	13

## **SPECIFIKACE**

Nabíjení: není dobíjecí

Příkon: AC 100 – 240 V

Výkon: 15 V, 800 mA

Rozměry (mm): 190 x 90 x 60

Váha: 220 g

Průměr ocelové hlavy: 57 mm

Ultrazvuková frekvence: 1 MHz ± 5%

Nastavení času: automatické zastavení po 10 minutách

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Kavitační přístroj CM-8 je určen k zajištění rutinní péče o kůži a tělo. Používání pro žádný jiný účel není podporováno.

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto kapitolu. Během používání postupujte podle vodítek a četnost použití kontrolujte podle instrukcí v tomto manuálu.

Dobu ošetření zkratěte při prvním použití, pokud je vaše kůže velmi citlivá.

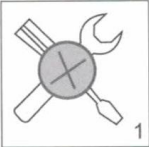


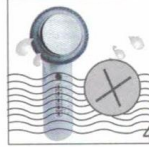

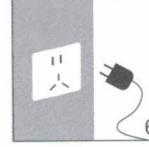
Zastavte ošetření, jestliže zjistíte nepříjemný pocit. Ihned se obraťte na lékaře.

### Zařízení nepoužívejte

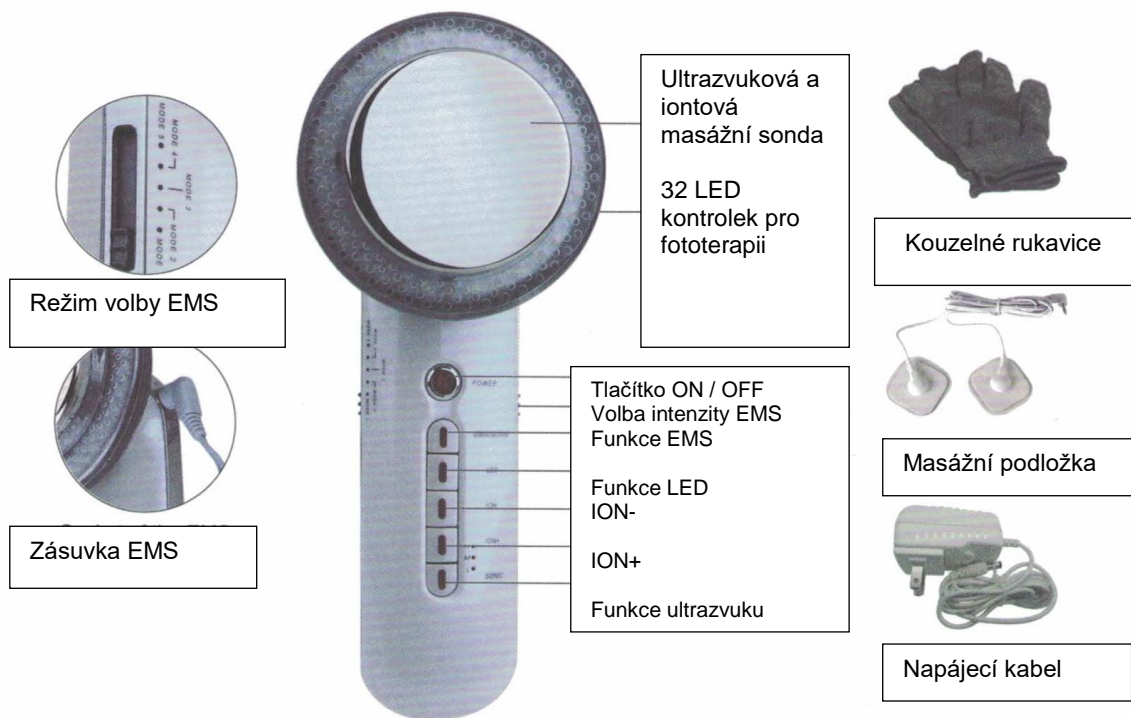
S lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf atd.

Za kterékoliv z těchto okolností:

- během těhotenství nebo menstruace
- pokud máte alergickou dermatitidu nebo krvácení
- na podrážděnou kůži nebo na kůži spálenou sluncem
- na kožní vředy nebo záněty
- na partiích po kosmetické operaci
- při rozšířených cévách nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů

Prevence údržby					
					
Sami přístroj nedemontujte	Přechovávejte mimo dosah dětí	Přechovávejte stranou ohně	Přechovávejte stranou vlhkosti a vody	Nenechte upadnout ani narazit	Po použití odpojte kabel

## JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE



## FUNKCE

**Kavitační přístroj CM-8 je určen pro:**

- odolávající tuk a celulitidu
- odulost
- známky vytažení a jizvy
- ochabnutí metabolismu a krevního oběhu
- svěšenou, povolenou kůži, vrásky a rýhy
- akné, skvrny a tmavá místa
- matný odstín kůže
- tmavé kruhy, váčky pod očima a jemné vrásky

## CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE

Ultrazvuková terapie:

Ultrazvuk je definován jako zvukové vlny o frekvenci vyšší než 20 000 Hz. Dlouhá léta se používá v různých klinických ohledech a stává se stále obvyklejším ve zkrášlovacím průmyslu. Za přísné kontroly a nastavení může mít ultrazvuk různé výsledky ve zlepšení kůže a tvarování postavy.

1 MHz ultrazvuk dokáže detoxikovat lymfatický systém a zlepšit tělesný metabolismus a krevní oběh, odstraní z kůže přebytek vody a váčky pod očima, a redukuje vrásky a rýhy tím, že podporuje tvorbu kolagenu mládí. Pokud se používá spolu s produkty pro péči o kůži, může zlepšit výsledky tak, že výživu dopraví hluboko do kůže. Když se aplikuje na tělo, dokáže masírovat tukové buňky svou mechanickou, chemickou a zahřívací funkcí, takže je přinutí ke zmenšení; tím se účinně zredukuje odolný tuk.

## Iontová vodivost

Iontová vodivost je technologie, která je široce akceptována v salonech krásy a nemocnicích. Má kladný účinek ve stejné funkci jako magnet s jeho kladnou a zápornou elektrodou, iontové ošetření extrahuje z kožních pórů nečistotu a mastnotu a dopravuje výživu hluboko dovnitř s daleko vyšší rychlostí vstřebávání.

Kyselá reakce, způsobená kladným iontem (ION+), dokáže zredukovat přívod krve do kůže, tím zmírňuje rudnutí a podráždění kůže. Dokáže také smrštit póry tím, že posílí strukturu kůže. To tuto metodu činí velmi vhodnou pro kůži podléhající snadno alergiím a v případě kožního akné.

Na druhé straně alkalická reakce způsobená záporným iontem (ION-) může stimulovat krevní oběh a zjemnit strukturu kůže, čímž zlepší vitalitu a pružnost kůže, a proto velmi pomáhá u stárnoucí kůže a její vyschlosti.

## Červená a modrá fototerapie

Foton s různou vlnovou délkou může mít různé účinky na kůži.

Červený foton: vlnová délka  $622 \pm 7$  nm, stimuluje tvorbu kolagenu a buněčnou aktivitu. Je účinný pro všechny typy a stavy kůže a dokáže zredukovat vrásky a rýhy a obnovit vitalitu kůže a její zářivý odstín. Zahřívací účinek na buňky může urychlit krevní oběh a pohyb buněk, a tedy napomáhá zbavit se nechtěného tuku. Jeho jemná vlnová délka se dá aplikovat také na citlivé partie, jako jsou partie kolem očí a čelo.

Modrý foton: vlnová délka  $467 \pm 5$  nm, brání vzniku akné tím, že likviduje bakterie a působí protizánětlivě. Je mimořádně vhodný pro citlivou kůži a kůži náchylnou k akné. Vyčištěním a vyvážením mazového systému napomáhá pozvednutí a posílení kůže, a také vyčištění akné a skvrn.

## EMS masáž

EMS (elektroterapie) masáž je široce přijímána v lékařském a zkrášlovacím průmyslu jako účinná fyzická terapie. Dokáže stimulovat svaly mikroproudem a donutit je k pohybu. Svalový pohyb odčerpá tuk a uhlohydrát v okolí, a pohyby svalů stimulací EMS dokáže odčerpat 50x víc, než pravidelné cvičení; tím spalují odolný tuk bez vedlejších účinků.

Stimulace svalstva elektrickými impulsy může také urychlit růst proteinových a elastických vláken, má tedy účinek za kožní lifting, ale také na úpravu celulitidy a jizev, na oživení mládí kůže.

Dále dokáže zlepšit rychlost průniku do buňky, tím posiluje vstřebávání oksyložené krve a atomů kyslíku, a tak pomáhá k detoxifikaci, zvlhčení a odolnosti kůže.

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVOZOVÁNÍ

- Toto zařízení se nedá nabíjet. Před spuštěním přístroje zapojte napájecí kabel.
- Zařízení nepoužívejte, jestliže jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené či mimořádně zahřáté.
- Nezapomeňte po použití vždy vypnout přístroj a odpojit napájecí kabel.
- Při používání funkce EMS se nedotýkejte těla ocelovou hlavou.
- Při používání funkce EMS neaplikujte masážní podušky na oči, čelo, krk ani prsa.

## PROVOZNÍ INSTRUKCE

**Přepínač ON/OFF:** stiskněte tlačítko ON/OFF, zařízení se zapne; stiskněte ještě jednou a zařízení se vypne.

**Volba funkce:** Stiskněte tlačítko vámi zvolené funkce. Během použití lze funkce měnit.

### Doporučená četnost používání

Ošetření	týden 1 – 2	potom
ION+ (obličej)	3 min denně	2 – 3x týdně
ION- & ultrazvuk (obličej)	5 min denně	2 – 3x týdně
LED & ultrazvuk (obličej)	10 min denně	2 – 3x týdně
ION- & LED & ultrazvuk (tělo)	10 – 30 min denně	2 – 3x týdně
EMS (obličej s rukavicemi)	5 min denně	2 – 3x týdně
EMS (tělo s rukavicemi či podložkami)	15 – 20 min denně	2 – 3x týdně

**Potvrzení ultrazvuku:** Ultrazvukovou hlavu položte na rovnou plochu hlavou nahoru, kápněte trochu vody dovnitř hlavy a stiskněte „SONIC“. Vodní kapka bude vibrovat, když bude zapnutý ultrazvuk.

Ultrazvuková terapie by se měla používat spolu s prostředkem k péči o kůži, aby vedl zvukové vlny do kůže. Nejlepší doporučené prostředky jsou gelové.

## RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE

### Průvodce EMS

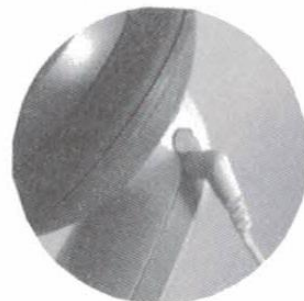
Použití EMS (elektroterapie) s masážními podložkami:

1. Omyjte tělesnou partii, která se má ošetřit.
2. Jeden konec kabelu EMS připojte k podložkám a druhý konec do zařízení.
3. Sejměte ochranný film z podložek a podložky přitiskněte na ošetřovanou plochu. Podložky se nemají překrývat.
4. Ujistěte se, že intenzita EMS je na úrovni 0.
5. Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko EMS, tím se spustí funkce EMS.
6. Zvolte vhodnou intenzitu EMS na pravé straně zařízení.
7. Po každém použití vraťte intenzitu EMS na úroveň 0.
8. Obě podložky se mají používat vždy současně.
9. Údržba masážních podložek:

Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem setřete nečistotu a / nebo chloupky z podložek a na podložky vraťte ochranný film.

Pokud se po delší době uložení nedají podložky přilepit na kůži, navlhčete je kapkou nebo dvěma vody a obnoví se jejich lepivost. Nelijte na ně vodu a nenechte je nasáknout vodou.


Masážní podložky jsou vyměnitelné. Až přestanou lepit, vyměňte je za nové.





Použití EMS (elektroterapie) se speciálními rukavicemi:

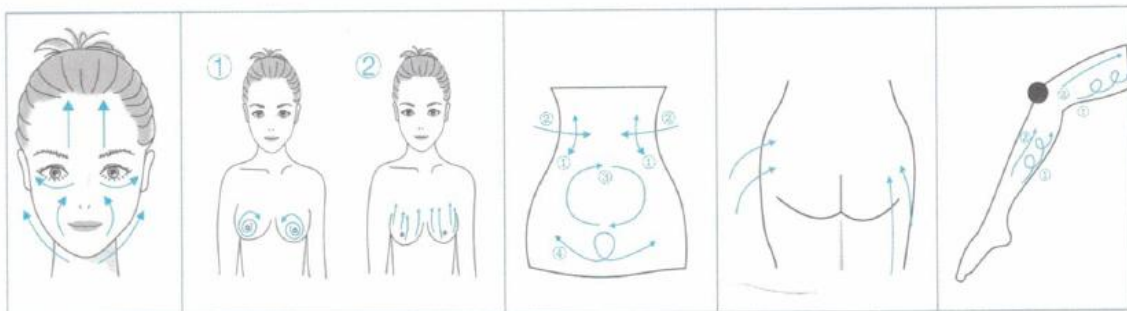1. Omyjte si obličej nebo ošetřovanou partii těla.
2. Zapojte jeden konec kabelu EMS k rukavicím a druhý konec k zařízení.
3. Natáhněte si rukavice tak, aby konec zapojeného kabelu byl nahoře.
4. Ujistěte se, že intenzita EMS je na úrovni 0.
5. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko EMS, tím se spustí funkce EMS.
6. Zvolte vhodnou intenzitu EMS na pravé straně přístroje. Při ošetřování obličeje pro zpevnění a lifting kůže je doporučována úroveň 1 – 2.
7. Po každém použití vraťte intenzitu EMS na úroveň 0.
8. Obě rukavice se mají používat současně.



## Ošetření obličeje

### 1. Pro hloubkové vyčištění

- Odstraňte make up a očistěte kůži
- Obličejový čisticí prostředek aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou ocelovou hlavu
- Zapněte přístroj, zvolte funkci ION+, zvolte úroveň intenzity a začněte s ošetřením

### 2. Pro zavedení výživy a zlepšení odstínu kůže

- Odstraňte make up a očistěte kůži
- Gel / tělové mléko aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou ocelovou hlavu
- Zapněte přístroj, zvolte funkci ION- a funkci SONIC, zvolte úroveň intenzity a začněte masírovat podle obrázku



### 3. Pro úpravu vrásek a lifting kůže:

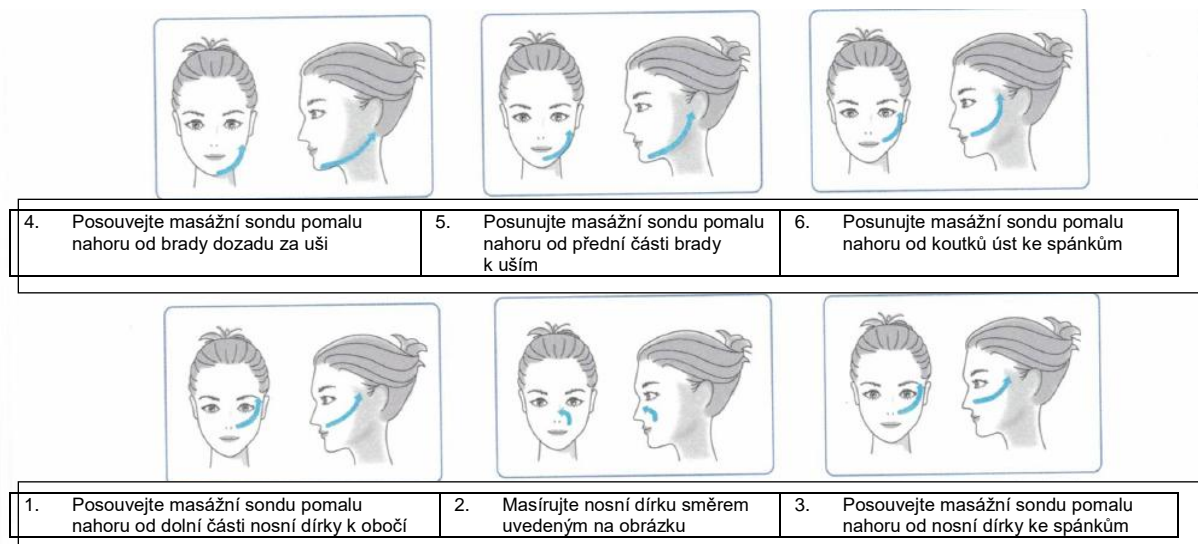
- Odstraňte make up a očistěte kůži
- Gel / tělové mléko aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou ocelovou hlavu
- Zapněte přístroj, zvolte funkci SONIC, zvolte úroveň intenzity, zvolte červenou LED, a pak začněte s ošetřením

### 4. Pro úlevu od akné a odstranění skvrn:

- Odstraňte make up a očistěte kůži
- Gel / tělové mléko aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou ocelovou hlavu
- Zapněte přístroj, zvolte funkci SONIC, zvolte úroveň intenzity, zvolte modrou LED, a pak začněte s ošetřením
- Chvilí zastavte na partii s akné, aby došlo k účinnému odstranění zanícení a bakterií

## 5. Pro citlivou kůži:

- Ošetřete funkcí SONIC a/nebo LED; funkce ION a EMS se nedoporučují
- Zvolte kombinovaný režim červené / modré LED a kůži ošetřujte střídavě červenou a modrou LED
- Po každém použití kůži dobře hydratujte



## Tvarování těla

- Očistěte ošetřovanou tělesnou partii
- Gel / tělové mléko aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou ocelovou hlavu
- Zapněte přístroj, zvolte funkci ION- a SONIC, zvolte úroveň intenzity, zvolte červenou LED, a pak začněte s masáží