

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-8 pro čištění pleti

Provozní návod



- Děkujeme, že jste si zvolili náš výrobek. Nejprve si pozorně přečtete Provozní manuál, abyste přístroj mohli správně provozovat. Po přečtení jej dobře uschovejte.
- Tento nástroj krásy je určen k ošetření zdravé pleti za účelem péče o její krásu; není dovoleno používat výrobek nebo ho prodávat za léčebným účelem.

OBSAH

OBSAH	2
SPECIFIKACE.....	2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS SOUČÁSTÍ	4
HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ	7
INDUCT-IN.....	8
ULTRAZVUKOVÉ A IONTOVÉ OŠETŘENÍ SPOLEČNĚ	10
ZÁRUČNÍ LIST KVALITY	12

SPECIFIKACE

Zásobování energií: 3 ks AAA, normální nebo dobíjecí baterie

Rozměry (přístroj): výška 16 x šířka 4,4 x hloubka 3,5 cm

Váha (přístroj): 77,4 g

Ultrazvuková frekvence: $3 \pm 5\%$ MHz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek je nástrojem péče o krásu zdravé kůže, nepožívejte jej pro jiné účely, než je péče o krásu.
- Co se týče frekvence používání, postupujte podle provozního návodu. Dobu použití zkratěte při prvním použití a máte-li alergickou kůži.
- Zastavte používání, pokud se nebudete cítit dobře.

Přístroj není dovoleno používat

Na oči;

U uživatelů, kteří prodělali operaci zlomeniny, obličejový lifting,

mají voperovaný kov, silikagel a plastový implantát v obličejí;

Na partie rozpálené a zanícené v důsledku intenzivního opalování;

U dermatitidy způsobené kosmetikou;

Na partie s akné a zánětem;

Na svědící nebo horké partie;

Na skvrny způsobené fyzickým podrážděním;

U uživatelů s dilatací kapilár, způsobenou dlouhodobým

podáváním steroidů a hormonů, a s nesprávnou funkcí jater

Plastické partie;

U uživatelů s kovem v těle po léčení;

U uživatelů se srdeční poruchou (zvláště s kardiostimulátorem);

Na další partie, které nejsou uvedeny v Provozním návodu.



— 1 —

Upozornění pro provoz a skladování

Nedávejte do umývadla ani jiná místa, kde by snadno utrpěl vodou;

Neprovozujte mokřýma rukama;

Před uložením odpojte od zdroje napájení;

Přechnovávejte mimo dosah dětí, nepoužívejte v případě mladých osob.

*Před prvním použitím si proveďte test kůže na alergii.

Jednoduchý test kůže na alergii

1. Očistěte partii na paži;
2. Na kůži naneste speciální esenci a nechte působit 48 hodin, nechte přirozeně zaschnout (kůže nemá přijít do styku s vodou, neomývejte esenci); pokud byste se cítili v nepohodě, ihned přestaňte s testem;
3. Nebude-li kůže podrážděná do 48 hodin, můžete začít používat.
4. Jestliže se objeví alergická reakce, ihned zastavte použití a obraťte se na lékaře.



Přístroj

Oblíčeiová elektroda

Kryt pro odličovací tampón

Tlačítko otevírání odličovací
tampón


Operační panel

Ruční elektroda

POPIS SOUČÁSTÍ



Názvy na operačním panelu

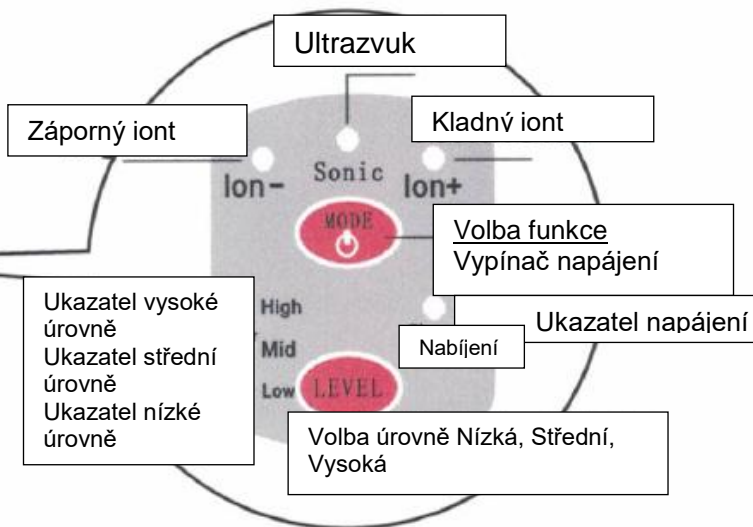

Jak držet ruční elektrodu?

Pro normální způsob použití byste měli pevně držet Příklad krásy, který budete provozovat pouze vy.



Jak přístroj pohánět a jak dobíjet



Strojek se může pohánět 3 ks normální AAA baterie



Strojek se může pohánět 3 ks nabíjecí AAA baterie s těmito dvěma způsoby dobíjení:

1. Dobijte přes USB zdroj počítače připojením strojku k PC přes USB kabel.



Při dobíjení svítí ukazatel nabíjení.

2. Dobíjejte přes adaptér tak, že zástrčku adaptéru zapojíte do zásuvky ve zdi.



HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ

1. Odstranění líčení




Odstranit ozdoby

Nezapomeňte vyjmout náušnice a piercing z uší, prstýnky, náhrdelník a hodinky.

Provozní návod


1. Kosmetický tampón namočte čistícím tonerem nebo destilovanou vodou (obličej a tampón musí být vlhké)
2. Kosmetický tampón připevněte na masážovací hrot.
3. Spusťte přístroj, zvolte Ion+
4. Zvolte vysokou / nízkou úroveň:
LOW / nízkou zvolte při prvním použití; až si pleť zvykne, zvolte MIDDLE / střední nebo HIGH / vysokou.
5. Ošetření
Podložku s elektrodou položte na kůži, nebo pevně držte přístroj, hrot strojku položte na obličej, každých 10 – 30 vteřin jej posuňte ve směru podle vedlejšího obrázku.
6. Po ošetření
Otevřete kryt kosmetického tampónu, tampón vyjměte a očistěte masážovací hrot.

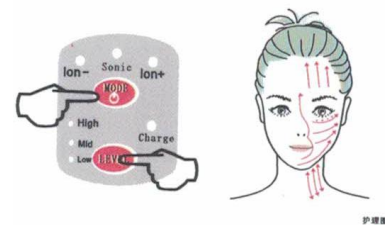


INDUCT-IN

Na příslušné partii na obličeji provádějte s vhodným množstvím esence (např. esence s funkcí odstraňování skvrn nebo odstraňování vrásek) tak, aby se zvýšila koncentrace a zlepšilo vstřebávání esence.

1. Masírovací hrot navlhčete esencí

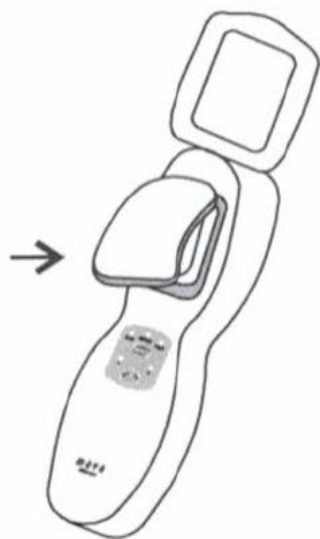

a) Upevněte kosmetický tampón

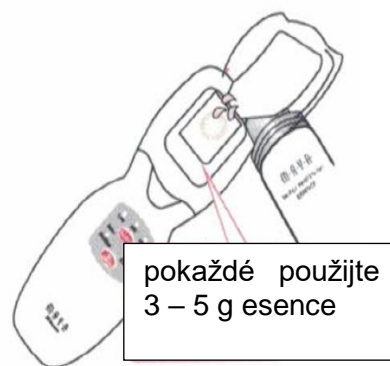

— 6 —

b. Kápněte esenci na kosmetický tampón – pečlivě jej zvlhčete

c. Dokončete



2. Spusťte přístroj, zvolte lon-

3. Zvolte High (vysoká) / Low (nízká) úroveň:

Při prvním použití zvolte LOW (nízká) úroveň.

Jakmile se kůže adaptovala, zvolte Middle (střední) nebo High (vysoká).

4. Způsob ošetření

- a. Esenci naneste na požadovanou partii, na partii přiložte masážní hrot a držte jej na kůži 20 vteřin či déle.
- b. Jednou za 5 vteřin jej posuňte na další partii (jakmile uslyšíte příkazový zvuk).

5. Po ošetření

Po ošetření otevřete kryt kosmetického tampónu, vyjměte kosmetický tampón a očistěte masážní hrot.



Obrázek ošetřování

ULTRAZVUKOVÉ A IONTOVÉ OŠETŘENÍ SPOLEČNĚ

Masírujte celý obličej společně ultrazvukem a ionty. Ionty dokáží zavést („induct in“) do kůže výživu a ultrazvuk 3 mil./vteřinu umí stimulovat a upravovat buněčnou membránu, zlepšovat propustnost pokožky, zrychlit látkovou výměnu a podnítit kůži, aby vstřebala esence.

1. Naneste gel na masážní hrot a požadovanou partii (protože ultrazvuk nemůže přejít do vzduchu, proto mezi masážním hrotem a kůží je nutný gel, aby zavedl ultrazvuk do kůže).




Použijte víc esence, není-li masážní hrot dostatečně namazaný



Masážní hrot má těsně přiléhat na kůži

2. Spusťte přístroj, zvolte SONIC a ION- (rozsvítí se dva ukazatele)
3. Zvolte úroveň High (vysoká) nebo Low (nízká):
Při prvním použití zvolte LOW (nízká), a až se kůže adaptuje, použijte Middle (střední) nebo High (vysoká).

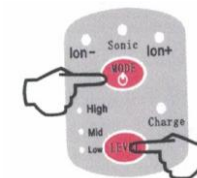



4. Způsob ošetření
„Štíhlá tvář“:
pracujte od úst k očím



„Zvednout koutek úst“:
pracujte směrem nahoru kolem
koutku úst



„Zpevnit dvojitou bradu“:
Pracujte směrem nahoru od
brady k uchu, od brady ke koutku
úst



„T-zóna“:
klouzejte po nosní dírce a kořenu
nosu nahoru a dolů po dobu minuty
až dvou

**Odstranění tmavých kruhů, váčků,
detoxikace obličejové lymfy**

Pracujte od vnitřního koutku oka ke spánku

Pracujte od kraje tváře za ucho

Od kůže za uchem k partii

klíční kosti

Od klíční kosti k podpaždí

Je lepší opakovat 20krát



ZÁRUČNÍ LIST KVALITY

Model výrobku

Zakoupen dne

Zakoupen u

Distributor

Záruční doba na tento výrobek je jeden rok

1. Výrobek používejte podle tohoto Provozního návodu. Závady v rámci záruční lhůty budou zdarma opraveny. (K bezplatné záruční opravě zašlete výrobek a Záruční list)
2. Opravu zajistíme za určitý poplatek, pokud během záruční lhůty dojde k některé z dále uvedených závad:
 - (1) Závada a poškození způsobené nesprávným používáním;
 - (2) Závada a poškození způsobené neoprávněnou opravou nebo úpravou;
 - (3) Závada a poškození způsobené dopravou a pádem výrobku po zakoupení;
 - (4) Závada a poškození způsobené požárem, zemětřesením, povodní, bleskem a jinou vyšší mocí.
3. Záruční list pečlivě uschovejte, protože nebude vydán znovu.