



- Děkujeme, že jste si zakoupili kavitační přístroj PH-1 na fotonové omlazení pleti.
- Postupujte podle návodu v této příručce a respektujte uvedené bezpečnostní informace. Návod uschovejte pro příští nahlédnutí.
- Zařízení je určeno k rutinní péči o obličej. Žádný jiný způsob použití ani prodej pro lékařský účel není podporován.


Omlazení pokožky fotonovou terapií

Kavitační přístroj PH-1 je zařízení vybavené pokročilou technologií pro ošetření pleti a pokožky – fototerapií, tj. aplikací barevného světla k regeneraci kůže. Přístroj pracuje se třemi různými vlnovými délkami s různou energií. Pomocí tří barev (červené, žluté a modré světlo) poskytuje přístroj účinnou a kompletní fototerapii, čímž napomáhá pleť a pokožku zregenerovat a znovu získat zdravou a omlazenou kondici.

Pravidelným používáním přístroje na fotonové omlazení pleti můžete dosáhnout těchto efektů krásy:

- odolnosti proti vráskám
- řešení jemných rýh
- projasnění pleti
- vyblednutí skvrn
- protizánětlivého ošetření
- odstranění akné

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
 PROVOZ A ÚDRŽBA	3
POPIS PŘÍSTROJE	3
FUNKCE	4
PROVOZNÍ INSTRUKCE	4
RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE	5
PO POUŽITÍ	6

Specifikace:

Název: Přístroj na fotonové omlazení pleti
Rozměry: 180 x 75 x 50 mm
Váha: 155,7 g
Barvy LED: červená, modrá, žlutá
Příkon: AC 100 – 240 V
Výkon: DC 5V, 1.000 mA
Kapacita lithiové baterie: 1.100 mAh
Nastavení automatického vypnutí: 10 minut


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Toto zařízení nepoužívejte

- s lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf, atd.
- na oči
- za žádné z dále uvedených okolností:
Během těhotenství nebo menstruace
Trpíte-li alergickou dermatitidou nebo krvácením
Na spálení či zarudnutí po opalování
Na kožní vředy
Na partie po kosmetických operacích
Při rozšíření cév nebo nedostatečné funkci jater, způsobené dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů



PROVOZ A ÚDRŽBA

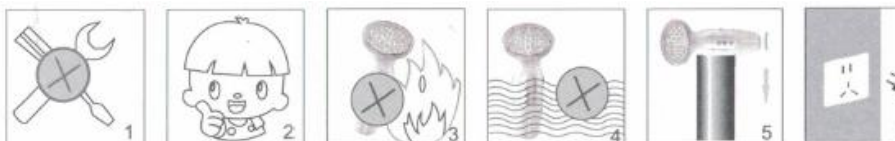

Samy nerozebírejte zařízení ani sondu	Přechovávejte mimo dosah dětí	Přechovávejte stranou ohně	Přechovávejte stranou vody a vlhkosti	Nenechte spadnout ani narazit	Po nabití odpojte kabel
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

01

POPIS PŘÍSTROJE



02

FUNKCE

Červené světlo

Červené světlo, jehož vlnová délka je 622 ± 5 nm, dosáhne hlouběji do kůže, aktivuje pojivové buňky, urychluje látkovou výměnu kožních buněk a podporuje regeneraci kolagenu. Dlouhodobé používání červeného světla může postupně vyhladit vrásky a jemné rýhy, a také účinně zmenšuje váčky pod očima. Přispívá k zářivému odstínu a elasticitě kůže.

Modré světlo

Modré světlo, jehož vlnová délka je 467 ± 5 nm, má antiseptický účinek, takže dokáže uklidňovat záněty, vyvážit vlhkost a tuk v pokožce a snižovat výskyt akné, lupenky, ekzému a podobných stavů kůže; tím udržuje kůži zdravou.

Žluté světlo

Žluté světlo, jehož vlnová délka je 580 ± 3 nm, je jemné a je zvláště vhodné pro citlivý typ kůže. Jemně stimuluje lymfatický a nervový systém, zvyšuje imunitu kůže a snižuje její citlivost. Důsledné používání žlutého světla zlepšuje matný odstín pleti a zesvětlí tmavé skvrny; činí pleť jasnou a čistou.

PROVOZNÍ INSTRUKCE

ON/OFF (zapnout/vypnout)

Stiskněte tlačítko ON/OFF a přístroje se zapne/vypne.

Nepřetržitý režim

Červené světlo

Když je přístroj zapnutý, jednou stiskněte tlačítko volby Foton; rozsvítí se ukazatel červené barvy.

Modré světlo

Když je přístroj zapnutý, dvakrát stiskněte tlačítko volby Foton; rozsvítí se ukazatel modré barvy.

Žluté světlo

Když je přístroj zapnutý, třikrát stiskněte tlačítko volby Foton; rozsvítí se ukazatel žluté barvy.

Pulzní režim

Červené pulzní světlo

Když je přístroj zapnutý, stiskněte jednou tlačítko volby Foton, pak jednou tlačítko volby režimu; ukazatel červeného fotonu začne blikat.

Modré pulzní světlo

Když je přístroj zapnutý, stiskněte dvakrát tlačítko volby Foton, pak dvakrát tlačítko volby režimu; ukazatel modrého fotonu začne blikat.

Žluté pulzní světlo

Když je přístroj zapnutý, stiskněte třikrát tlačítko volby Foton, pak třikrát tlačítko volby režimu; ukazatel žlutého fotonu začne blikat.

Dotyková konstrukce

Přístroj je konstruován tak, aby byl citlivý na dotek. To znamená, že když je zapnutý, světlo vychází pouze v případě, že se sonda dotýká vaší kůže.

Nastavení času

Přístroj je nastavený tak, že pracuje 10 minut, a pak se automaticky vypne. Při změně funkce se desetiminutové nastavení vynuluje. Budete-li chtít používat přístroj déle než 10 minut, zapněte jej znovu po uplynutí desetiminutového nastavení.


Nabíjení

1. Nabijte přístroj před prvním použitím a vždy, když je napětí baterie nízké.
2. Když je napětí baterie nízké, začnou blikat čtyři ukazatelé jeden po druhém; po pěti zablikáních se přístroj automaticky vypne. V tom případě jej co nejdříve dobijte, protože dlouhodobý stav nízkého napětí může způsobit poškození baterie.
3. Během nabíjení bliká ukazatel nabití; po skončení nabíjení se ukazatel rozsvítí.

RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE

Denní péče


1. Vyčistěte pleť.
2. Očistěte fotonovou sondu přístroje vlhkým ubrouskem nebo hadříkem.
3. Nasadte si ochranné brýle.
4. Zapněte přístroj a zvolte oblíbenou fotonovou barvu.
5. Dotkněte se lehce sondou určené partie pleti, aby se spustil foton; zůstaňte chvíli na jednou místě, pak se posuňte na další místo ošetření. Celý proces trvá asi pět minut.

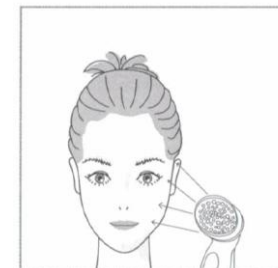

Ošetření proti stárnutí

1. Vyčistěte pleť.
2. Očistěte fotonovou sondu přístroje vlhkým ubrouskem nebo hadříkem.
3. Nasadte si ochranné brýle.
4. Zapněte přístroj a jednou stiskněte tlačítko volby fotonu.

Dotkněte se lehce sondou určené partie pleti, aby se spustil foton; zastavte chvíli na jednou místě, pak se posuňte na další místo ošetření. Déle setrvejte na vráskách a jemných rýhách. Celý proces trvá asi 10 - 15 minut.

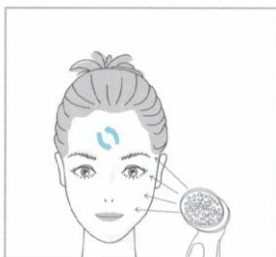

Odstranění akné

1. Vyčistěte pleť.
2. Očistěte fotonovou sondu přístroje vlhkým ubrouskem nebo hadříkem.
3. Nasadte si ochranné brýle.
4. Zapněte přístroj a dvakrát stiskněte tlačítko volby fotonu.
5. Dotkněte se lehce sondou určené partie pleti, aby se spustil foton; zastavte chvíli na jednou místě, pak se posuňte na další místo ošetření. Déle setrvejte na postižené partii. Celý proces trvá asi 10 - 15 minut.



Projasnění pleti

1. Vyčistěte pleť.
2. Očistěte fotonovou sondu přístroje vlhkým ubrouskem nebo hadříkem.
3. Nasadte si ochranné brýle.
4. Zapněte přístroj a třikrát stiskněte tlačítko volby fotonu.
5. Dotkněte se lehce sondou určené partie pleti, aby se spustil foton; zastavte chvíli na jednou místě, pak se posuňte na další místo ošetření. Déle setrvejte na skvrnách a vadách. Celý proces trvá asi 10 - 15 minut.



PO POUŽITÍ

- Po dokončeném ošetření stiskněte tlačítko ON/OFF a nejprve přístroj vypněte.
- Sejměte a uložte ochranné brýle.
- Po použití uschovejte přístroj na čistém a suchém místě.
- Přístroj přestaňte používat, pokud byste se cítili nepříjemně. Ihned se obraťte na svého lékaře.