

Kosmetický kavitační přístroj s RFS filtrem

Návod k použití

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a porozumějte mu.

Uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Tento přístroj je založen na ošetření zdravé pokožky za účelem péče o krásu, není dovoleno jej používat ani prodávat za účelem terapie.

Kosmetický kavitační přístroj S RFS filtrem

Bezpečné užívání a bezpečnostní opatření

Tento přístroj je založen na principu *fyzikální terapie* a využívá mezinárodně uznávané technologie, které jsou bezpečné a účinné o pokožku: radiofrekvenční kosmetika, nízkofrekvenční mikropro masáž, fotonová terapie, ultrazvuková péče, kombinované v přenosném zařízení. Pomocí neškodné fyzikální energie stimuluje podporuje vitalitu buněk samotné pokožky, zlepšuje zásobová kyslíkem a jejich metabolismus a navrácí pleti mladistvý vzhled. L snadno dosáhnout efektů hydratace, vyhlazení vrásek a zesvětlení zpevnění a zlepšení pleti.

			
	1. Přístroj nesmíte rozebírat!	2. Uchovávejte mimo dosah dětí!	3. Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí!
			
	4. Nepoužívejte v blízkosti ohně!	5. Po použití vytáhněte zástrčku ze sítě!	6. Dbejte, aby přístroj nespadol na zem!

OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny.....	01
2. Popis přístroje.....	02
3. Aplikační cykly	07
3.1 Postup	08
3.2 Techniky péče	09


Bezpečnostní opatření

1. Pokud je vaše pokožka velmi citlivá, proveďte před použitím přístroje kožní alergický test.
2. Nepoužívejte jiné nabíjecí zařízení než originální nabíječku.
3. Pokud je přístroj poškozen nebo nemůže správně fungovat, kontaktujte zákaznický servis.
4. Při používání se nepřibližujte k umyvadlu nebo vaně. Pokud vám náhodou spadne do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku z napájecí sítě, a teprve poté vyjměte přístroj z vody.
5. Nepoužívejte v období nestabilního vylučování hormonů, jako je menses, těhotenství, kojení.
6. Přístroj nemohou používat osoby, které mají v anamnéze epilepsii, srdeční onemocnění, kovové implantáty, kardiostimulátor a další závažná onemocnění.

7. Tento přístroj je určen pouze pro zdravou pokožku. Při používání se vyhněte oblastem po plastické operaci, ranám nebo vředům.
8. V případě jakýchkoli nepříjemných pocitů během používání okamžitě přestaňte přístroj používat a poradte se s odbornými lékaři.
9. Před použitím odstraňte kovové ozdoby.

Specifikace

Popis přístroje

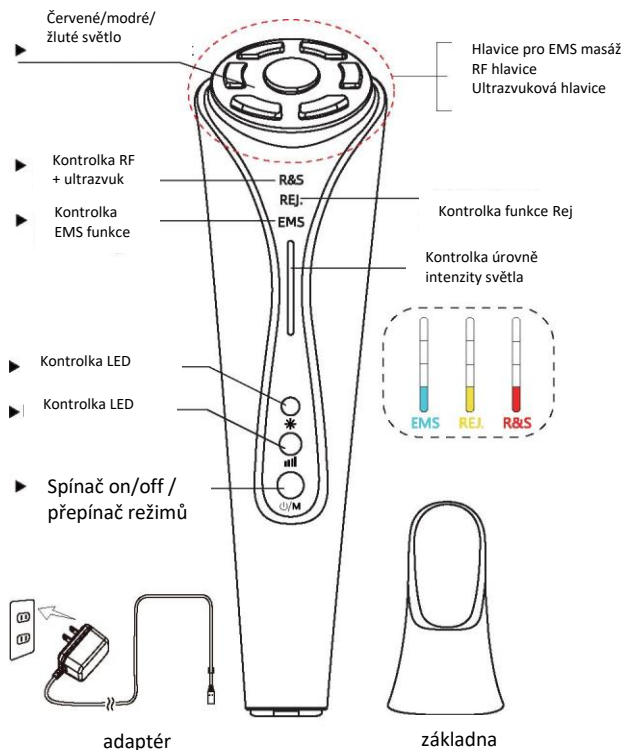

Specifikace

Název přístroje	Kosmetický přístroj s RFS filtrem	Typ	YH-RFS
Rozměry	49.5x47x168mm	Hmotnost	140 g
Výkon na vstupu	100 – 240 V	Výkon na výstupu	9 V—1500 mA

Tento přístroj má tři režimy

- EMS-Tight mode /režim mikroproudové napínací masáže (EMS)
- REJ.- deep spa mode / režim hloubkové obnovující péče
- R&S - Radio Rrequency sonic care mode / radiofrekvenční režim

Účinně řešené problémy

Tento přístroj se zaměřuje především na následující problémy:

1. Ochablá, povislá a vrásčitá pokožka
2. Tmavá pleť, skvrny, akné


Hlavní účinky:

1. Zlepšení ochabování
2. Redukce nosorettní rýhy, očních vrásek a dalších jemných vrásek
3. Procvíčení obličejových a krčních svalů
4. Podpora hydratace a rozjasnění pleti

Režim mikroproudové masáže EMS

Mikroproud procvičuje svaly, odstraňuje otoky kůže, zvedá mandibulární linii, vypíná obličej.


Po zapnutí přístroje je přístroj ve výchozím nastavení s funkcí EMS na úrovni 1 s červeným a modrým světlem.

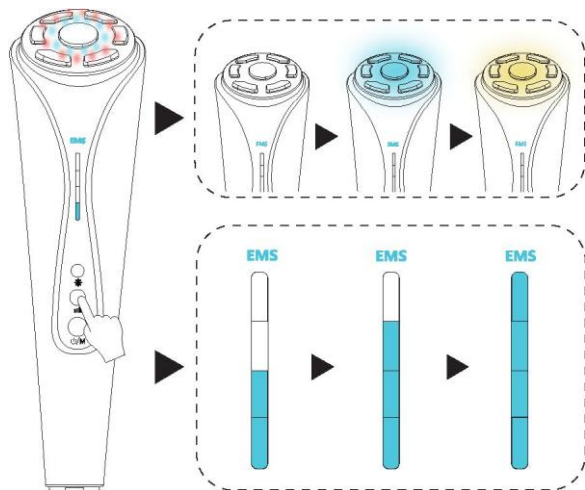

REJ. – režim hloubkové obnovující péče

Inovativní technologie: radiofrekvence ve stylu salonu krásy, nové lázeňské zkušenosti, hloubkové omlazení pleti, podpora tvorby kolagenu, boj proti stárnutí, vyhlazení známek stárnutí.

Pro zapnutí přístroje stiskněte vypínač / tlačítko režimu pro vstup do režimu REJ.+ červené a žluté světlo.

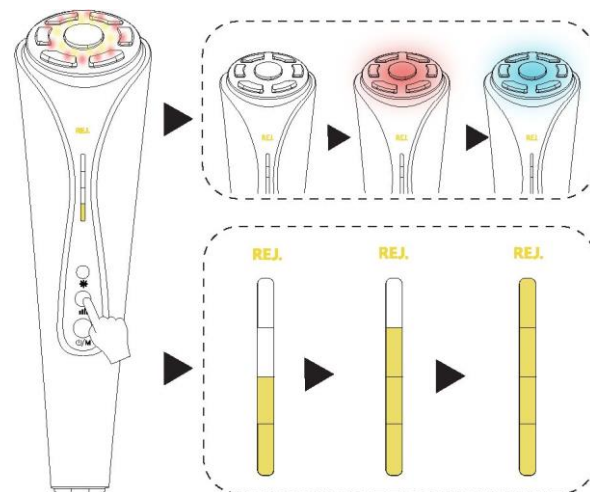

R&S- režim radiofrekvenční péče

Od hloubkové péče po mělkou, import výživy, posílení pružnosti pokožky, stimulace tvorby kolagenu. Po zapnutí přístroje dvakrát stiskněte vypínač/tlačítko režimu, vstupte do režimu červeného světla R&S+ a dopřejte celému obličejí sluneční lázeň, hydratujte pokožku zevnitř.

Režim aplikace	první 1-2 týdny	3-8 týdnů	Interval údržby
EMS-režim pro zeštíhlení & regeneraci	4-8 minut denně	Každé 2 dny po 4 minutách	1x týdně po 4 minutách
Rej- hloubkový obnovovací režim/deep spa	Každé 2 dny po 4-8 minutách	Každé 2 dny po 4 minutách	1x týdně po 4 minutách
R&S- režim RF péče	Každé 2 dny po 4-8 minutách	Každé 2 dny po 4 minutách	1x týdně po 4 minutách

Cyklus použití

Pro dosažení lepšího účinku postupujte podle níže uvedené aplikační tabulky. Po dvou týdnech zkratě dobu aplikace.

Připraven k použití

Kožní alergický test


- Jak je uvedeno na obrázku, naneste správné množství gelu na vnitřní stranu lokte, zapněte přístroj, zvolte režim a vyberte úroveň intenzity masáže 1,2,3,4. Masírujte vybranou plochu 2-3 minuty přístrojem, vypněte přístroj, nechte kůži přirozeně oschnout. Pokud se během 48 hodin neobjeví žádná abnormální reakce pokožky, můžete přístroj normálně používat.



Postup



1. Po vyčištění obličeje naneste správné množství gelového přípravku na příslušnou oblast.

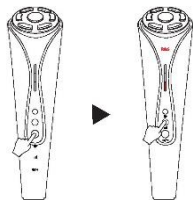

2. Po zapnutí přístroje vyberte režim, stisknutím tlačítka úrovně intenzity masáže vyberte příslušnou úroveň (Poprvé doporučujeme začít od úrovně 1 a nastavit ji podle tloušťky pokožky.)


Tip: nejprve zvolte režim radiofrekvenční a ultrazvukové péče R&S, proveďte výživu pleti, a teprve poté použijte ostatní režimy péče.



3. Po zapnutí přístroje přiložte masážní hlavici na pokožku a pomalu pohybujte přístrojem, jak je znázorněno níže, dokud nenamásírujete celý obličej.

(Pokud cítíte bodání, použijte krém, abyste udrželi pokožku vlhkou, podrobné techniky péče naleznete v následujícím textu)

Design: Po výběru režimu přístroj automaticky zvolí nejvhodnější LED světlo, poté můžete přístroj vypnout nebo vybrat jinou barvu světla.

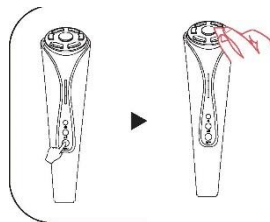

4. Stisknutím tlačítka vypínače/režimu na 1,5 sekundy přístroj vypnete, poté odpojte přístroj od napájecí sítě.


Čištění: Masážní hlavici otřete vlhkým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem (neoplachujte)

Techniky péče o pleť


A

Pokleslé koutky úst, zjevné nosoretní rýhy (Použijte režim R&S - hloubková obnovovací masáž)

Postupujte dle čísel, jak je znázorněno na obrázku, a na každém místě provádějte masáž asi 3 sekundy.

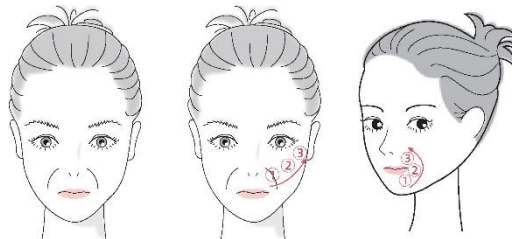


- B** Zpevnění obličeje
(Použijte režim REJ- deep spa/hlubková obnovovací masáž)
Jak je znázorněno, postupujte podle čísel na obrázku, na

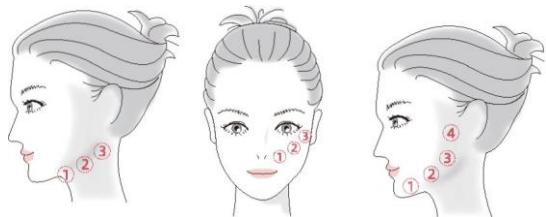


- C** Oční koutky, vrásky na čele
(Použijte R&S-radiofrekvenční režim)
Jak je znázorněno, postupujte podle čísel na obrázku, na každé pozici provádějte masáž asi 3 sekundy.



- D** každé pozici provádějte masáž asi 3 sekundy.
Procvičování obličejových svalů (Použijte EMS režim)
Jak je znázorněno, postupujte podle čísel na obrázku, na každé pozici provádějte masáž asi 3 sekundy.

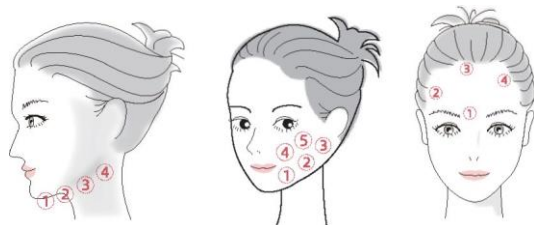


- E** Každodenní péče

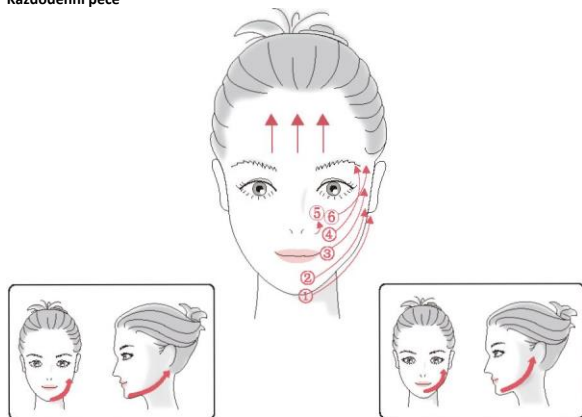


1. Od brady ke kořeni ucha **root**


2. Od brady k přední části ucha **if ear**

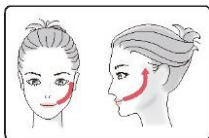


3. Od úst k hornímu konci ucha

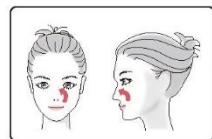

5. Nosní křídla

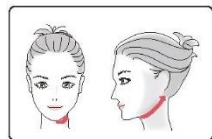


7. Čelist

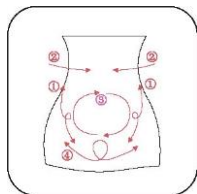


1. Pas, podbřišek


Účinek: tvaruje linii pasu a břicha, v pase postupujte podle znázorněných čísel v pořadí 1,2,3,4. Masírujte 10 minut.

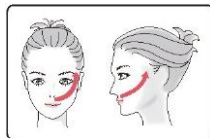


4. Od nosu ke konci obočí

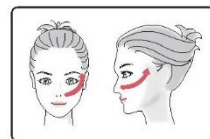

6. Od nosu ke spánku

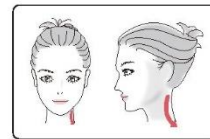


8. Od kořene ucha ke klíční kosti

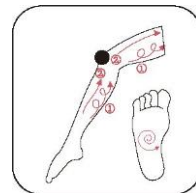


2. Chodidlo- noha

Účinek: zlepšuje, zpevňuje a tvaruje svaly nohou. Doba masáže: jedna noha 3-5 minut.

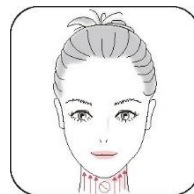

3. krk

Doba aplikace: 2 minuty. Od klíční kosti k linii obličje, postupujte podle znázorněných šipek.

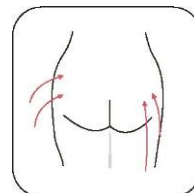

5.Zvednutí hýždí

Účinek: Po dlouhém sezení v práci nebo po zestárnutí hýždě přirozeně klesají nebo se zplošťují, tato péče může formovat napjaté a ven vykloněné hýždě.


Doba: zdola nahoru a z vnější strany k vnitřní po dobu 10 minut.

Po použití

1. Vyhnete přístroj;

2. **Otřete zbytky přípravků pro péči o pokožku na masážní hlavici vlhkým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem** (za účelem čištění nekládejte do vody ani nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky);


3. Uložte přístroj do krabice.

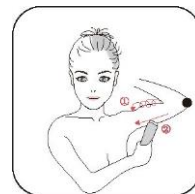

4. Obě paže

Vyberte dobu masáže při určité intenzitě: 3-5 minut

1. Provádějte kruživé pohyby od spodu nahoru 2. Jak je znázorněno na obrázku (vyhněte se lokti)

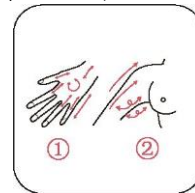

6.Ruce

Doba: jedna ruka po dobu 5 minut, jak je znázorněno. Masírujte střídavě několikrát dle obr. 2 od prstů až k ramenu.