

BEAUTY BUFFET INFUSE YOUR SKIN



POZNÁMKY:

- Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku Beauty Buffet.
- Řiďte se prosím pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze a dodržujte uvedené bezpečnostní informace. Tento návod k obsluze uchovejte pro budoucí použití.
- Tento přístroj je určen k poskytování pravidelné péče obličejovým partiím. Jakékoli jiné způsoby používání a prodeje v souvislosti se zdravotnickými účely nejsou dovoleny.

Beauty Buffet je přenosným multifunkčním kosmetickým přístrojem poskytujícím různé možnosti ošetření pleti. Pomocí výměnných masážních hlavic je možno využívat různé funkce a poskytovat kompletní péči pleti na obličeji se zaměřením na:

- hluboké čištění pokožky,
- podporu tvorby kolagenu,
- obnovení výživy hluboko v pokožce pro její hydrataci,
- vypnutí a lifting pokožky,
- řešení vrásek, jemných linek a mimických vrásek v koutcích očí,
- zmírňování zánětů kůže a prevence vzniku akné.

OBSAH

1. Specifikace	1
2. Bezpečnostní pokyny.....	2
3. Opatření k provozu a údržbě	2
4. Popis výrobku	3
5. Obrazovka displeje	3
6. Funkce.....	4
7. Návod k obsluze	5
8. Rychlá uživatelská příručka	7
9. Po použití	8

Specifikace:


Označení výrobku:	CM-21
Název výrobku:	Beauty Buffet
Vstupní napájení:	100-240 VAC
Výstupní napájení:	5 VDC 1000 mA
Baterie:	3,7 V 750 mA, lithium-iontová dobíjecí baterie
Nastavení časovače:	Automatické vypnutí po 5 minutách
Frekvence ultrazvuku:	3 MHz \pm 10 %
Fotonová terapie červeným světlem:	vlnová délka 622 \pm 5 nm
Fotonová terapie modrým světlem:	vlnová délka 467 \pm 2 nm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Toto zařízení nepoužívejte:

- spolu s lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, koncentrátor kyslíku, elektrokardiograf apod.
- k ošetření očí,
- za níže uvedených okolností:
 - během těhotenství a menstruace,
 - při alergické dermatitidě a krvácení,
 - při spálení nebo zarudnutí pokožky působením slunečních paprsků,
 - výskyt kožních vředů,
 - na místech po kosmetických chirurgických zákrocích,
 - teleangiektázie nebo poruchy funkce jater způsobené dlouhodobým užíváním steroidů nebo hormonů

Opatření k provozu a údržbě:

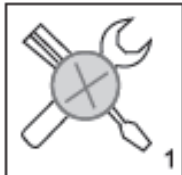


1
Neprovádějte demontáž tělesa a hlavice přístroje



2
Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí




3
Přístroj uchovávejte mimo působení otevřeného ohně

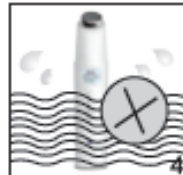

4
Přístroj chraňte před působením vlhkosti a vody




5
Přístroj chraňte před pády na zem a nárazy

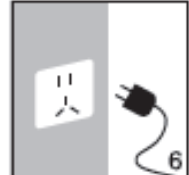

6
Po skončení nabíjení vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky

POPIS VÝROBKU

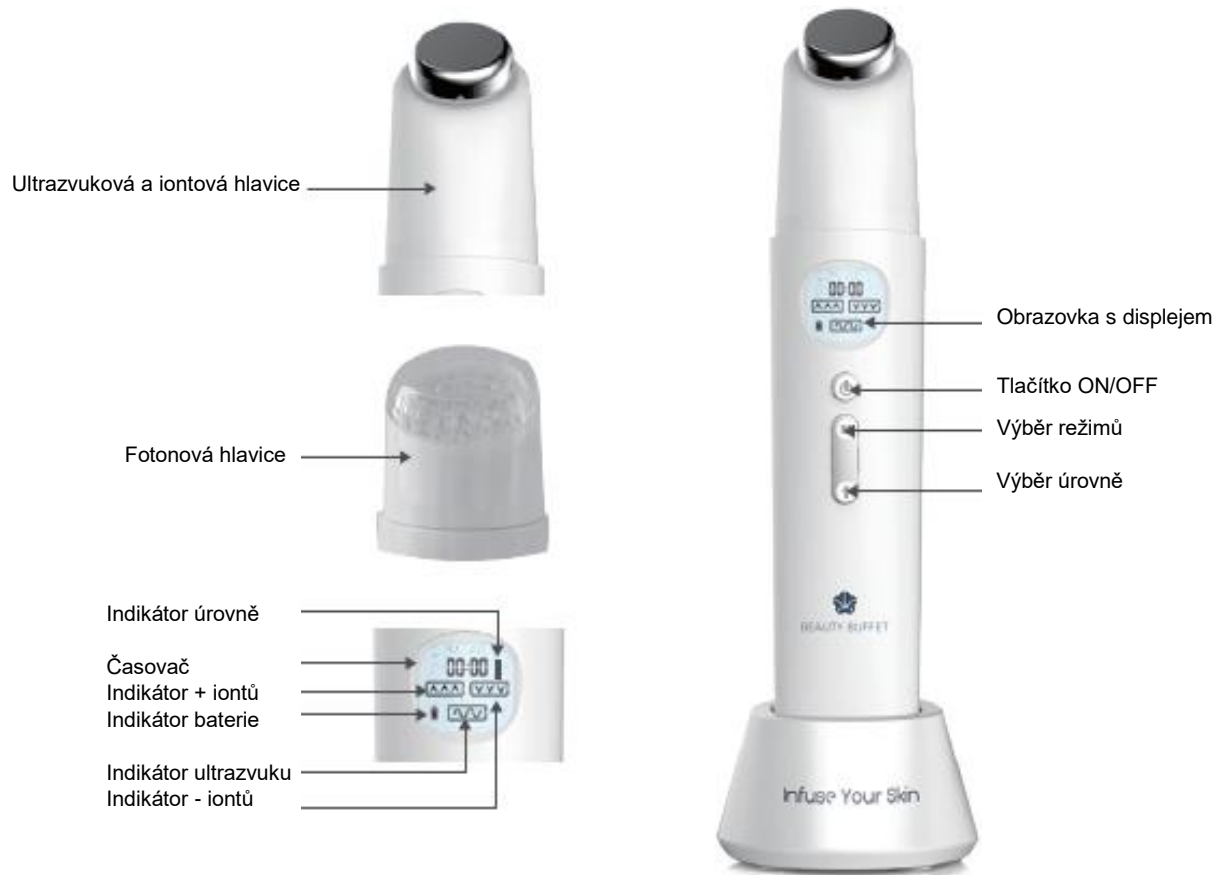

FUNKCE

Technologie přístroje Beauty Buffet zahrnují terapii ultrazvukem 3 MHz, iontovou terapii a fotonovou terapii červeným a modrým světlem, které jsou všechny klinicky ověřené jako bezpečné a účinné a vyhovující všem typům pleti.

1. Omlazování pokožky – ultrazvuk
2. Hluboké čištění – ultrazvuk a kladné ionty
3. Intenzivní indukce – ultrazvuk a záporné ionty
4. Zpevňování a lifting – červené světlo
5. Odstranění akné – modré světlo

- Kladné ionty dokáží provádět hluboké čištění pleti s odstraněním tuku a nečistot z pokožky.
- Záporné ionty vpravují výživné látky do kůže, čímž zlepšují výsledky vašeho přípravku péče o pokožku. Záporné ionty dokáží také čistit od make-upu odstraňováním zbytků těžkých kovů z kosmetických přípravků z pokožky. Galvanická stimulace urychluje metabolismus a aktivitu buněk a tím zlepšuje elasticitu kůže.
- Ultrazvuková terapie 3 MHz dokáže produkovat rovnoměrné a jemné ultrazvukové vlnění. Předáváním vibrací do pokožky dochází k detoxikaci lymfatického systému, zlepšování krevního oběhu a zvyšování absorpční schopnosti buněk pro hluboké zavádění výživných látek, což má viditelné účinky proti vráskám, jemným liniím, matnému zbarvení pokožky a její odulosti.
- Červené světlo: Podporuje tvorbu kolagenu a aktivitu buněk při omezování vrásek a jemných linií. Jeho vlnová délka může být aplikována také na citlivé oblasti, jako je pokožka kolem očí a kořene nosu.
- Modré světlo: Snižuje zánětlivost kůže, ničí bakterie a brání vzniku akné. Čištěním a vyvažováním kožního tuku pomáhá při liftingu a vypínání pokožky, stejně jako při čištění od akné a skvrn.

NÁVOD K OBSLUZE

Zapnutí přístroje:

ON: Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 0,8 sekundy.
Ozve se pípnutí a objeví se úvodní obrazovka.

OFF: Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 0,8 sekundy.
Ozve se pípnutí a přístroj se vypne.



Úvodní obrazovka


Volba režimů:

Stiskněte tlačítko „Mode“ (Režim). Toto zařízení má dvě masážní hlavice:


- Ultrazvuková a iontová hlavice
- Fotonová hlavice

Každým stisknutím tlačítka MODE se budete pohybovat v následujícím sledu:

Ultrazvuková a iontová hlavice:

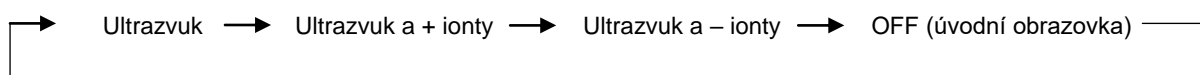

Fotonová hlavice:

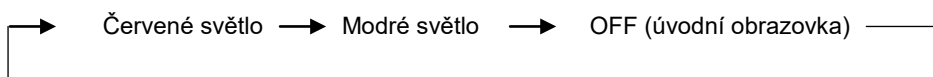

*Při volbě ultrazvuku začne blikat indikátor ultrazvuku.

* Při volbě ultrazvuku a kladných iontů začnou blikat indikátory ultrazvuku a kladných iontů.

* Při volbě ultrazvuku a záporných iontů začnou blikat indikátory ultrazvuku a záporných iontů.

Volba úrovně:

Každý blok na indikátoru úrovně platí pro jednu úroveň. Blok se zvyšuje od 1 do 3 odpovídajícím způsobem při zvyšování úrovně.

1. Při volbě terapie ultrazvukem je implicitní úroveň L (nízká). Při tisknutí tlačítka pro volbu úrovně se úroveň postupně mění takto:
M (střední) → H (vysoká) → L (nízká)
2. Při volbě terapie ultrazvukem s iontovou terapií se při každém stisknutí tlačítka pro volbu úrovně mění intenzita ultrazvuku o 1, zatímco intenzita iontů zůstává stejná.
3. Při volbě fotonové terapie výběr úrovně neplatí a indikátor úrovně se na obrazovce neobjeví.

Vypnutí:


Zařízení se automaticky vypne, jakmile uplyne určená doba.

Pokud po zapnutí přístroje nedojde k volbě žádného režimu, přístroj se automaticky vypne po 20 sekundách.

Všechny režimy jsou nastaveny na automatické vypnutí po 5 minutách.


Nabíjení:

1. Přístroj nabíjte před prvním použitím a poté pokaždé, když dojde k vybití baterie.
2. Vybití baterie: Jakmile úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, obrazovka rovnoměrným způsobem blikne 10 krát spolu s 10 pípnutími a zařízení se vypne.
3. Indikátor baterie má čtyři stavy:
 - Jakmile kapacita baterie klesne pod 30 %, ikona baterie bude prázdná.
 - Při nabití baterie mezi 31 a 60 % bude ikona baterie vyplněná z jedné třetiny.
 - Při nabití baterie mezi 61 a 80 % bude ikona baterie vyplněná ze dvou třetin.
 - Při nabití baterie mezi 81 a 100 % bude ikona baterie zcela vyplněná.

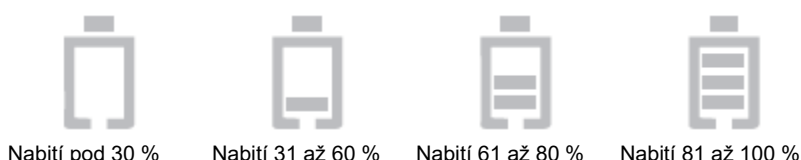

4. Průběh nabíjení:

- Jakmile se začne nabíjet prázdná baterie, střídavě blikají bloky 1, 2 a 3.
- Po naplnění 60 % kapacity baterie zůstane blok 1 svítit a bloky 2 a 3 budou střídavě blikat.
- Po naplnění 80 % kapacity baterie zůstanou svítit bloky 1 a 2 a blok 3 bude blikat.
- Po skončení nabíjení budou svítit všechny tři bloky.

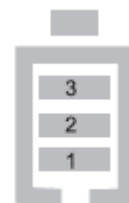

RYCHLÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Režim ultrazvuku a kladných iontů




1. Omyjte si obličej a rovnoměrně na něj naneste čistící prostředek.



1. Stiskněte tlačítko ON/OFF
2. Dvakrát stiskněte tlačítko MODE
3. Stiskněte tlačítko LEVEL

2. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte přístroj, poté stiskněte dvakrát tlačítko MODE (režim ultrazvuku a kladných iontů) a následně stisknutím tlačítka LEVEL zvolte odpovídající úroveň intenzity.

3. Držte přístroj tak, aby vaše ruka byla v kontaktu s elektrodou v podobě proužku na zadní straně tělesa přístroje. Masážní hlavici přiložte k obličejí a jemně s ní pohybujte po pokožce ve směrech vyznačených na obrázku vpravo (rychlostí přibližně 3 cm/s).

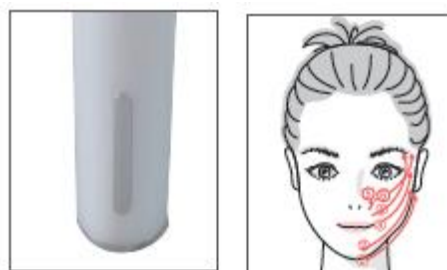

Dotýkejte se ruční elektrody


Režim ultrazvuku

1. Omyjte si obličej a rovnoměrně naneste vhodný ošetřující prostředek (gel nebo zvlhčující krém) na pleť i na hlavici přístroje.
2. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte přístroj, poté stiskněte jednou tlačítko MODE (režim ultrazvuku) a následně stisknutím tlačítka LEVEL zvolte odpovídající úroveň intenzity.
3. Masážní hlavici přiložte k obličejí a jemně s ní pohybujte po pokožce ve směrech vyznačených na obrázku (rychlostí přibližně 3 cm/s).



Stiskněte jednou tlačítko MODE

Stiskněte tlačítko LEVEL

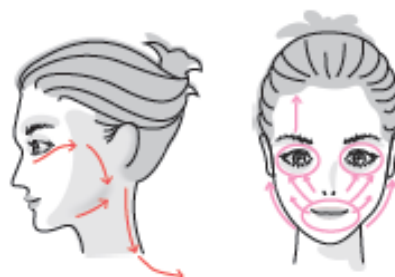

Režim ultrazvuku a záporných iontů

1. Omyjte si obličej a rovnoměrně naneste vhodný ošetřující prostředek na pleť i na hlavici přístroje.
2. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte přístroj, poté stiskněte třikrát tlačítko MODE (režim ultrazvuku a záporných iontů) a následně stisknutím tlačítka LEVEL zvolte odpovídající úroveň intenzity.
3. Držte přístroj tak, aby vaše ruka byla v kontaktu s elektrodou v podobě proužku na zadní straně tělesa přístroje. Masážní hlavici přiložte k obličejí a jemně s ní pohybujte po pokožce drobnými krouživými pohyby (rychlostí přibližně 3 cm/s).



Stiskněte jednou tlačítko MODE

Stiskněte tlačítko LEVEL

Fotonový režim

1. Omyjte si obličej a stiskněte jednou tlačítko ON/OFF na přístroji.
2. Stiskněte tlačítko MODE: jednou pro červené světlo a dvakrát pro modré světlo.
3. Světelnou terapii provádějte pomalými pohyby na požadovaných místech na obličejí.
4. Modrým světlem ošetřujte zejména místa s výskytem akné, na kterých nechejte masážní hlavici po určitou dobu působit.
5. Červeným světlem ošetřujte především vrásky, jemné linie a vrásky v koutcích očí, na kterých nechejte masážní hlavici po určitou dobu působit.

PO POUŽITÍ

- Po skončení terapie stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj vypněte.
- Setřete zbývající ošetřující prostředek z ultrazvukové a fotonové hlavice pomocí vlhkého tampónu nebo látky.
- Po použití přístroj uchovávejte na čistém a suchém místě.
- Přístroje přestaňte používat, pokud zjistíte nepříjemné pocity, a obraťte se na svého lékaře.