

Kosmetický přístroj Whale and Jelly

Ultrazvukový kavitační přístroj JAZ-1

Návod k obsluze



Děkujeme vám za to, že jste si zakoupili tento ultrazvukový kavitační přístroj. Před používáním tohoto přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze. Používání tohoto přístroje je založeno na předpokladu, že se jedná o péči o zdravou pokožku. Je zakázáno používat a prodávat jej pro léčebné účely.

Kosmetický přístroj Whale and Jelly

Ultrazvukový kavitační přístroj JAZ-1

Děkujeme vám za zakoupení tohoto ultrazvukového kavitačního přístroje od výrobce Goodwind. Na základě principu „fyzické terapie“ využívá tento přístroj mezinárodně uznávanou technologii pro péči o zdravou pokožku, jejího liftingu a napnutí, která spočívá v masáži ultrazvukovým zařízením, fotonové terapii, a koncentruje tuto péči do malého přenosného a pohotového přístroje pro každodenní použití. Tato energie pokožku nepoškozuje, stimuluje ji a podporuje její vitalitu, urychluje mikrocirkulaci v těle, zvyšuje zásobování kyslíkem a metabolismus tkání a omlazuje pokožku. Současně zlepšuje problémy s vysoušením, poklesem pokožky apod.

OBSAH

I. Pokyny k používání	2
II. Popis přístroje.....	3
III. Kosmetický přístroj Whale and Jelly.....	4
1. Použití přístroje.....	4
2. Funkce přístroje.....	4
3. Jak dosahovat dobrých výsledků	4
IV. Návod k obsluze	5
V. Metody čištění pokožky	7
VI. Metody stimulace svalů a péče o pokožku.....	8
VII. Metoda horního make-upu.....	9
VIII. Opatření při ošetřování pokožky	10
IX. Po použití	10

Bezpečné použití a bezpečnostní opatření



1. Přístroj sami nerozebírejte!



2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí!




3. Nabíjecí základna nesmí být ponořena do vody!



4. Přístroj chraňte před otevřeným plamenem!



5. Po použití přístroj vytáhněte ze zásuvky!


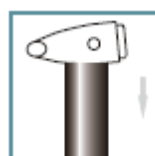


6. Přístroj chraňte před pády a nárazy!

Pokyny k používání


1. Pokud máte velmi citlivou pokožku, zkrátte dobu ošetření při prvním použití přístroje.
2. Při dobíjení přístroje používejte pouze originální nabíjecí základnu.
3. Pokud je přístroj poškozený nebo nefunguje správně, nepoužívejte jej.
4. Nabíjecí základna není vodotěsná a nesmí být používána ve vaně. Těleso přístroje je vodotěsné a je možno je ve vaně používat.
5. Přístroj nepoužívejte v obdobích nestálé sekrece hormonů, během fyziologických období, v těhotenství a v období laktace.
6. Přístroj nepoužívejte, pokud používáte kardiostimulátor, v případě, že trpíte epilepsií, onemocněním srdce nebo jinými vážnými chorobami.
7. Při použití se vyhněte místům ošetřeným plastickou chirurgií.
8. Tento přístroj je určen pro použití pouze na zdravé pokožce. Při jeho používání se vyhněte ranám a vředům na pokožce.
9. Pokud při používání přístroje zjistíte jakýkoli pocit nepohodlí, okamžitě přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým praktickým lékařem.

Popis přístroje

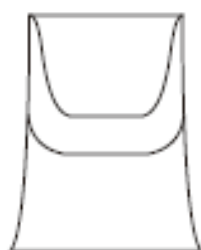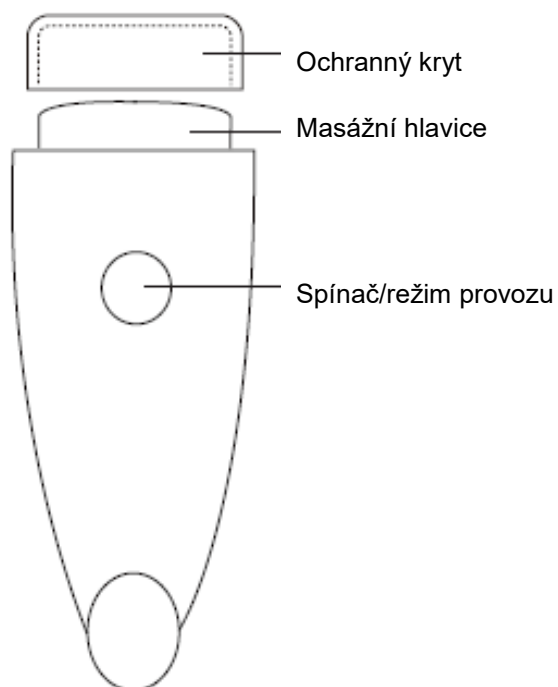

Nabíjecí základna – pohled zepředu

Nabíjecí
zdířka

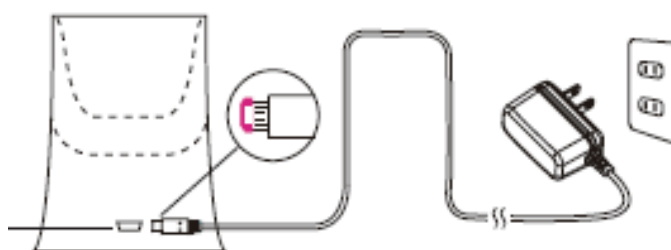

Nabíjecí základna – pohled zezadu

Nabíječka

Specifikace přístroje

Název	Kosmetický přístroj Whale and Jelly	Model	ZHF-JAZ-1
Vstup	10-240 VAC 50/60 Hz	Rozměry	58 x 56 x 162 mm
Výstup	5 VDC 1 A	Průměr masážní hlavice	46 mm
Hmotnost	176 g	Norma	Q/ZHF 002-2017

Kosmetický přístroj Whale and Jelly

Použití přístroje

Tento přístroj se používá především k následujícím účelům:

1. Pokleslá pokožka obličeje, vysušená pleť, zklidnění pokožky, odstranění vrásek
2. Ošetření po make-upu
3. Vyčištění pleti

Funkce přístroje

Ošetření ultrazvukem:

1. Lymfatická masáž: zlepšení lokálního lymfatického oběhu, zlepšení metabolismu a regenerace tkání, podpora krevního oběhu.
2. Vyživování pokožky: jemná masáž při frekvenci hlavice 800.000 za sekundu, zlepšení permeability buněčné stěny, účinné zavedení vyživovacích a zkrášlovacích přísad v produktech na péči o pleť do hlubokých vrstev buněk, podpora absorpce a posilování úlohy produktů péče o pleť.
3. Vypínání kůže: Ultrazvuk má fyzikálně-chemický účinek, který může podpořit syntézu kolagenu, zvýšit elasticitu kůže a omezit vznik jemných vrásek.
4. Zlepšení kontur: Jemné vibrace o vysoké frekvenci urychlují rozklad podkožního tuku, čímž dosahují efektu zeštíhlení.
5. Hluboké čištění: odstranění nečistot, přebytečných olejů a keratinu, udržování otevřených pórů.

Péče pomocí LED:

- Červené světlo (revitalizace pokožky)
Červené světlo o vlnové délce 622 ± 5 nm dokáže stimulovat buněčnou aktivitu a krevní oběh, čímž omezuje vznik vrásek a jemných linií.

Jak dosahovat dobrých výsledků

Do dvou týdnů od začátku používání přístroje byste měli být schopni dosahovat dobrých výsledků v souladu s následující četností používání. Po dvou týdnech můžete četnost používání snížit.

Pokyny k používání	Začátek 1-2 týdny	Následující období
Hlubkové čištění (spolu s čistícím přípravkem na obličej)	Jednou denně	2-3 krát týdně
Masáž (se sérem)	Jednou denně	2-3 krát týdně
Stálý make-up	Bez omezení	

Návod k obsluze

Zapnutí přístroje:

- Zapnutí přístroje – stiskněte a podržte tlačítko napájení/režimů po dobu 1 sekundy.
- Vypnutí přístroje – stiskněte a podržte tlačítko zapnutého přístroje po dobu 1 sekundy. Všechny funkce se zastaví.
- Po 10 minutách od poslední činnosti tlačítka napájení/režimů se přístroj vypne automaticky a všechny funkce se zastaví.




Výběr režimů:

- Normální režim

1. Dlouhý stisk po dobu 1 sekundy – výběr normálního režimu, režim ultrazvuku a červeného světla, kontrolka blikne každých 10 sekund (tento režim zvolte, pokud si nepřejete stimulaci pomocí vibrací).
2. Jeden krátký stisk – režim ultrazvuku a vibrací (tento režim zvolte, pokud si nepřejete ošetření červeným světlem).
3. Jeden krátký stisk – režim ultrazvuku, vibrací a červeného světla (doporučeno pro tento režim).




- Režim ad hoc

		
<p>Ve stavu vypnutí stiskněte dlouze po dobu 1 sekundy pro zapnutí režimu ultrazvuku a červeného světla.</p>	<p>Ve stavu vypnutí stiskněte dlouze po dobu 1 sekundy a jednou krátce pro zapnutí režimu ultrazvuku a vibrací</p>	<p>Ve stavu vypnutí stiskněte dlouze po dobu 1 sekundy a dvakrát krátce pro zapnutí režimu ultrazvuku, vibrací a červeného světla.</p>

Pokyny k nabíjení:

- Přístroj vložte do nabíjecí základny k jeho dobití.
- Pokud poklesne nabití dobíjecí baterie, ozve se alarm a kontrolka několikrát blikne, poté se vypne světlo a přístroj následně přestane pracovat.

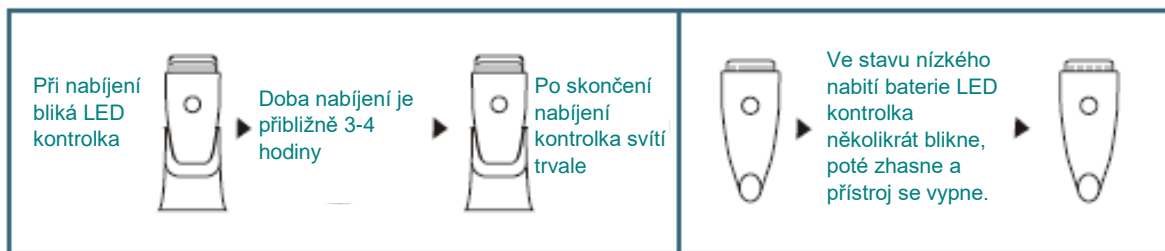

Opatření

- Dobíjecí baterie je spotřebním předmětem. Po opakovaném dobíjení nebo dlouhodobém používání baterie ztrácí svoji kapacitu. Doporučujeme kontaktovat výrobce, který provede opravu a výměnu baterie.
- Pro snížení znehodnocení baterie se doporučuje dobíjet baterii jednou za měsíc, pokud není přístroj po delší dobu používán.
- Mezi zástrčkou zdroje a zdíčkou v základně musí být mezera. Násilné zasouvání může způsobit nefunkčnost a poškození přístroje (viz níže).




Příprava před používáním

1. Zkouška pokožky na alergickou reakci

Jak je znázorněno na obr. 1, naneste odpovídající množství přípravku na péči o pokožku na vnitřní stranu lokte, přístroj zapněte a zvolte funkci, kterou požadujete. Masírujte pomocí přístroje po dobu asi 2-3 minuty, přístroj vypněte a nechte pokožku přirozeně oschnout. Pokud se do 48 hodin na pokožce nevyskytne neobvyklá reakce, je možno danou funkci přístroje normálně používat.

2. Ověření funkce ultrazvuku

Jak je znázorněno na obr. 2, na vodorovně umístěnou hlavici zapnutého přístroje naneste několik kapek vody. Při zapnuté funkci ultrazvuku vytvoří vodní kapky na hlavici přístroje vyvýšeninu.

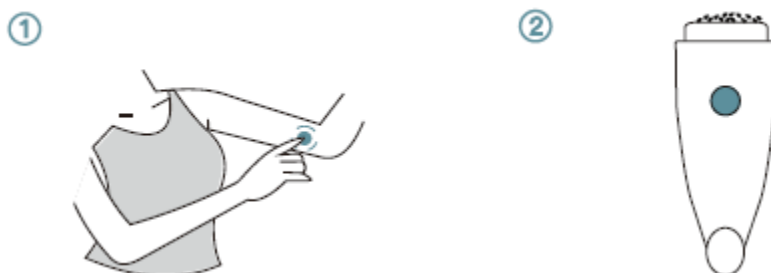

Metody čištění pokožky

(využití ultrazvukových vln k odstranění nečistot z povrchu pokožky)

Čistící prostředek v podobě pěny naneste na obličej.



Stisknutím tlačítka pro zapnutí přístroje a volbu režimu zvolte jakýkoli režim (doporučuje se použít režim vibrací a ultrazvuku) a navlhčete masážní hlavici.



Masážní hlavici pohybujte po pokožce pod mírným tlakem a pomalu měňte její polohu, viz obrázek vpravo. Vyhýbejte se citlivým místům, jako jsou řasy a oční víčka.



Čelo a kořen nosu



Kolem očí



Kolem nosu



Tváře

Po použití omyjte masážní hlavici vodou a vysušte ji pomocí polštářku navlhčeného v lihu.



Metody stimulace svalů a péče o pokožku

(provádění stimulace svalů ultrazvukem a vibracemi a zavádění výživových prostředků do vrchní vrstvy pokožky)

Po očištění obličeje naneste přípravek rovnoměrně na pokožku a stisknutím tlačítka pro zapnutí přístroje a volbu režimu zvolte jakýkoli režim (doporučuje se použít režim vibrací a ultrazvuku).



Podle obrázku vpravo pohybujte masážní hlavici pod mírným tlakem po pokožce nebo masce po dobu přibližně 5-10 sekund a pomalu měňte její polohu. Vyhněte se citlivým místům, jako jsou řasy a víčka.



Provádějte stimulaci svalů podle obrázku vpravo. Vyhněte se řasám, očním víčkům a pokožce na hrdle.



Po použití odstraňte nečistoty z masážní hlavice a vodu vysušte pomocí polštářku navlhčeného v lihu.



Metoda vrchního make-upu

(rovnoměrné rozprostření základu v jemné a tenké vrstvě)

Základ naneste na obličej a pomocí pudřenky nebo prstů make-up rozetřete.



Stisknutím tlačítka pro zapnutí přístroje a volbu režimu zvolte jakýkoli režim (doporučuje se použít režim světla, vibrací a ultrazvuku) a navlhčete masážní hlavici.



Podle obrázku vpravo pohybujte masážní hlavici pod mírným tlakem po pokožce nebo masce po dobu přibližně 5-10 sekund a pomalu měňte její polohu. Vyhýbejte se citlivým místům, jako jsou řasy a víčka.



Čelo a kořen nosu



Kolem očí



Kolem nosu



Tváře

Po použití omyjte masážní hlavici vodou a vysušte ji pomocí polštářku navlhčeného v lihu.



Opatření při ošetřování pokožky

1. Kavitační přístroj nepoužívejte pro účely jiné, než pro které je určen.
2. Po skončení určitého programu péče neprovádějte ošetření stejného místa na pokožce po dobu nejméně 5 hodin.
3. Masážní hlavici netlačte na pokožku pod příliš velkým tlakem. S hlavicí nezůstávejte příliš dlouho na jednom místě. Mohl by se vyskytnout pocit bolesti na kostech, zarudnutí a otok pokožky.
4. Během použití musí být kůže na tváři vlhká.
5. Během ošetření pokožky se vyhýbejte očím, očním víčkům, hrdlu a dalším částem těla.
6. Přístroj nepoužívejte s jinými elektrickými výrobky (kosmetickými přístroji apod.), které by mohly způsobit úraz elektrickým proudem.

Po použití

1. Po použití přístroj vypněte.
2. Na nečistoty, které ulpěly na hlavici, použijte slabé kyselé nebo zásadité rozpouštědlo (vlhké tampóny navlhčené lihem). Vnější část masážní hlavice otřete papírovou utěrkou nebo suchou látkou.
3. Nasadte kryt na přístroj a přístroj vložte do nabíjecí základny.

Často kladené dotazy

Otázka: Proč je masážní hlavice mírně lepkavá?

Odpověď: Masážní hlavice je vyrobena ze silikonu, který může při nevhodném uskladnění po delší době zestárnout. Hlavici otřete čistou látkou navlhčenou v lihu. Pokud to nepomůže, obraťte se na zákaznický servis, který provede výměnu hlavice.

Otázka: Je přístroj použitelný, pokud masážní hlavice ztratí svůj tvar?

Odpověď: Tato skutečnost obecně nemá vliv na používání přístroje.

Recyklace výrobku

Při recyklaci výrobku se řiďte předpisy na ochranu životního prostředí. Pokud dojde ke zničení přístroje, doporučujeme odevzdat jej spolu s veškerým příslušenstvím společností zabývajícím se recyklací elektronických výrobků.

Výměna masážní hlavice

Pokud se vyskytnou netěsnosti, zbarvení nebo lepkavý povrch masážní hlavice, přestaňte přístroj používat a obraťte se na prodejce, který zajistí její výměnu.

Klasifikace materiálů kosmetických přístrojů

1. Těleso přístroje, vodiče a ultrazvuková hlavice jsou považovány za elektronický, případně drobný chemický odpad obsahující cín, měď, železo a různé další materiály. Zvláštní klasifikace je založena na platných místních předpisech.
2. Obalové materiály a návody k obsluze je možno recyklovat podle požadavků místní organizace na likvidaci odpadů. Tyto materiály se recyklují na určeném místě nebo jsou odváženy společností zabývajícím se zacházením s odpadovými materiály.
3. V některých zemích nesmějí být tyto přístroje likvidovány spolu s domovním odpadem z toho důvodu, že obsahují plasty a elektronické komponenty. Řiďte se příslušnými předpisy dané země.