

# BACTINYL DESINFEKČNÍ UBROUSKY PARFÉMOVANÉ



## VÝHODY

- Bezpečné i pro ty nejkřehčí povrchy
- Baktericidní, kvasinkocidní a virucidní účinnost
- Styk s potravinami



Formule douce



## APLIKACE

Jednorázové ubrousky naimpregnované desinfekčním roztokem pro kontaktní čištění a desinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků, lékařských přístrojů, vybavení a zařízení. Zdravotnický prostředek. TŘÍDA IIA.


## NÁVOD K POUŽITÍ

Otřete plochy pomocí BACTINYL PARFÉMOVANÝCH DESINFEKČNÍCH UBROUSKŮ. Respektujte dobu působení po přetření ubrouskem v závislosti na požadované účinnosti. Nechte uschnout. Opláchněte pouze v případě kontaktu s povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami. Po použití víčko dobře uzavřete, aby byla impregnace optimální až do použití posledního ubrouska. Nenahrazuje desinfekci namáčením.

V souladu s nařízením ze dne 19/12/13 pozměňujícím nařízení ze dne 08/09/99, týkajícím se prostředků pro čištění vybavení a předmětů určených k přijetí do styku s potravinami.

## FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI KAPALNÉ IMPREGNACE

Vzhled:	kapalina
Barva:	bezbarvá
Vůně:	borovice
Hustota:	= 1
pH prostředku:	slabá zásada
Trvanlivost:	2 roky
Skladování:	4°C - 35°C

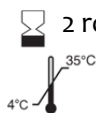

## MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI KAPALNÉ IMPREGNACE

**Baktericidní účinnost:** EN 13727 (podmínky špíny - 1 min - 20°C), EN 14561 (podmínky špíny - 5 min - 20°C), EN 16615 (podmínky špíny - 2 min +/- 15 s - 20°C)

**Kvasinkocidní účinnost:** EN 13624 (podmínky špíny - 1 min - 20°C), EN 14562 (podmínky špíny - 15 min - 20°C), EN 16615 (podmínky špíny - 2 min +/- 15 s - 20°C)

**Sporicidní účinnost:** EN 13704 na Bacillus Subtilis a Clostridium difficile (podmínky čistoty - 60 min - 20°C)

**Virucidní účinnost:** EN 14476 kompletně na Norovirus, Poliovirus a Adenovirus (podmínky špíny - 15 min - 20°C); Coronavirus a Papillomavirus (podmínky špíny - 15 min - 20°C), PRV\*, BVDV\* a H1N1 (podmínky špíny - 5 min - 20°C), Herpès, Vaccinia virus a Rotavirus (podmínky špíny - 5 min - 20°C), HIV (podmínky špíny - 60 s - 20°C)

\* Swine Pseudorabies Virus (PRV) a Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) jsou substituty pro HBV (Hepatitis B) a HCV (Hepatitis C).

## BALENÍ

Krabička 120 ubrousků

Ref. LB920600

Krabička 120 ubrousků (velký formát) Ref. LB920740

## BEZPEČNOST

Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití. Pro více informací konzultujte bezpečnostní list.