

Clario



MOBILITA A SPOLEHLIVOST



Odsávačka Clario

Vzácný život – progresivní péče

CLARIO

Snadné použití a vysoká mobilita

Zdravotničtí pracovníci zaměřeni na domácí ošetřování a pacienti, kteří potřebují provádět odsávání dýchacích cest, oceňují na odsávačce Clario její chytré technické řešení a elegantní design.

Modulární konstrukce odsávačky Clario se skládá ze 3 hlavních částí zajišťujících snadnou a jednoduchou montáž:

- Pohon
- Nádrž
- Bezpečnostní komora

Přístroj Clario má 3 předem nastavené úrovně podtlaku, čímž je zajištěna snadná obsluha.

Přístroj Clario je vysoce hygienický, neboť žádné sekrece se nemohou dostat do čerpadla, a pravidelné mytí je tak velmi snadné.

Přístroj Clario je okamžitě připraven pro dalšího uživatele.

Lehká konstrukce přístroje znamená, že je možné jej vzít s sebou kamkoli. Přístroj Clario je k dispozici i s napájením na baterie, čímž je jeho mobilita ještě vyšší.



- a Plovák zabraňuje přetečení
- b Zátky pro bezpečnou přepravu
- c Nádržka 0,5 l
- d Regulátor podtlaku
- e Bezpečnostní komora
- f LED indikace stavu baterie
- g Madlo pro přenášení

Vysoká mobilita v kombinaci s vysokou spolehlivostí

Přístroj Clario kombinuje chytrá technická řešení, elegantní design a snadné použití. Skládá se pouze z 3 částí, které lze do sebe zaklapnout během pár vteřin. Trubičky používané k odsávání jsou šikově umístěny na víko nádržky. Přístroj Clario nabízí 3 snadno nastavitelné a srozumitelné úrovně podtlaku. Diody u verze AC/DC indikují, kdy je třeba dobít baterii. Všechny tyto prvky jsou prezentovány v přitažlivém diskretním designu. Zároveň se přístroj vyznačuje i velmi tichým chodem.



Snadné použití

Třídílná hygienická konstrukce

Přístroj Clario má třídílnou hygienickou konstrukci. Plovák zabraňuje přetečení. Bezpečnostní komora odebere sekrece v případě, že by byl plovák opomenut. Konečně pak membrána zabrání, aby se jakékoli sekrece dostaly do čerpadla. Tato opatření zajišťují, aby nedocházelo k přetékání do mechanických částí čerpadla. Není potřeba přístroj otevírat při čištění a ani nejsou potřeba žádné filtry. Čerpadlo se snadno čistí, aby se zabránilo křížné kontaminaci mezi pacienty.



Snadné čištění

Kompaktní a snadno přenosný

Přístroj Clario nabízí uživatelům větší svobodu. Verze poháněná baterií váží pouhých 2 kg a má k dispozici dobíjecí baterii, která umožňuje více jak 50 minut provozního času. Volitelná přepravní taška pro odsávačku a příslušenství umožňují diskretní a pohodlnou přepravu.



Snadná přeprava

Několik stručných údajů

- Společnost Medela nabízí odborníkům ve zdravotnictví více jak 50 let zkušeností s podtlakovou technologií.
- Naše firma sídlící ve Švýcarsku se stará o vývoj a výrobu tak, aby výsledkem byla mechanická přesnost zaručující výtečné provozní vlastnosti.
- Přístroj Clario je oceňován v domácí péči díky své spolehlivosti a snadnému použití.
- Přístroj Clario nabízí moderní a přitom nadčasový design. Nevypadá jako typický lékařský přístroj.
- Přístroj Clario je vysoce doporučován zdravotními odborníky zaměřujícími se na domácí péči.
- Čištění přístroje Clario nepředstavuje velké nároky na čas a vydanou energii.
- Hygienický třídílný design přístroje Clario's zabraňuje křížné kontaminaci.
- Přístroj Clario se vyznačuje zvýšenou mobilitou a představuje tak pokrok v kvalitě života.
- 2 roky záruky na přístroj.

Již více jak 50 let dodáváme skvělé výrobky – vysoce kvalitní švýcarské zdravotní podtlakové systémy.

Příslušenství

Kabel 12 VDC pro
připojení v automobilu.



Manometr pro sledování
hodnot podtlaku.



Měkká brašna pro snadné
a diskrétní převážení.




Použijte příslušenství Medela pro ještě větší flexibilitu
a snadnější použití.

Technické údaje



min. -18 kPa -135 mmHg
med. -36 kPa -270 mmHg
max. -80 kPa -600 mmHg

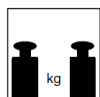


AC 1,7 kg
AC/DC 2,0 kg




ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEC), IIa
2 roky záruka

CE 0123

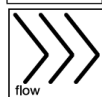

nízký průtok
15 L/min

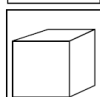

V X Š X H
223 x 255 x 95 mm



Napájení
100 - 240 V
50 - 60 Hz

Lékařská vakuová technologie pro zdravotnické odborníky

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Přemyslova 25

301 00 PLZEŇ

Telefon: 377 424 999

E-mail: krasny@szo.cz ; E-shop: www.szo.cz

Medela Australia Pty Ltd
Medical Technology
3 Arco Lane
Heatherton, Vic, 3202
Austrálie
Tel. +61 (0) 3 9552 8600
Fax +61 (0) 3 9552 8699
contact@medela.com.au
www.medela.com.au

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Cres., Unit #8
Mississauga, Ontario
L5L 0A1
Kanada
Tel.zdarma 800.435.8316
Fax zdarma 800.995.7867
info@medela.ca
www.medela.ca

Medela UK
Huntsman Drive
Northbank Industrial Park
Irlam, Manchester M44 5EG
UK
Tel. +44 870 950 5994
Fax +44 870 389 2233
info@medela.co.uk
www.medela.co.uk

Medela Inc. USA
1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050
USA
Tel. +1 877 735 1626
Fax +1 815 363 2487
suction@medela.com
www.medelasuction.com